COME USARE



Quiet Quiet Plus Engage Engage Plus

Experience Experience Plus Switch

Come

INDOSSARE ITAPP

- Inserire il tappo nell'orecchio utilizzando due dita.
- Sirare il tappo all'indietro finché non è posizionato comodamente nell'orecchio.
- > I tappi non dovrebbero sporgere dall'orecchio o essere visibili guardandosi allo specchio.



INDOSSARE I TAPPI LOOP DREAM

- Spingere indietro il padiglione auricolare.
- Inserire l'inserto nel canale uditivo (non c'è bisogno di girare il tappo).
- > Premere per 5 secondi per fissare il tappo in posizione.
- I tappi non dovrebbero sporgere dall'orecchio o essere visibili guardandosi allo specchio.



INSERIE I TAPPI PER BAMBINI

- Inserire il tappo nell'orecchio e ruotarlo all'indietro.
- Provare a muoverlo per assicurare che sia nella posizione corretta e più comoda.
- I tappi non dovrebbero sporgere dall'orecchio o essere visibili guardandosi allo specchio.



Tutti i tappi

Come

INDOSSARLI AL MEGLIO





Engage Plus | Experience Plus



Quiet Plus



Dream



Tutti i tappi

- > Provare tutte le taglie disponibili.
- Se non aderiscono bene, provare una taglia più grande.




Se sporgono o sono scomodi, provare una taglia più piccola.



La taglia giusta potrebbe essere diversa da un lato all'altro.

Se si sente la propria voce a un volume più alto, la taglia degli inserti è giusta.

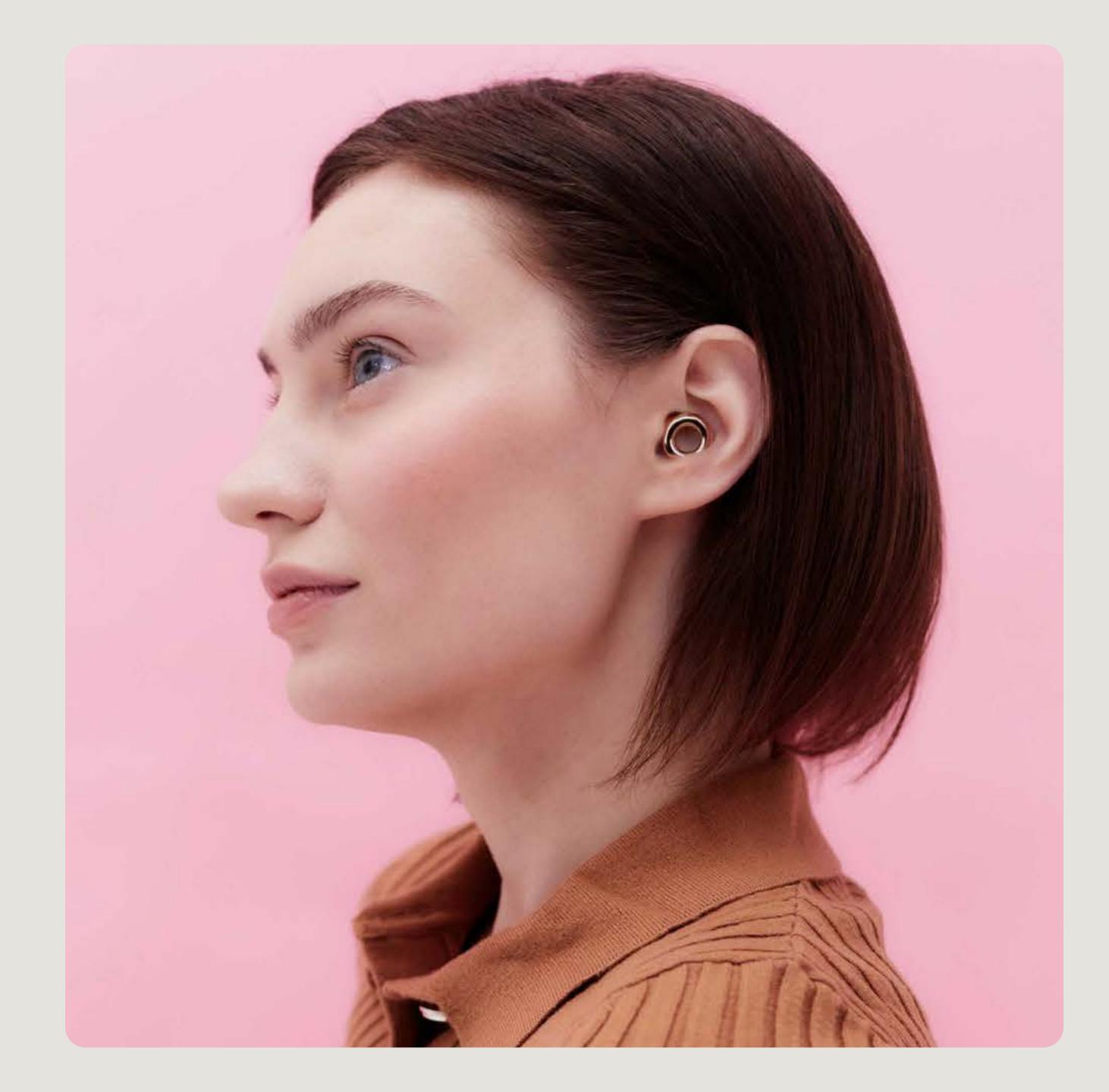

Quiet Quiet Plus Engage Engage Plus

Experience Experience Plus Switch

Come

CAMBIARE CAMBIARE CAMBIARE CAMBIARE

- 1. Staccare l'inserto avendo cura di non tirare troppo.
- 2. Allineare il nuovo inserto e spingere finché non si attacca.

L'inserto non si attacca? Sollevare il cappuccio, allineare le due estremità, spingere e riposizionare il cappuccio.



CAMBIARE GLI INSERTI LOOP DREAM

- 1. Staccare l'inserto facendo pressione sui lati e tirando verticalmente.
- 2. Allineare le estremità dell'inserto e del tappo.
- 3. Spingere l'inserto sul tappo.

Assicurarsi che l'inserto sia ben collegato tirandolo leggermente verso l'alto.

Se non si aggancia bene o sembra storto, ripetere l'operazione.

Se la parte in schiuma sporge, aprire lo strato in silicone e riposizionarlo.





PULIRE I TAPPI

- > Staccare l'inserto avendo cura di non tirare troppo.
- > Pulire gli inserti auricolari in silicone con dell'acqua.
- Asciugare con un panno morbido.
- Aspettare che gli inserti si siano asciugati completamente prima di riposizionarli sul tappo.

Non immergere in acqua l'intero tappo. Per proteggere i filtri, pulire il tappo con un panno umido.

Evitare l'utilizzo di prodotti chimici aggressivi od oggetti appuntiti.

Tenere lontano da polvere e sabbia.



PULIRE I TAPPI LOOP DREAM

- Staccare l'inserto avendo cura di non tirare troppo (non staccare la parte in schiuma da quella in silicone).
- Pulire il tappo e l'inserto con un panno morbido umido (usare solo acqua e sapone).
- Aspettare che gli inserti si siano asciugati completamente prima di riposizionarli sul tappo.

Non immergere in acqua l'intero tappo. Pulire con un panno umido.

Evitare l'utilizzo di prodotti chimici aggressivi od oggetti appuntiti.

Tenere lontano da polvere e sabbia.



Loop Experience Plus

Come

INSERIRE L'ACCESSORIO LOOP MUTE

La confezione dei Loop Experience Plus e degli Engage Plus contiene l'accessorio extra Loop Mute.

Questo accessorio offre un'ulteriore protezione dai rumori nei momenti più ad alto volume della vita.

- Per inserire il Loop Mute, allinearlo al tappo e spingere il lato corto al centro del tappo.
- > L'accessorio deve rimanere allineato alla parte interna del tappo senza sporgere.




Loop Switch

Come

SELEZIONARE LE MODALITA DEI TAPPI SWITCH

Alzare o abbassare il selettore mentre si indossano i Loop Switch per attivare la modalità di riduzione dei rumori desiderata.

Quiet: massima riduzione dei rumori; Engage: momenti sociali e conversazioni; Experience: eventi e musica dal vivo.

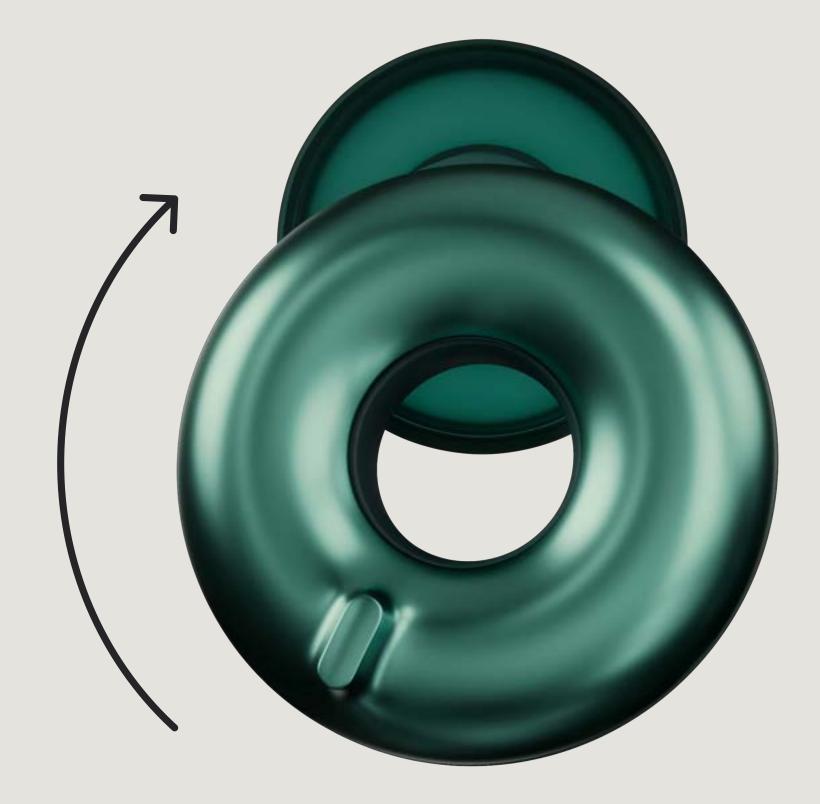

	Modalità Quiet	Modalità Experience	Modalità Engage
NRR	20 dB	17 dB	24 dB
SNR	26 dB	23 dB	20 dB

All earplugs

Come

RIPORRE ITAPPI

Riporre i tappi nella Carry Case inclusa nella confezione per tenerli al sicuro e portarli sempre con sé.

Posizionare la Carry Case dei Loop Dream sul comodino e utilizzarla per riporre i tappi al risveglio.

