

CÓMO USAR TUS NUEVOS TAPONES LOOP

Quiet | Quiet Plus | Experience | Experience Plus | Engage | Engage Plus | Engage Kids | Dream | Switch



Quiet

Quiet Plus

Engage

Engage Plus

Experience

Experience Plus

Switch

Cómo PONERTE LOS TAPONES

- Introduce el tapón con dos dedos
- Gíralo hacia atrás hasta que encaje cómodamente en la base del oído.
- Los tapones no deben sobresalir ni ser visibles desde el frente.




Dream

Cómo

PONERTE LOS TAPONES LOOP DREAM


- > Tira de la parte de atrás de la oreja.
- > Introduce la almohadilla en el oído [no es necesario girarla].
- > Presiona suavemente durante 5 segundos para que se ajuste bien.
- > Los tapones no deben sobresalir ni ser visibles desde el frente.

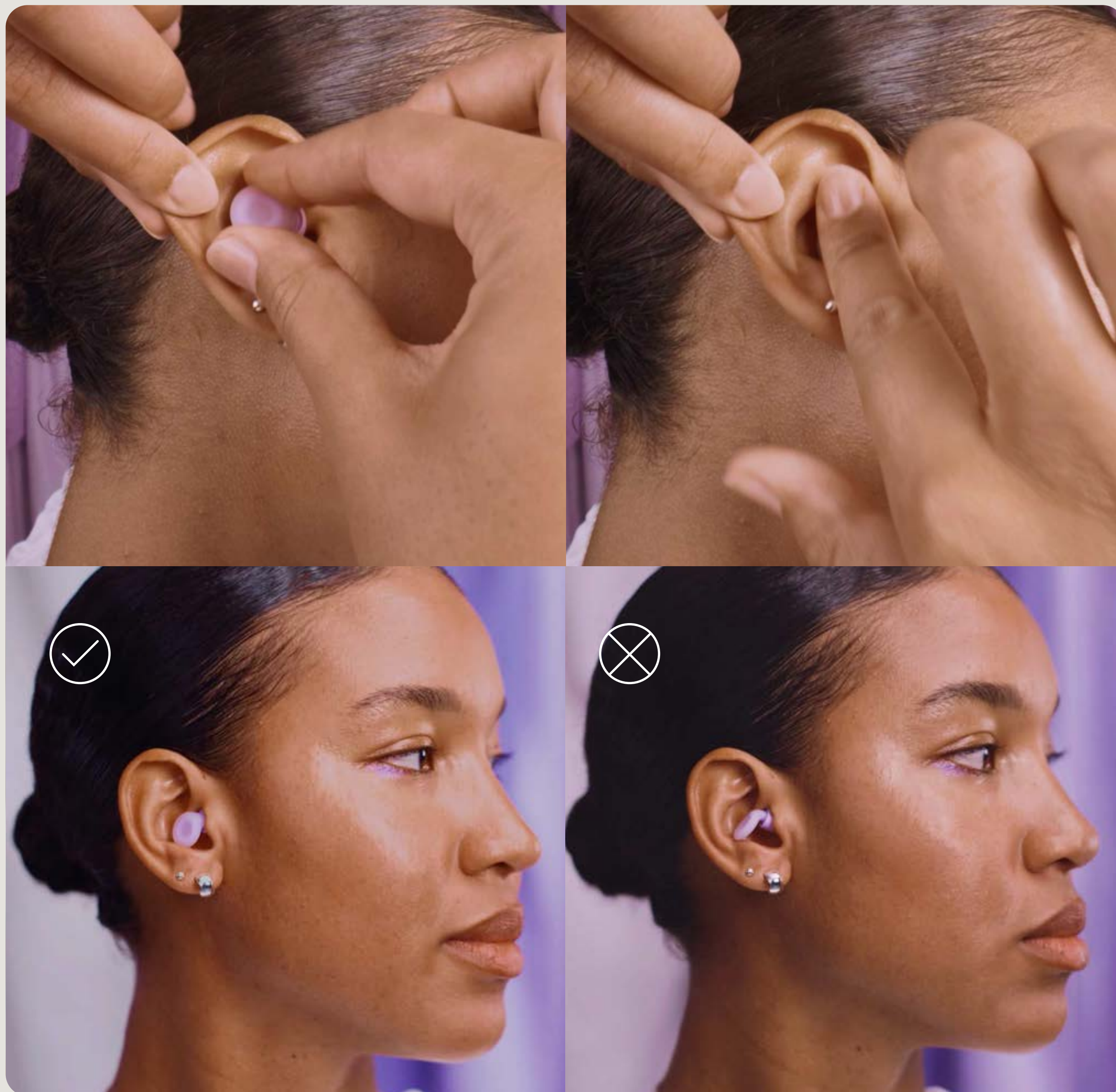

Engage 2 Kids

Cómo PONER LOS TAPONES PARA NIÑOS


- Introduce la almohadilla y gira el tapón hacia atrás.
- Muévelo un poco para asegurarte de que quede bien sujeto y resulte cómodo.
- Asegúrate de que los tapones no sobresalgan y no sean visibles desde el frente.

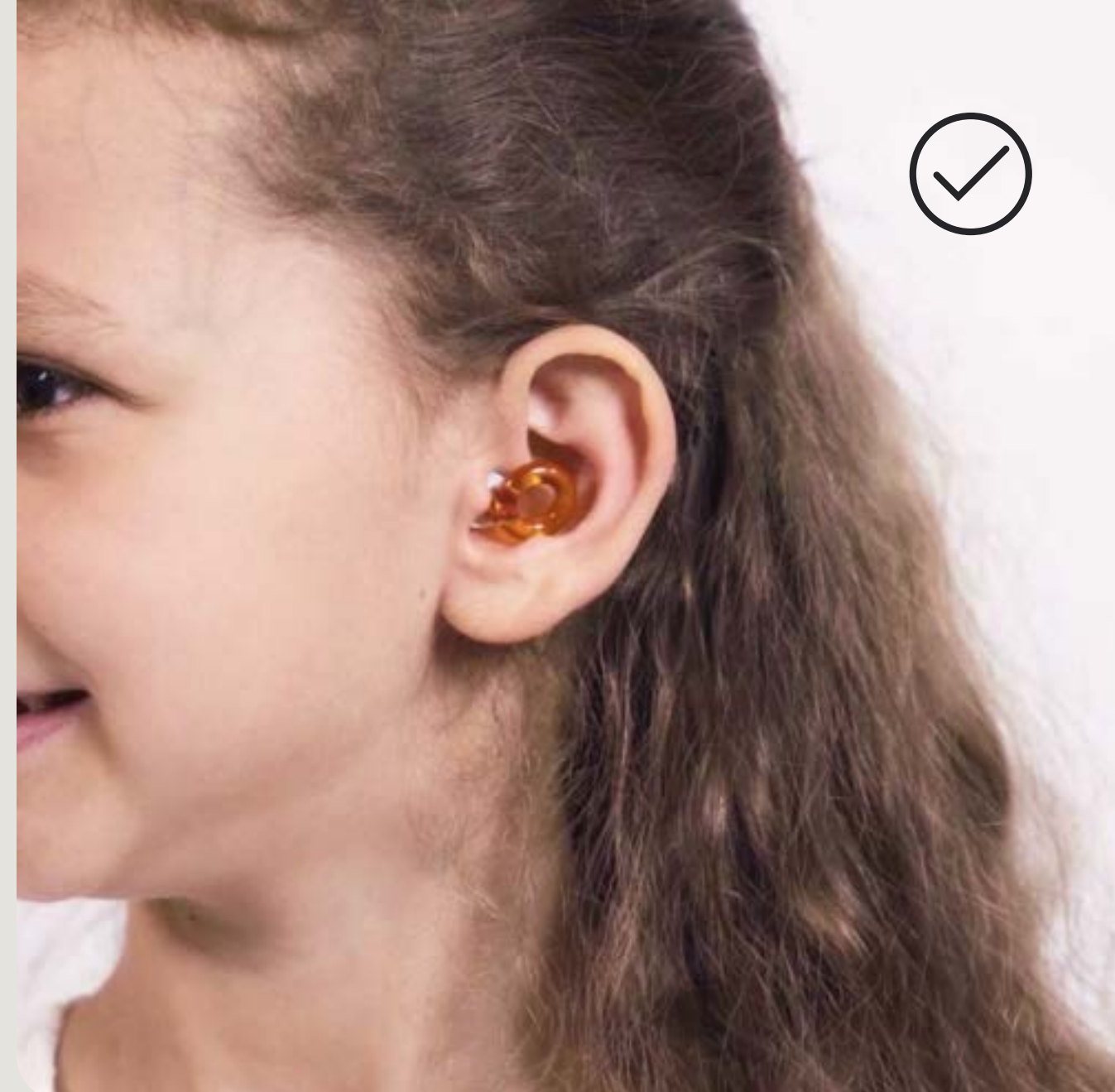


Todos los tapones

Cómo ENCONTRAR LA TALLA IDEAL


Quiet | Engage | Experience | Engage Kids | Switch

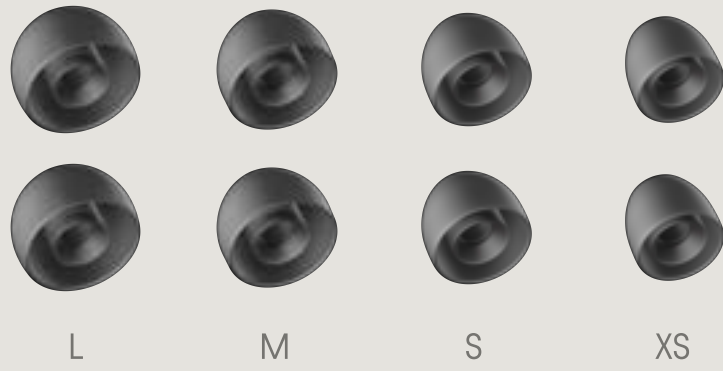


Engage Plus | Experience Plus

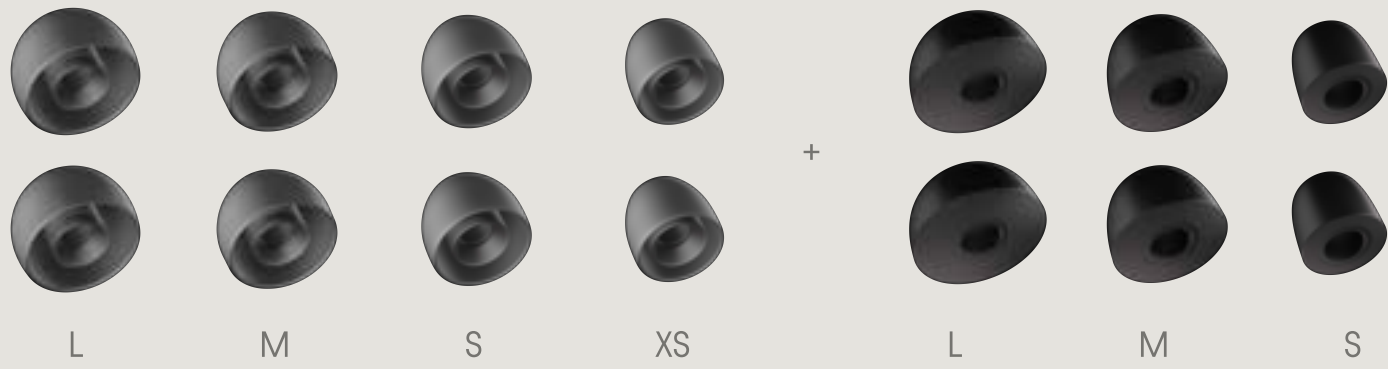

Quiet Plus

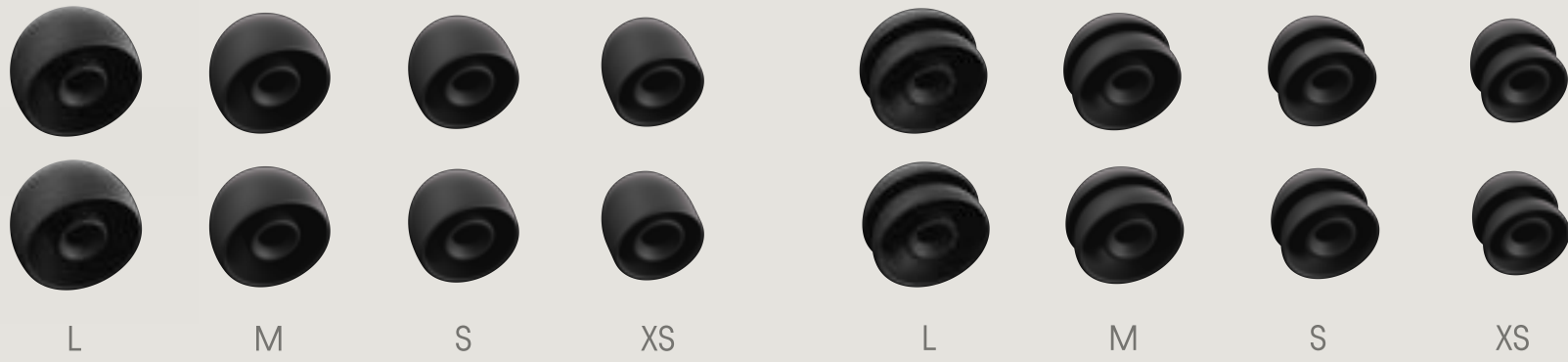

Dream

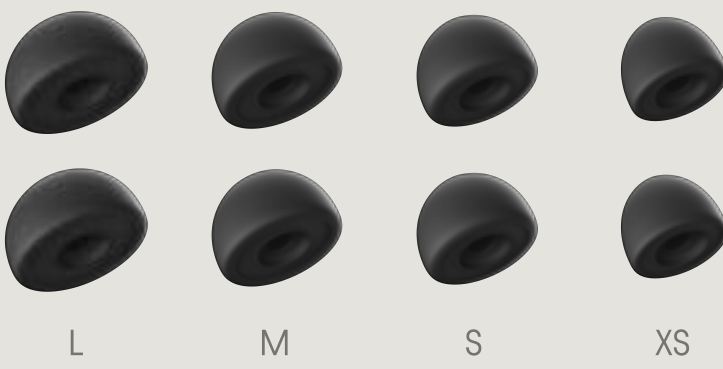

Todos los tapones

- > Prueba todos los tamaños de almohadillas hasta encontrar el que mejor te quede.
- > Si no se sienten bien sujetos, prueba con un tamaño más grande.
- > Si sobresalen o te resultan molestos, prueba con un tamaño más pequeño.



El tamaño puede ser diferente para el oído derecho e izquierdo.

Si te oyes hablar a más volumen que con el tamaño anterior, es señal de que el ajuste es correcto.



Quiet

Quiet Plus

Engage

Engage Plus

Experience

Experience Plus

Switch

Cómo CAMBIAR LAS ALMOHADILLAS

1. Retira la almohadilla con suavidad.
2. Colócala en su sitio y empújala hasta que encaje.

¿Tienes problemas para encajar la almohadilla? Dale la vuelta, presiónala contra el tapón y vuelve a darle la vuelta.



Dream

Cómo CAMBIAR LAS ALMOHADILLAS DE LOS LOOP DREAM

1. Aprieta suavemente la almohadilla y tira para sacarla.
2. Alinea la apertura ovalada de la almohadilla con el soporte.
3. Empuja la almohadilla contra el tapón.

Asegúrate de que la almohadilla esté completamente fijada al tapón para que no se separe al tirar.

Si no se desliza fácilmente o se siente forzada, vuelve a comprobar si su posición es la correcta.

Si la espuma sobresale, desenrolla la capa de silicona y vuelve a enrollarla.



Quiet

Quiet Plus

Engage

Engage Plus

Experience

Experience Plus

Switch

Cómo LIMPIAR LOS TAPONES

- > Retira la almohadilla con suavidad.
- > Sumerge en agua las almohadillas de silicona.
- > Límpialas con un paño suave.
- > Espera hasta que las almohadillas estén completamente secas y vuelve a encajarlas en los tapones.

No sumerjas en agua todo el cuerpo del tapón. En lugar de ello, límpialo con un paño húmedo para proteger los filtros.

No uses productos químicos agresivos ni objetos afilados.

Mantenlos alejados de las fuentes de polvo y arena.



Dream

Cómo LIMPIAR LOS TAPONES LOOP DREAM

- > Retira la almohadilla con suavidad (no separes la espuma de la capa de silicona).
- > Limpia la almohadilla y el tapón con un paño suave y húmedo y agua con jabón.
- > Espera hasta que tus almohadillas estén completamente secas y vuelve a encajarlas en los tapones.

No sumerjas en agua todo el cuerpo del tapón. En lugar de ello, límpialo con un paño húmedo para proteger los filtros.

No uses productos químicos agresivos ni objetos afilados.

Mantenlos alejados de las fuentes de polvo y arena.



Loop Engage Plus

Loop Experience Plus

Cómo INSERTAR LOS TAPONES LOOP MUTE

Tanto los tapones Loop Experience Plus como los Engage Plus incluyen un accesorio adicional llamado Loop Mute.

El accesorio Mute te proporciona una reducción de ruido adicional bajo demanda para los momentos más ruidosos de la vida.

- > Para insertar el accesorio Mute, alinea su lado más pequeño con el centro del tapón Loop y empújalo.
- > El accesorio Mute debe quedar a ras de la parte interior del tapón Loop y no sobresalir.




Loop Switch

Cómo CAMBIAR DE MODO

Gira el selector hacia arriba o hacia abajo con el Loop Switch colocado en el oído para ajustar el modo de reducción de ruido que prefieras.

Elige el modo Quiet para una máxima reducción del ruido, el modo Engage para socializar y el modo Experience para disfrutar de la música en directo o asistir a cualquier evento.

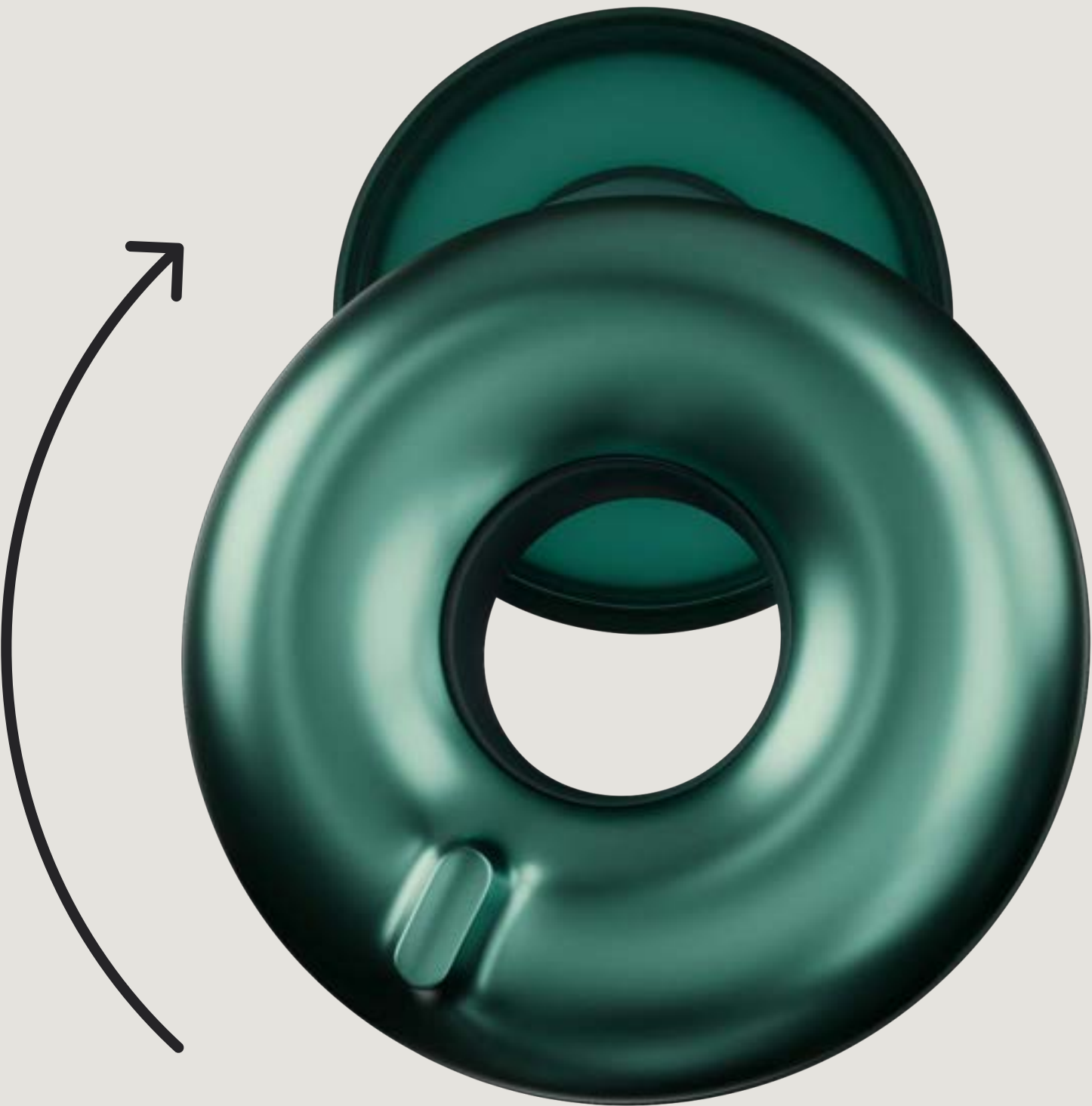

	● Modo Quiet	◐ Modo Experience	○ Modo Engage
NRR	20 dB	17 dB	24 dB
SNR	26 dB	23 dB	20 dB

Todos los tapones

Cómo **GUARDAR LOS TAPONES**

Guarda tus tapones en el Carry Case incluido y colócalos en algún sitio seguro para tenerlos a mano, ya sea en casa o vayas donde vayas.

Para los tapones Loop Dream, simplemente guárdalos en su Carry Case junto a la cama cuando te despiertes.

