


EMS-Fußmassagegerät Benutzerhandbuch

I .LCD-Ladestil

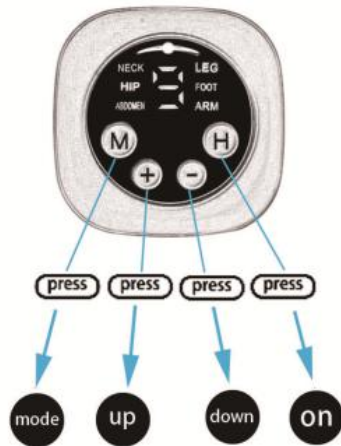

M:drücken: Modus

+:drücke: nach oben

-:niederdrücken

H:drücken: an

1. Taste "H": Drücken Sie die Taste "H", das Gerät wird eingeschaltet; Drücken Sie "M", um den verschiedenen Gerätemodus auszuwählen.
2. Taste "+": Drücken Sie kurz "+", um die Intensität zu erhöhen.
3. Taste "-": Drücken Sie kurz "-", um die Intensität zu verringern.

II .Fernbedienungup



+:drücke: nach oben

-:niederdrücken

M:ein oder Modus

1. Drücken Sie zuerst die Taste "H", um den Hauptcontroller einzuschalten. Drücken Sie dann die Taste "M" der Fernbedienung, um eine Verbindung herzustellen.
2. Drücken Sie kurz die Taste "H", um das Gerät einzuschalten;
3. Langes Drücken der Taste "H" Ausschalten.

III.




1. Nehmen Sie die Fußmatte heraus und installieren Sie dann den Hauptcontroller;



2. Stellen Sie Ihre Füße zuerst auf die Fußmatte, dann drücken Sie "H" oder "ON/INC", um den Controller zu starten;



3. Schalten Sie den Schalter der drahtlosen Fernbedienung ein und verbinden Sie das Fußpolster mit dem Hauptgerät.

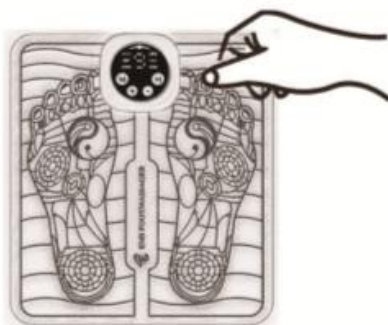

4. Wählen Sie den komfortablen Modus und die Intensitätsstufe;

IV.(Batterie-Stil)



Legen Sie 2 AAA-Batterien richtig ein



Befestigen Sie das Hauptgerät an der Fußmatte



1:Arbeitslicht

EIN/EIN:ON/+: Einschalten oder Intensität erhöhen

PROGRAMM:Modus: Modi anpassen

AUS/DEZ:OFF/-:Schaltet die Intensität aus oder verringert sie

Mode A



Mode B



Mode C



Mode D



Mode E



Mode F

