

Slimpal

Coussin chauffant sans fil

EN
DE
FR
IT
ES



Pals for a Simpler Life

SPC021 Manuel d'utilisation



Attention

Lors de l'utilisation de produits numériques, certaines précautions de sécurité de base doivent être suivies, notamment les suivantes :


1. Si vous êtes enceinte ou si vous portez un stimulateur cardiaque ou un autre appareil interne, vous ne devez pas utiliser ce produit.
2. Les patients atteints de tumeurs ou de cancer dans le corps sont interdits d'utilisation.
3. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes physiquement faibles, lentes à réagir ou mentalement handicapées, à moins qu'il ne soit utilisé en toute sécurité sous la direction ou avec l'aide de la personne responsable de leur sécurité. Il est interdit aux jeunes enfants sans surveillance et aux personnes handicapées d'utiliser cet appareil, et il est interdit aux enfants de jouer avec ce produit.
4. Ce produit a une surface chauffante lors de son utilisation, les personnes sensibles à la chaleur doivent donc faire très attention lors de son utilisation. Il est recommandé de l'utiliser par-dessus les vêtements.
5. Ce produit est destiné aux soins personnels et n'est pas destiné à remplacer les dispositifs de soins médicaux.
6. Il est recommandé de porter et d'utiliser la chaleur la plus élevée pendant 8 minutes maximum. Si vous vous sentez mal à l'aise ou si vous avez des picotements sur la peau, veuillez cesser de l'utiliser à temps. Il n'est pas recommandé d'utiliser des compresses chaudes de haute qualité pendant le sommeil pour éviter les brûlures.
7. NE PAS utiliser d'objets pointus pour rayer ce produit.
8. NE PAS utiliser si la batterie a été immergée dans l'eau.
9. NE PAS démonter, percuter ou presser sa pile au lithium intérieure ni l'exposer au feu.
10. NE PAS utiliser en cas de gonflement important de la batterie.
11. Lors du nettoyage, essuyez avec une serviette humide, non lavable.
12. Utilisez le chargeur (5V 1A ou 5V 2A, non inclus) pour charger l'appareil.

Veuillez nous contacter par e-mail: support@health-vast.com

 [@slimpalglobal](https://www.instagram.com/slimpalglobal)

 [@slimpalglobal](https://www.facebook.com/slimpalglobal)

Structure du produit

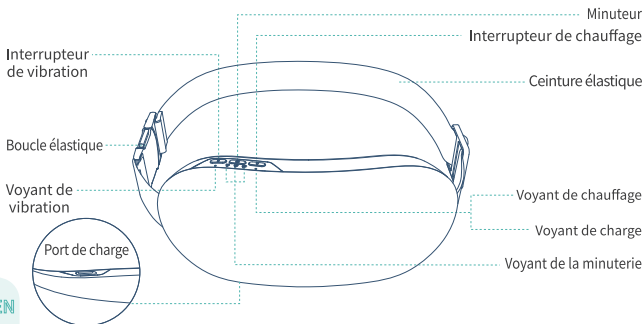

★ Conseil : Appuyez longuement sur le bouton de l'interrupteur de chauffage / interrupteur de vibration pour allumer le coussin chauffant.

Mode d'emploi

1. Avant de l'utiliser, veuillez utiliser le chargeur 5V 1A ou 5V 2A (non inclus) pour la charge, le voyant LED clignote pendant la charge, et reste verte une fois la charge terminée.
2. L'appareil ne fonctionnera pas lorsque la charge est en cours.
3. La durée de la charge sera de 4 heures. Débranchez l'adaptateur d'alimentation une fois la charge terminée.
4. Appuyez longuement sur l'interrupteur de chauffage pour démarrer la fonction de compresse chaude, appuyez brièvement pour changer de niveau de chauffage

Niveau 1 : 104°F/40°C (voyant Vert)

Niveau 3 : 133°F/56°C (Lumière jaune)

Niveau 2 : 122°F/50°C (voyant Bleu)

Niveau 4 : 149°F/65°C (voyant Rouge)


5. Appuyez longuement sur l'interrupteur de vibration pour démarrer la fonction de vibration, appuyez brièvement pour changer de mode de vibration :

- Pas de vibration d'intervalle (voyant Vert)
- Vibration à intervalle court (voyant Bleu)
- Vibration à intervalle long (Lumière jaune)
- Vibration continue (voyant rouge)

6. Lorsque le voyant LED clignote 5 fois, cela signifie que la batterie est déchargée, veuillez la recharger à temps pour éviter d'endommager l'appareil.

7. La minuterie vous permet de définir des temps d'utilisation de 1/2/3 heures.

Comment le porter

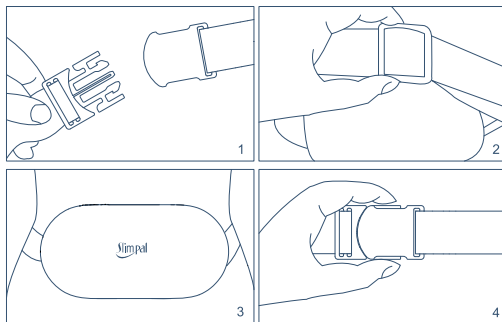

1. Portez-la sur le lieu d'utilisation et insérez la boucle élastique dans la baïonnette;
2. Réglez la longueur de la ceinture élastique et commencez à l'utiliser après avoir ajusté la position ;
3. Pour retirer l'élastique, appuyez sur le bouton d'insertion tout en tirant sur la boucle élastique.

Ce qui est inclus

- 1* Coussin chauffant sans fil
- 1* Câble de charge
- 1* Manuel d'utilisation

Spécification

EN
DE
FR
IT
ES

Modèle	SPC021
Alimentation électrique	4000mAh Batterie au lithium
Tension nominale	3V-4,2V
Puissance nominale	10W
Courant nominal	5V=2A
Température de chauffage	104°F/ 122°F/ 133°F/149°F (40°C/50°C/56°C/65°C)
Durée de la charge	Environ 4 heures
Temps d'utilisation	104°F- environ 8 heures / 122°F- environ 6 heures / 133°F- environ 5 heures / 149°F- environ 4 heures /
Ceinture élastique	Convient pour un tour de taille de 61~160cm

Garantie (Periode de 1 ans)

La garantie du fabricant est nulle dans les circonstances suivantes, mais pas seulement:

Entretien ou modification incorrects ou inadéquats.

Accident, mauvaise utilisation, abus, contamination ou autres causes externes.

L'utilisation d'un adaptateur et d'accessoires non spécifiés.

Perte ou dommage pendant le transport.

Dommages résultant du non-respect des instructions.

Cette garantie ne s'applique pas aux pièces consommables.

Service Clients:

Nous disposons de service clientèle qui garantit des solutions sans tracas à tout problème que vous pourriez rencontrer dans les 24 heures ouvrables.



support@health-vast.com



www.health-vast.com



@slimpalglobal



@slimpalglobal



@slimpalglobal

EN

DE

FR

IT

ES