


Multi
SAÚDE



Compact Gun

Massageador Muscular - HC266

Manual de Instruções

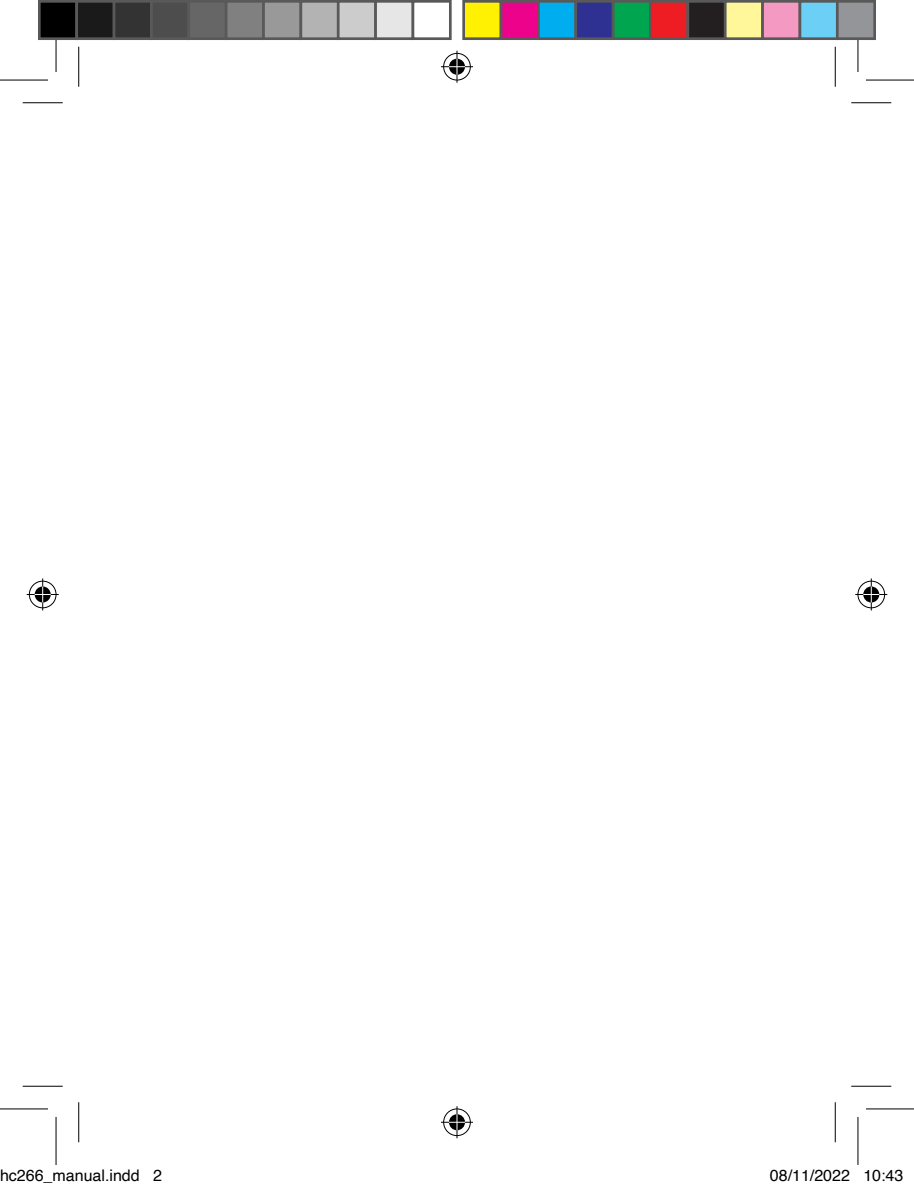



Manual de Instruções

Compact Gun Massageador Muscular - HC266

Obrigada por adquirir nosso massageador muscular. Antes de utilizar, leia este manual com atenção para garantir a operação correta. Guarde este manual em um lugar seguro para referência futura.

Uso principal

Alivia dores musculares, promove a circulação sanguínea e promove a recuperação muscular.

Informações importantes

Para reduzir o risco de mau funcionamento, choque elétrico, ferimentos, incêndio, morte e danos ao equipamento. Antes de usar este produto, leia atentamente todas as instruções e avisos deste manual.

Proibições

1. É proibido o uso de crianças. Este produto não é um brinquedo.
2. É proibido imergir o produto na água. Se o produto cair acidentalmente na água, envie-o a tempo para inspeção.
3. É proibido colocar o produto próximo ao foco de incêndio

ou jogá-lo no fogo.

4. É proibido usá-lo na cabeça, pescoço, coração e regiões genitais.

5. É proibido o uso nos ossos, e somente nos tecidos moles do corpo sem causar dores ou desconforto.

6. É proibido usar carregadores não originais para carregar o produto, caso contrário, pode causar um incêndio.

7. É proibido retirar parafusos ou tentar desmontar o produto.

8. Se você sentir dores, ou estiver sob tratamento médico ou estiver utilizando outros dispositivos médicos, consulte seu médico antes de usar este dispositivo.

9. É proibido colocar os dedos, cabelo ou outras partes do corpo perto do eixo e da parte de trás da cabeça de massagem, evitando lesões.



Não toque nesta parte ao iniciar a máquina sem a cabeça de massagem instalada.



Não toque nesta parte ao iniciar a máquina para instalar a cabeça de massagem.



Aviso Legal

Se você apresentar qualquer uma das seguintes condições ou problemas de saúde, consulte seu médico antes de usar este dispositivo:

1. Gravidez, diabetes e complicações como neuropatia e danos à retina.
2. Uso de marca-passo, cirurgia recente, epilepsia ou enxaqueca, hérnia de disco lombar, espondilolistese.
3. Cirurgia recente de substituição da articulação ou instalação de dispositivo anticoncepcional intrauterino, implantes de metal ou outros problemas relacionadas ao próprio corpo.

A pesquisa em andamento é sobre o impacto do treinamento de vibração em certas doenças médicas. É provável que isso reduza as categorias de contra-indicações mencionadas acima. A experiência prática mostra que, em muitos casos, combinar o treinamento de vibração no plano de tratamento também é uma recomendação de tratamento. Deve ser feito com o aconselhamento ou a companhia de um médico, especialista ou fisioterapeuta.


Local de Instalação da
Cabeça de Massagem de
Remoção Rápida



1. Descrição do Produto

- 1 - Cabeça redonda: Para massagem e relaxamento muscular do corpo inteiro
- 2 - Acessório em U: Para massagem da coluna. Com estímulo mais intenso.
- 3 - Cabeça achatada: Usado para relaxar grandes grupos musculares. Com estímulo mais intenso.

4 - Ponta redonda: Usado para relaxar pontos de dor e pontos de gatilho.

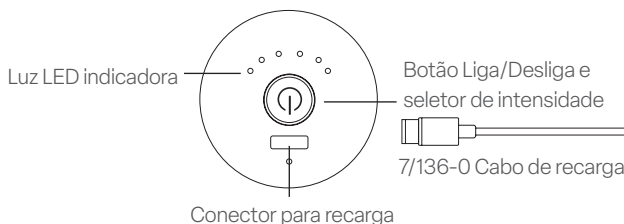

2. Instruções de Uso

Operação de uso

1. Mantenha pressionado o botão por 3 segundos para ligar a máquina.
2. O indicador LED mostra a intensidade selecionada. Ao ligar, o aparelho inicia sua operação no nível 1, e cada vez que você pressiona, a intensidade de vibração aumentará.
3. Mantenha pressionado o botão por 3 segundos para desligar.

Sobre o carregamento

O conector para recarga está localizado no painel de controle.

1. Para o primeiro uso, carregue completamente a máquina.
2. Desligue a máquina e conecte o cabo de carregamento.


O indicador LED ficará vermelho, indicando que está carregando.

3. Quando as luzes ficarem Azul, significa que a bateria está totalmente carregada.

4. Não ligue a máquina durante o carregamento.

Troca de cabeça da massageadora

Quando a máquina estiver desligada, insira lentamente a cabeça de massagem no buraco de encaixe. Conforme

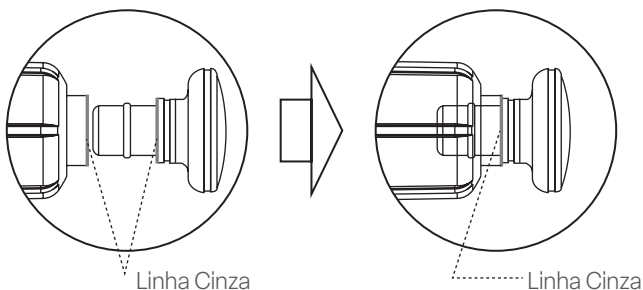



mostrado na figura, apenas alinhe a linha cinza da cabeça de massagem com a linha cinza da máquina.

3. Especificações do produto

Nome do produto: Compact Gun - Massageador Muscular
Modelo do produto: HC266
Tipo do conector: Type-C, 5V 2A
Tensão nominal: 5V
Capacidade de carga: 1800mAh
Velocidade nominal : 900-3200rpm
Tempo de recarga: em torno de 8 horas
Curso físico: 6mm
Potência nominal: 10W
Peso do produto: 380g
Tamanho do produto: 140 X 110 X 45 MM
Ambiente de uso: 0-40°C

4. Problemas Frequentes

Não é possível iniciar a máquina ou a máquina inicia mas não opera

1. Temperatura muito baixa:

Se a pistola massageadora para alívio muscular for



colocada em um ambiente abaixo de 0oC por longo tempo, a atividade da bateria da pistola massageadora será reduzida, não conseguindo iniciar normalmente. A máquina pode também iniciar normalmente, mas não conseguir operar normalmente.

Solução: Deixe a máquina em um ambiente acima de 0oC por 2 horas, ou use um secador de cabelo para aumentar rapidamente a temperatura da máquina.

1 Bateria fraca:

Quando a bateria está fraca, se o cliente deixar de carregar por um longo período, a bateria entrará no estado de proteção por baixa energia. Se nesse momento iniciar a máquina e começar a operação novamente, a pistola massageadora não poderá funcionar normalmente.

Solução: mantenha a máquina desligada e conecte o carregador. Certifique-se de que a bateria esteja totalmente carregada, e a máquina poderá operar normalmente.

Resolução de problemas de operação

O produto não funciona	Verifique se a energia da bateria é suficiente. Se o produto não for usado por um longo período de tempo, ela precisa ser totalmente carregada por 8 horas.
As luzes do painel não acendem	Verifique se a energia da bateria é suficiente.
Há um leve ruído anormal durante o uso	O fenômeno é normal no período de rodagem da máquina nova. Se o som ficar mais alto após um período de uso, envie-o para inspeção.
A bateria não pode ser carregada	Substitua a bateria. A bateria está envelhecendo ou com mau contato.

5. Manutenção

1. Quando o produto estiver fora do uso por um curto período de tempo, mantenha 1-2 barras de bateria, desligue e mantenha-o em um local seguro. Ele pode ser colocado de volta na caixa original e colocado em um local

seguro, seco, ventilado e de baixa temperatura.

2. Quando o produto estiver fora do uso por um longo período de tempo, é recomendado carregar o produto a cada 3 meses para evitar que a bateria seja danificada devido à perda de energia.
3. Para a manutenção diária, use um detergente neutro e um pano macio para limpar. Não limpe com óleo de motor, solventes orgânicos ou outros agentes químicos, muito menos enxágue com água.
4. Desligue o produto antes de usar ou limpá-lo.
5. O produto deve ser bem fixado durante o transporte para evitar vibração severa, colisão, rolamento e queda.

6. Proteção ambiental

Não descarte este produto junto com o lixo doméstico geral no final de sua vida útil. Coloque este produto em uma estação de reciclagem designada pelo governo. Você também pode enviar este produto de volta para o centro de serviço pós-venda do fabricante. Os funcionários do centro de serviços realizarão o descarte de maneira ambientalmente correta.



Manual em outros idiomas

Para acessar a versão deste manual em Espanhol e Inglês, basta apontar a tela do seu smartphone para o QR Code abaixo:

Para acceder a la versión en español e inglés de este manual, simplemente apunte la pantalla de su teléfono inteligente al código QR a continuación:

To access the Spanish and English version of this manual, simply point your smartphone screen at the QR Code below:



TERMOS DE GARANTIA

Esta garantia não cobre qualquer defeito do produto decorrente do uso e do desgaste natural ou decorrente da utilização inadequada, incluindo, sem limitações, o uso normal e habitual, de acordo com as instruções da Multi para o uso e a manutenção do produto. Esta garantia não cobre defeitos do produto decorrente de instalações, modificações, reparos ou quando o produto for aberto por um profissional não autorizado pela Multi. Esta garantia também não cobre defeitos no produto decorrentes do uso de acessórios ou outros dispositivos periféricos que não sejam originais da Multi projetados para o uso com o produto. Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovado, a Multi limita-se a consertar ou substituir o produto defeituoso. Este produto está garantido pela Multi pelo período de 1 ano. O certificado somente terá validade com a apresentação da NF de compra. Leia com atenção os termos de garantia acima.

NF/Nº _____


Data da Compra ____/____/____

Queremos muito ouvir você!

CRM – Central de Relacionamento Multi Saúde

11 3198 - 5882 | Cobertura para todo Brasil

Fale conosco via WhatsApp!

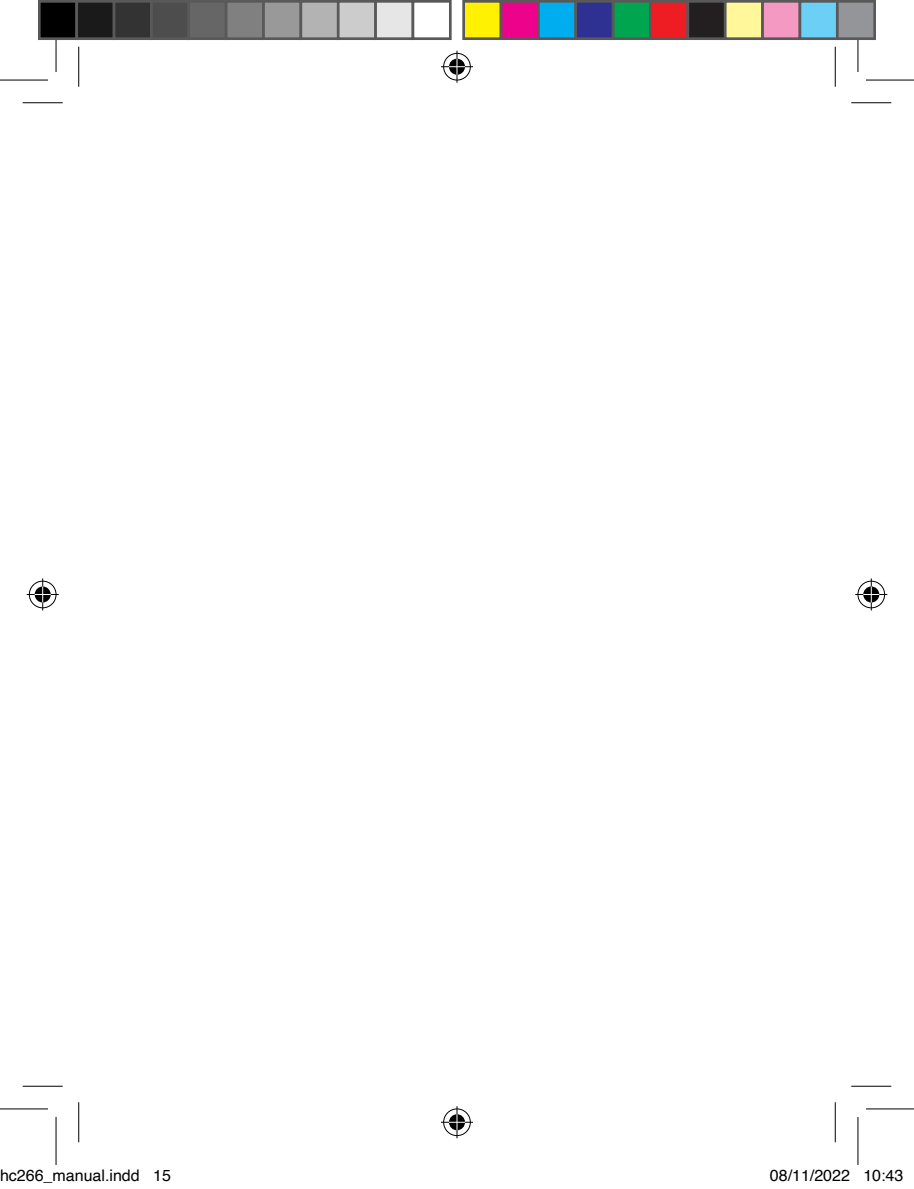



Multi

SAÚDE

Acompanhe a gente!

multi.com.br

Instagram e Facebook: @multisaude_br

Youtube: Multi Brasil