



3STEPで簡単設定 スタートアップガイド

STEP
1

スマートフォンをWi-Fiにつなぐ

スマートフォンをWi-Fi環境に接続します。

本製品は2.4GHz帯のWi-Fi(IEEE802.11 b/g/n)でご利用ください。※5GHz帯のWi-Fiには対応しておりません。すでに5GHz帯のWi-Fiに接続されている場合は一度アプリを終了し、2.4GHz帯のWi-Fiにつなぎ直してからアプリを起動し直してください。

STEP
2

体組成計をWi-Fiにつなぐ

1. 「ECLEAR APP」をインストールし、機器設定からHCS-WFSシリーズを選択してください。




iOS 版アプリ推奨環境について
対象 OS : iOS 10.0 以降



Android 版アプリ推奨環境について
対象 OS : Android ver 5.0 以降




2. アプリ画面に従って、アカウント登録を行い、体組成計本体の裏面にあるQRコードを読み取ってください。

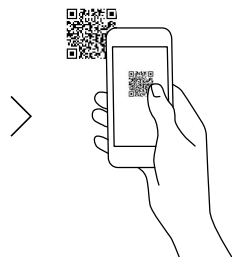

3. 無線LANのパスワード(暗号化キー)を入力してください。



4. 体組成計の電源を入れてください。ユーザー選択画面で体組成計の通信ボタンを、表示パネルに🔊が点滅するまで長押しし、アプリの次へをタップしてください。

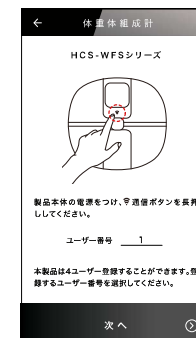

5. 接続が完了すると、体組成計から「ピッ」という音が鳴り、画面に「yes」が表示されます。アプリ画面にも完了した旨のお知らせが表示されます。




ネットワーク接続に失敗する場合以下の理由が考えられるのでご確認ください。
○5GHzのWi-Fiに接続しようとしている。
○電子レンジなどの電波を発する機器を使用している。
○ルーターとの距離が遠い、電波を遮る障害物がある。

STEP
3

スマートフォンに ユーザー情報を登録する

ユーザー情報を入力してください。

- ・性別
- ・身長
- ・体重
- ・目標体重
- ・生年月日
- ・あなたのお腹のカタチ

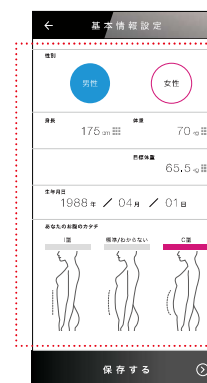

以上で初期設定が完了です!