


## Pulitore intelligente per denti Manuale del prodotto

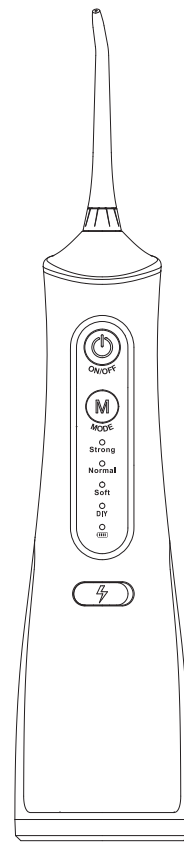

Prima di usare il prodotto, leggere questo prodotto manuale attentamente e conservarlo per riferimento futuro.

17

### Istruzioni di sicurezza

#### pericolo

- Se non capisci le procedure operative e le istruzioni di sicurezza, non utilizzare questo prodotto per evitare il pregiudizio causato da operazioni improprie.
- Si prega di non utilizzare questo prodotto in alcun modo diverso da questo manuale.
- Non smontare il prodotto o cambiare le parti del prodotto per evitare danni al prodotto o scosse elettriche ad alta tensione, e la garanzia non è valida.
- Non utilizzare acqua con temperatura superiore a 40 °C per riempire il serbatoio dell'acqua e pulire la bocca per evitare scottature.
- Se si cade in acqua durante la ricarica, scollegare l'alimentazione prima di estrarre il prodotto.
- Se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, sostituirlo prima dell'uso.
- Non mettere il prodotto nel fuoco o riscaldarlo, e non caricarlo, usarlo o metterlo in un luogo ad alta temperatura.

#### Avviso


- Non utilizzare questo prodotto per scopi diversi dalla pulizia orale.
- Non premere con forza l'ugello sulle gengive o sui denti per evitare di danneggiare le gengive.
- Si prega di posizionare questo prodotto in un luogo sicuro per evitare danni o cadute in acqua.
- Non immergere questo prodotto in acqua per evitare guasti o causare incendi, scosse elettriche, esplosioni e altri pericoli.
- Non collegare e scollegare la spina di alimentazione e la spina di ricarica con le mani bagnate.
- Prima di collegare la spina di alimentazione, verificare se la tensione indicata sull'adattatore di alimentazione è conforme alla tensione utilizzata localmente.
- Non danneggiare, danneggiare o modificare il cavo di alimentazione, non allungare, piegare o ruotare il cavo di alimentazione, né premere oggetti pesanti sul cavo di alimentazione o agganciare il cavo di alimentazione tra oggetti.
- Non lasciare che il prodotto si avvicini a oggetti caldi, in particolare al cavo di alimentazione.
- Prima della manutenzione, scollegare la spina di alimentazione e la spina di ricarica.
- Non metterlo in un luogo caldo o umido ed evitare la luce solare diretta.
- Non caricare questo prodotto in luoghi caldi o umidi, come bagni e bagni.
- Se non viene utilizzato per molto tempo, scollegare la spina di alimentazione e la spina di ricarica per evitare incendi o altri pericoli.

#### State attenti

- Questo prodotto non ha parti sostituibili o riparabili. Se deve essere riparato, restituirlo al produttore.
- Se non c'è ugello a spruzzo, non usarlo.
- Alcuni colluttori possono corrodere questo prodotto. Si prega di non inserire colluttori in questo prodotto.
- Questo prodotto non è adatto a bambini, neonati e coloro che non hanno imparato a operare, a meno che non siano supervisionati o istruiti dalla persona responsabile. Si prega di tenerlo fuori dalla portata di bambini e neonati e non usarlo come giocattolo.
- Per i pazienti con malattia parodontale o quelli che hanno subito un intervento chirurgico orale negli ultimi 2 mesi, consultare un medico prima dell'uso.
- Quando si collega o si scollega l'alimentatore, assicurarsi di tenere premuto la spina al posto del cavo di alimentazione.

18

### Descrizione della struttura

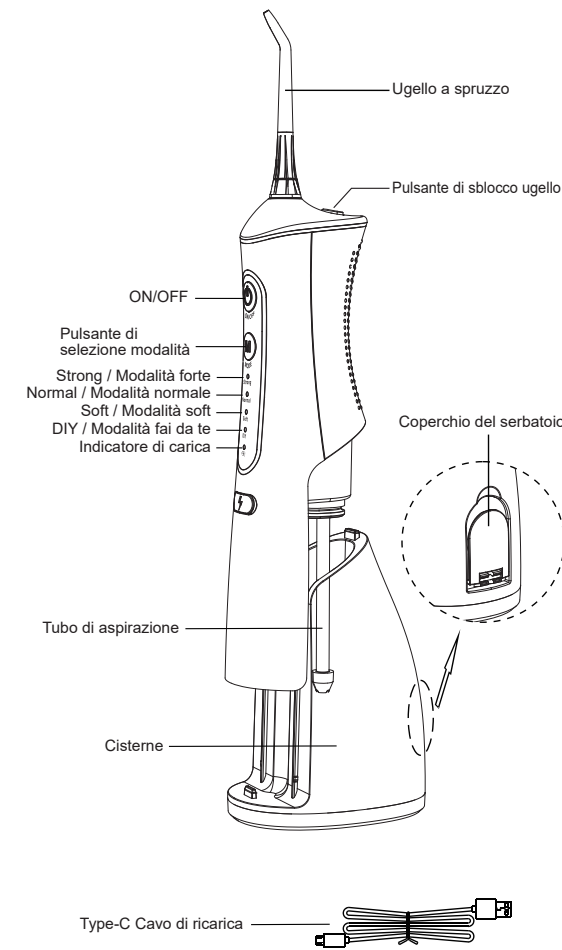

19

### Istruzioni per l'uso

#### Prima dell'uso, addebitare il prodotto come segue:

1. Verificare e assicurarsi che il prodotto e le mani siano asciutte, quindi collegare la spina ad un'estremità del cavo USB all'adattatore 5V (fornito dall'utente) e collegarla alla presa. (Figura 1)
2. Aprire il coperchio dell'interfaccia di ricarica e collegare l'altra estremità alla presa di ricarica di questo prodotto. Assicurarsi che sia inserita in posizione. (Figura 2)

#### Promemoria:

Se la spia lampeggia durante o dopo l'uso, la batteria è scarica e deve essere ricaricata. Sono necessarie 3-4 ore per una ricarica completa. Durante la carica, la spia lampeggia per indicare che la batteria è in carica. La spia smette di lampeggiare per indicare che la batteria è completamente carica.

#### Quando si utilizza, si prega di seguire i fasi seguenti:

1. Tenere premuto il pulsante di sblocco per inserire facilmente l'ugello nel foro, facendo attenzione a inserirlo in posizione (Figura 3-1). Al momento della sostituzione, tenere nuovamente premuto il pulsante per estrarre facilmente l'ugello (Figura 3-2).
2. Riempire il serbatoio con acqua. Esistono due metodi per l'acqua di riempimento, come segue:
  - a. Aprire il coperchio del serbatoio, riempire il serbatoio con acqua dall'ingresso dell'acqua e chiudere il coperchio del serbatoio. (Figura 4)
  - b. Tirare verso il basso il serbatoio dell'acqua per iniettarla e spingerlo verso l'alto per installarlo (Figura 5).

#### Promemoria:

Il serbatoio deve essere spinto in posizione senza lasciare spazi vuoti per evitare perdite.

20

3. Selezionare la modalità desiderata premendo il pulsante di modalità. È possibile passare alla modalità desiderata anche premendo il pulsante della modalità durante l'uso. Questo prodotto dispone di 4 modalità:

**Strong / Modalità forte:** Risciacquo potente per una pulizia rapida.

**Normal / Modalità normale:** Pressione dell'acqua standard per la pulizia quotidiana;

**Soft / Modalità soft:** Pulizia delicata, adatta a persone con denti sensibili;

**DIY / Modalità fai da te:** Modalità di impostazione personalizzata, che consente di regolare liberamente la pressione di lavaggio.

#### Linee guida per la modalità DIY:


- (1) Passare alla modalità DIY, tenere premuto il pulsante ON/OFF, la pressione dell'acqua passerà da forte a debole.
- (2) Durante il processo di ciclaggio, prestare attenzione alla variazione della pressione dell'acqua: quando si ritiene che la pressione dell'acqua raggiunga un'intensità di pulizia confortevole o adatta alle proprie esigenze, rilasciare il pulsante di commutazione.
- (3) A questo punto è stata impostata la pressione dell'acqua per la modalità DIY e si può iniziare a risciacquare.

**Il prodotto è dotato di una funzione di memoria che ricorda la pressione dell'acqua DIY impostata per l'uso successivo.**

#### Promemoria:

I professionisti del settore dentale consigliano di utilizzare per la prima volta la modalità soft per 1 settimana, per poi utilizzare le altre modalità dopo l'adattamento.

4. Prima dell'uso, è necessario tenere questo prodotto, estendere l'ugello nella bocca, allineare i denti o le gengive e aprire leggermente la bocca in modo che l'acqua possa fuoriuscire senza problemi (Figura 6-1 e 2)

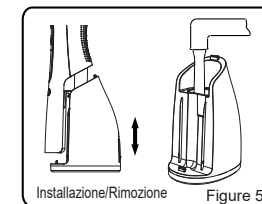

Installazione/Rimozione Figure 5

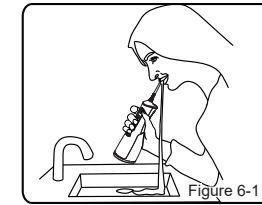


Figure 6-1

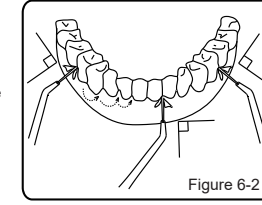


Figure 6-2

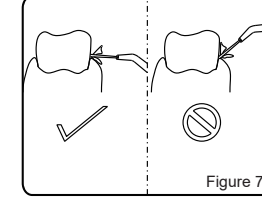


Figure 7

- a. La direzione del flusso d'acqua è perpendicolare ai denti o alle gengive.
- b. Camminare lentamente lungo i denti e pulire i denti in ordine.
- c. L'ugello è allineato con la linea gengivale e perpendicolare alle gengive.

#### Promemoria:

Non spruzzare acqua direttamente lungo la tasca periodontale.

Dopo aver usato, premere il pulsante per spegnere. Questo prodotto ha una funzione temporizzata di due minuti. Chiuderà automaticamente dopo due minuti. Se hai bisogno di continuare ad usarlo, premi il pulsante di commutazione.

#### Dopo l'utilizzo, seguire i passaggi seguenti:

1. Aprire il coperchio del serbatoio dell'acqua e versare l'acqua rimanente (Figura 8); oppure premere il pulsante ON/OFF per scaricare automaticamente l'acqua.
2. Asciugare l'irrigatore orale con un panno (Figura 10).

#### Promemoria:

Al fine di evitare la diffusione di batteri, assicurarsi che non vi sia acqua residua all'interno del prodotto. Se si prevede di non utilizzarlo per un lungo periodo, si prega di pulire il prodotto e conservarlo dopo l'asciugatura.

### Manutenzione ordinaria

Si prega di utilizzare acqua pulita o detergente neutro per pulire il prodotto, non usare detersivo corrosivo o abrasivo, perché questi danneggiano il prodotto. Non farlo lavare con acqua calda sopra 50 °C.

#### Pulizia del corpo principale:

- Si prega di pulire il corpo principale con un panno asciutto o un panno bagnato.
- Non lavare il corpo principale in acqua.

22

#### Pulizia del serbatoio dell'acqua:

- È possibile pulirlo con un panno asciutto o un panno umido, oppure rimuovere il serbatoio dell'acqua e risciacquare con acqua pulita.
- Se si prevede di non utilizzarlo per lungo tempo, pulire l'acqua all'interno.

#### Pulizia dell'ugello:

- Puoi pulirlo con un panno asciutto o un panno bagnato, oppure toglierlo, sciacquare con acqua pulita e asciugarlo con un panno.
- Non piegare, tirare o torcere il tubo dell'acqua dell'ugello.
- Gli esperti dentali raccomandano che l'ugello venga sostituito ogni 6 mesi.

### Risoluzione dei problemi

Problemi	Possibili cause	Soluzione
Smetti di lavorare	Appena acquistato o non addebitato per molto tempo A batteria bassa	Si prega di caricare per più di 3 ore.
Bassa pressione dell'acqua o senza spruzzo d'acqua durante l'uso	L'ugello è bloccato	Pulire o sostituire l'ugello
	La bocca di aspirazione è bloccata	Pulire l'ingresso di aspirazione
Dopo la ricarica, può essere utilizzato solo per un breve periodo	È stato posizionato per un periodo di tempo.	Estrarre l'ugello e lavare il foro dell'ugello sulla macchina principale. Dopo che il serbatoio dell'acqua è pieno d'acqua, tenere il prodotto orizzontalmente e accenderlo
	La batteria è alla fine della sua durata.	Si prega di contattare il rivenditore
L'indicatore di ricarica non si accende durante la ricarica	Tempo di ricarica insufficiente	Si prega di caricare per più di 3 ore prima di usarlo.
	Il connettore di alimentazione non è collegato correttamente.	Si prega di collegare correttamente l'alimentatore
L'indicatore di ricarica non si accende durante la ricarica	Il circuito di ricarica del prodotto è difettoso	Si prega di contattare il rivenditore

### Trattamento dei rifiuti

Questo prodotto utilizza batterie ricaricabili. Al termine della vita di prodotto, prima di scartare il prodotto, assicurarsi di rimuovere la batteria e riciclarla o smaltirla in conformità alle norme locali di gestione dei rifiuti. In caso di dubbio, si prega di consultare il vostro dipartimento locale di gestione dei rifiuti.

### Garanzia del prodotto

Grazie per aver scelto i prodotti per l'igiene orale. La garanzia gratuita per i prodotti durante il periodo di garanzia sarà attuata dalla data di acquisto. Il contenuto della garanzia durante il periodo di garanzia è il seguente:

1. Entro un anno dalla data di acquisto, riceverai un servizio di garanzia gratuito se il personale della stazione di manutenzione autorizzato conferma che il prodotto è danneggiato a causa di processi di fabbricazione o componenti.
2. Il servizio di garanzia gratuita non include parti vulnerabili (come ugelli, ecc.).
3. Si prega di notare le seguenti condizioni, anche durante il periodo di garanzia, non è possibile ottenere il servizio di garanzia gratuito:
  - 3.1 Nel caso in cui il presente certificato di garanzia e di acquisto non possa essere presentato;
  - 3.2 Danni causati dal mancato utilizzo, mantenere e mantenere in conformità con i requisiti delle specifiche del prodotto;
  - 3.3 Guasto causato dallo smontaggio e dalla riparazione senza ispezione da parte del personale autorizzato della stazione di manutenzione;
  - 3.4 In caso di modifica non autorizzata del contenuto della garanzia e del certificato di acquisto;
  - 3.5 Altri danni causati da forza maggiore (come disastri naturali, tensione anormale, ecc.);
  - 3.6 L'invecchiamento e l'usura del prodotto causati dall'uso normale non influiscono sul normale utilizzo del prodotto;
  - 3.7 Guasto dovuto a uso non domestico (ad esempio industriale, commerciale).

Nome del prodotto		Pulitore intelligente per denti	
Modello del prodotto		L8	
Informazioni sul cliente (Da compilare da parte del cliente)	Nome:		
	Indirizzo:		
Data di acquisto			
		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Certificato di qualità</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">                     Ispezione di qualità qualificata                 </div> </div>	

24