

TOLOCO[®]

MANUEL D'UTILISATION

Modèle : EM26

VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS AVANT DE LES UTILISER
ET LES CONSERVER POUR CONSULTATION FUTURE

TABLE DES MATIÈRES

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	02 – 03
CARACTÉRISTIQUES	04
SPÉCIFICATION DE PRODUIT	05
SCHÉMA ET FONCTIONS DU PRODUIT	06
TÊTES DE MASSAGE	07
CHARGEMENT	08
MODE D'EMPLOI	09
NETTOYAGE ET ENTRETIEN	10
QUESTION ET RÉPONSE	11
GARANTIE	12

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessure, veuillez suivre attentivement ces instructions lorsque vous utilisez ce produit :

- o Réservé aux adultes.
- o Utiliser uniquement sur une surface sèche et propre du corps ou des vêtements en appuyant légèrement et en se déplaçant sur le corps pendant environ 60 secondes par région.
- o Utilisez le pistolet de massage uniquement sur les tissus mous du corps, au besoin, sans causer de douleur ou d'inconfort.
- o Ne pas utiliser sur la tête ou sur une partie dure ou osseuse du corps.
- o Utilisez uniquement la pièce jointe qui offre le meilleur effet désiré.
- o Des contusions peuvent se produire, peu importe le réglage de contrôle ou la pression appliquée, dans les zones traitées fréquemment et s'arrêtent immédiatement au premier signe de douleur ou d'inconfort.
- o Garder les doigts et les cheveux ou toute autre partie du corps loin de la tige et de l'arrière de l'appliqueur, au cas où un pincement pourrait se produire.
- o Ne pas placer d'objets dans les orifices d'aération du pistolet de massage.
- o Ne pas immerger dans l'eau ou laisser l'eau pénétrer dans les orifices de ventilation du pistolet de massage.
- o Ne pas laisser tomber l'appareil ou l'utiliser à mauvais escient.
- o N'utilisez pas votre propre chargeur. Recharger uniquement avec l'adaptateur de pistolet de massage 24 VCC fourni.
- o Examinez attentivement le niveau de l'appareil et de la batterie avant chaque utilisation.
- o Ne pas trafiquer ni modifier le pistolet de massage de quelque façon que ce soit.
- o Ne laissez jamais le pistolet de massage fonctionner ou se charger sans surveillance.

**VEUILLEZ NE PAS UTILISER LE PISTOLET DE MASSAGE
OU TOUT APPAREIL À VIBRATION SANS AVOIR D'ABORD
OBTENU L'APPROBATION DE VOTRE MÉDECIN SI L'UN
DES ÉLÉMENTS SUIVANTS S'APPLIQUE :**

Diabète de grossesse avec complications telles que neuropathie ou lésions rétiniennes, port de stimulateurs cardiaques, chirurgie récente, épilepsie ou migraines, hernie de disques, spondylolisthésis, spondylolyse ou spondylose, remplacements d'articulations ou DIU récents, broches ou plaques métalliques ou toute préoccupation au sujet de votre santé physique.

Les personnes fragiles et les enfants doivent être accompagnés d'un adulte lorsqu'ils utilisent un appareil à vibration. Ces contre-indications ne signifient pas que vous ne pouvez pas utiliser un appareil de vibration ou d'exercice, mais nous vous conseillons de consulter d'abord un médecin.

Des recherches sont en cours sur les effets de l'exercice des vibrations pour des troubles médicaux particuliers. Cela entraînera probablement le raccourcissement de la liste des contre-indications, comme il est indiqué ci-dessus.

L'expérience pratique a démontré que l'intégration de l'exercice de vibration dans un plan de traitement est consultative dans un certain nombre de cas. Cela doit se faire sur les conseils d'un médecin spécialiste ou d'un physiothérapeute et en accompagnement d'un médecin spécialiste ou d'un physiothérapeute.

NOTE : Vous devez comprendre que la participation à un exercice ou à une thérapie peut entraîner des blessures physiques.

Tout programme d'exercice, y compris celui-ci, peut entraîner des blessures.

Consultez un professionnel de la santé avant de commencer ce programme ou tout programme d'exercice ou de thérapie.

CARACTÉRISTIQUES

Soulagez la douleur et la raideur musculaires grâce au pistolet de massage TOLOCO. Idéal pour soulager les douleurs aux épaules, au cou, à la taille et au dos, ce masseur est votre réponse pour les muscles apaisants et détendus. Il comprend 15 têtes de massage différentes pour une expérience de massage confortable. Le pistolet de massage musculaire est compact, portable et ultra-silencieux; choisissez parmi 20 vitesses de massage qui vous permettent d'obtenir la bonne pression pour revivre votre douleur et améliorer la force musculaire, la flexibilité et la coordination.

Le battement rythmique de la tête contre les muscles aide l'athlète à se remettre plus rapidement d'un entraînement de tension et facilite la tâche de ceux qui ont besoin de soulager le stress, l'anxiété, la douleur, la douleur ou la tension musculaire.

Le pistolet de massage aide à :

- o Améliore les ecchymoses, les entorses, les foulures et les douleurs musculaires
- o Augmente la circulation et le débit lymphatique
- o Soulage les spasmes musculaires et la raideur
- o Réduit l'accumulation d'acide lactique dans les muscles
- o Active le système nerveux et les muscles
- o Fatigue musculaire, douleur, oppression et nœuds
- o Accroît la mobilité des articulations
- o Relaxation et épaissement du tissu conjonctif et du fascia



SPÉCIFICATION DE PRODUIT

Modèle	EM26
Puissance	20W
Amplitude	0,47 po (12 mm)
Attachement	15 têtes de fixation
Capacité de la batterie	2500 mA h
Bruit de travail	40-50 dB
Niveau réglable	niveau 20
Durée de charge	Environ 4 heures
Vitesse de rotation maximale	3200rpm
Poids	2,1 lb
Tension de charge	100V-240V
Temps de travail	6 heures d'utilisation
Courant d'entrée	1A
CC	24 V
Watt-heure	54 W/h

Contenu du colis :

1 pistolet de massage TOLOCO 15 x têtes de massage 1 adaptateur d'alimentation
1 x manuel d'utilisation 1 x étui portatif

SCHÉMA ET FONCTIONS DU PRODUIT

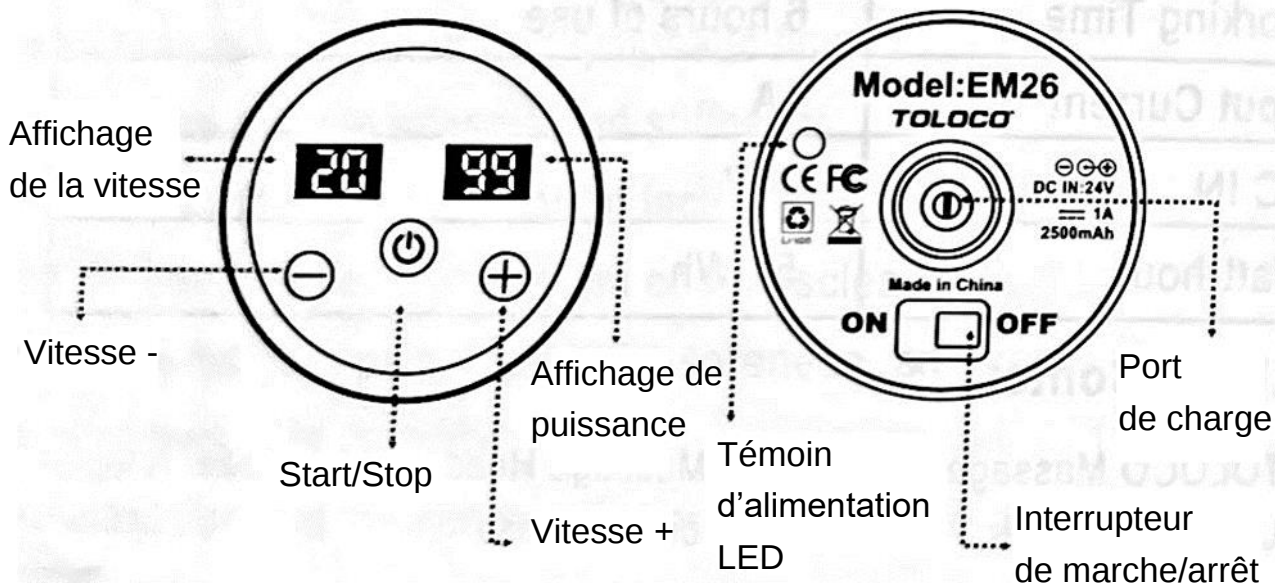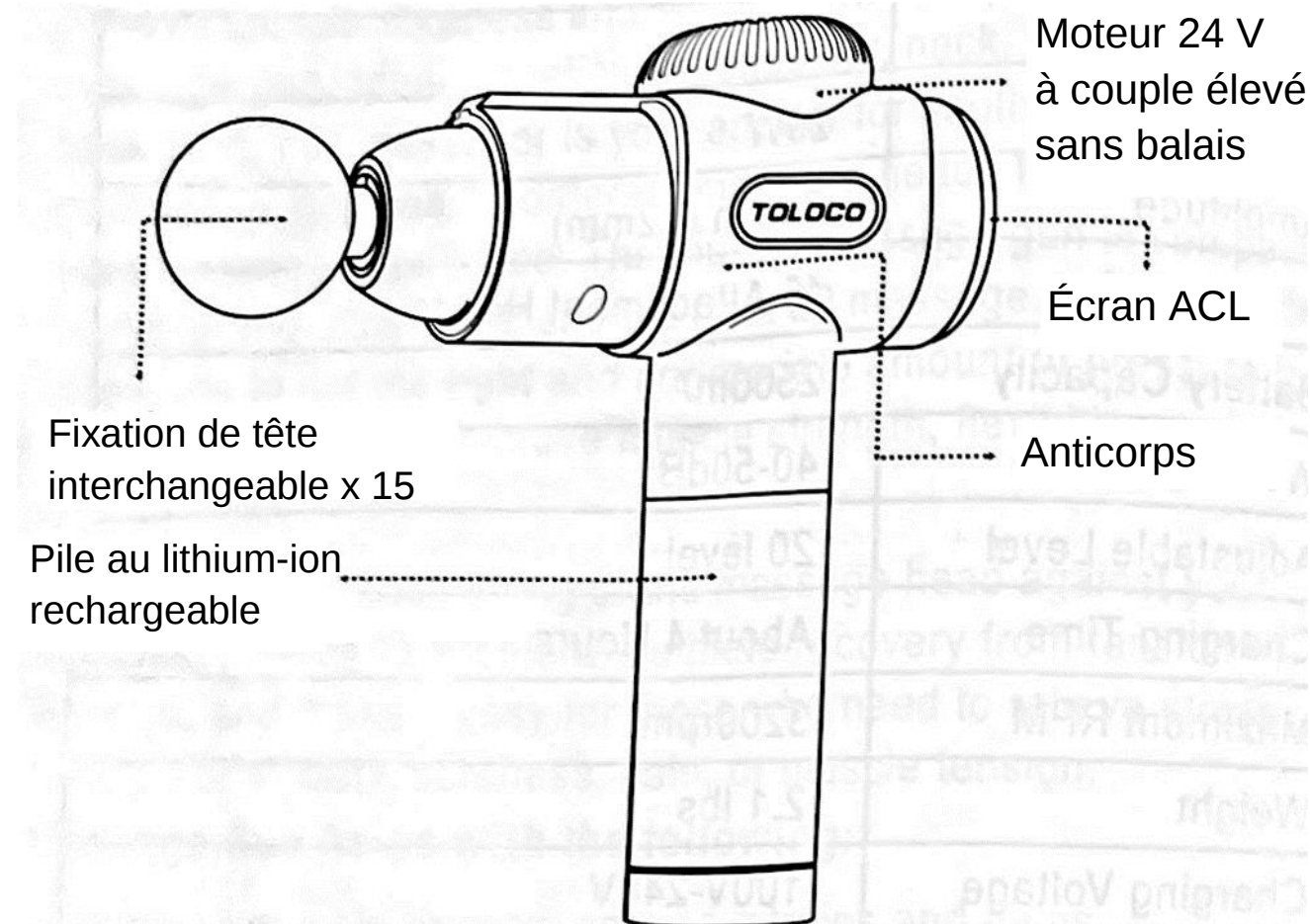


TÊTES DE MASSAGE



Tête ronde

Convient aux cuisses, aux mollets, au dos

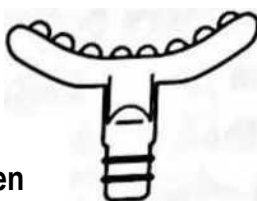

Tête en forme d'Y

Convient aux muscles des bras et des jambes



Tête de cale

Convient aux muscles plus gros autour des jambes, de la poitrine et du dos



Tête fourche

Convient au cou, à la colonne vertébrale et au tendon de l'Achille



Tête convexe

Convient aux quads, glutéaux



Tête de flèche

Convient au massage des articulations, des plantes et des pieds




Tête plate

Convient à toutes les parties du corps



Tête du pouce

Convient à la paume et au pied

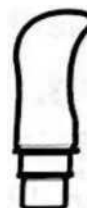

Tête du coude

Convient au massage de la paume et des semelles



Tête balle

Convient aux points de douleur locaux



Tête bombée

Convient aux muscles abdominaux



Griffes

Convient aux petits muscles de l'épaule




Tête de pelle

Convient aux muscles abdominaux et au bas du dos



Tête de coupe

Convient aux muscles autour des aisselles

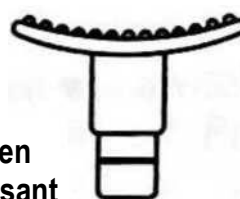

Tête en croissant


Convient aux épaules et aux jambes

CHARGEMENT

- Charger complètement la batterie pendant 6 heures avant la première utilisation.
- Avant le chargement, basculez l'interrupteur d'alimentation situé en bas de l'appareil en position OFF, puis connectez l'extrémité CC de l'adaptateur 24 V fourni au port de charge de l'appareil et branchez le câble CA dans la prise murale, le chargement démarrera automatiquement.
- Le pourcentage de niveau de batterie est indiqué par le chiffre à l'écran. Il n'est pas recommandé d'épuiser complètement la batterie à un niveau inférieur à 15 %.
- Le temps de fonctionnement moyen est de 6 heures selon la vitesse et la fréquence d'utilisation du produit.
- Lorsque la batterie est épuisée, elle a besoin de 4 heures pour être complètement chargée.
- Pour votre sécurité, vous ne devez jamais allumer la machine lorsque la batterie est en charge.
- L'appareil peut être rechargé à n'importe quel niveau de batterie.

NOTICE : Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, les mesures de sécurité de base doivent toujours respecter les règlements de sécurité afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures. Toujours vérifier que la source d'alimentation correspond à la tension indiquée sur l'étiquette signalétique de l'appareil.

MODE D'EMPLOI

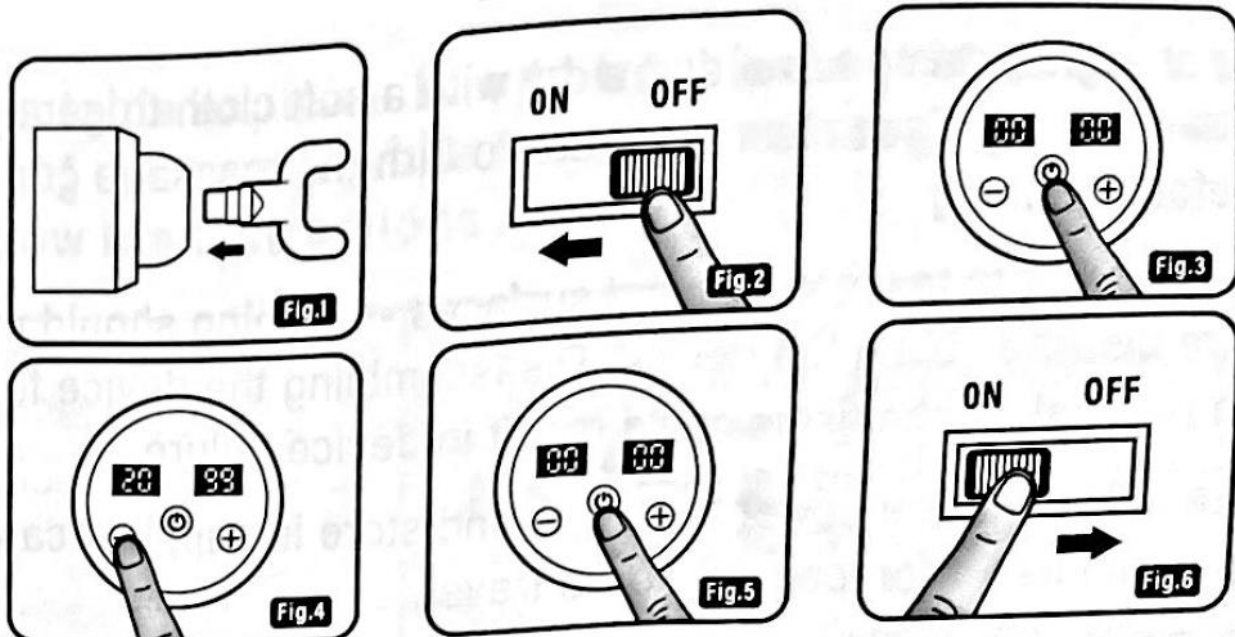

- o Tout d'abord, insérez l'une des 15 fixations dans le pistolet de massage en appuyant fermement pour les mettre en place. (Figure 1)
- o Ensuite, mettez l'interrupteur Marche/Arrêt en position Marche pour allumer l'appareil, l'écran LCD et le voyant DEL s'allument. (Figure 2)
- o Troisièmement, lorsque l'interrupteur d'alimentation est en position ON, appuyer sur le (⏻) bouton de l'écran LCD. (Figure 3)
- o Appuyer sur (+) ou (-) pour régler la vitesse désirée, appliquer une pression au besoin (Figure 4). Nous recommandons de partir du niveau le plus bas.
- o Enfin, appuyer sur le (⏻) bouton pour arrêter l'appareil (Figure 5). N'oubliez pas de basculer l'interrupteur Marche/Arrêt sur Arrêt lorsque vous souhaitez éteindre l'appareil. (Figure 6)

Note :



- o Remplacer la tête de massage lorsque le pistolet de massage est éteint.
- o Fonction de protection automatique : Le pistolet de massage s'éteint automatiquement après 10 minutes de fonctionnement continu. Appuyer sur le (⏻) bouton pour une utilisation ultérieure.
- o Déplacez l'appareil lentement lorsque vous l'utilisez, ne traitez pas la même partie du corps pendant plus de 2 minutes. Ne pas fonctionner de façon continue pendant plus d'une heure.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- o Utilisez une serviette légèrement humide et un chiffon doux pour essuyer délicatement la surface extérieure. Veiller à éteindre le pistolet de massage avant de le nettoyer.
- o Ne pas tenter de nettoyer les surfaces internes – le nettoyage ne devrait pas nécessiter le démontage de l'appareil. Le démontage du dispositif pour nettoyer les mécanismes internes peut entraîner une défaillance du dispositif.
- o Veuillez mettre l'appareil hors tension et le ranger dans le boîtier fourni, si vous ne l'utilisez pas pendant longtemps ou en voyage.
- o Tenir l'appareil loin des sources de chaleur, des liquides et des enfants.

INSTRUCTIONS POUR LA TÊTE DE MASSAGE

1. Attacher : Selon vos besoins, faites tourner la tête de massage fermement dans le pistolet de massage. (Figure 7)
2. Détacher : Si vous voulez retirer la tête de massage, faites tourner la tête de massage pour la relâcher, puis retirez-la de l'appareil. (Figure 8)

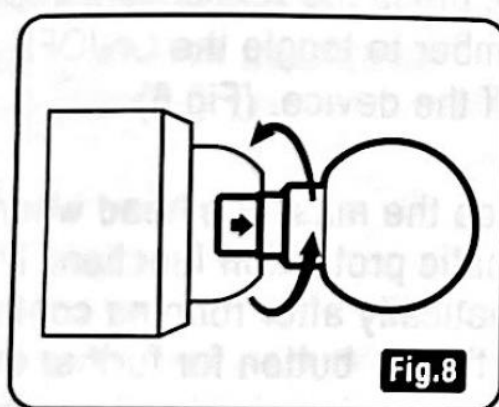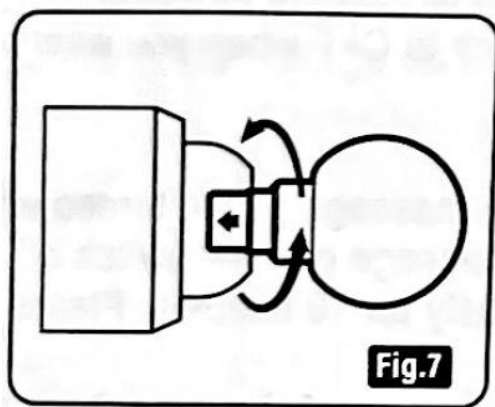

QUESTION ET RÉPONSE

Ce tableau explique comment résoudre les problèmes que vous pourriez rencontrer en utilisant le pistolet de massage. Veuillez suivre les instructions ci-dessous.

Pourquoi mon pistolet de massage ne peut-il pas s'allumer?	1 Il y a un interrupteur « ON/OFF » au bas de la poignée; assurez-vous que l'interrupteur est en position « ON ». 2. Veuillez vérifier l'état de la batterie et charger l'appareil pendant 6 heures avant la première utilisation.
Pourquoi le produit cesse-t-il de fonctionner pendant le massage?	1. Le pistolet de massage dispose de 10 minutes pour arrêter automatiquement la fonction. Ne massez pas trop longtemps dans la même partie du corps, car cela pourrait causer une ecchymose. Redémarrer l'appareil en appuyant Ⓢ à nouveau.
À quel point dois-je appuyer sur l'appareil dans mes muscles?	1. La meilleure façon de procéder est de démarrer l'appareil loin de votre corps, puis, une fois qu'il fonctionne, de le faire entrer en contact avec la tête de massage et de permettre à l'appareil de flotter sur vos tissus. Une fois que vous avez une idée de la pression que vous souhaitez, vous pouvez augmenter la pression lentement jusqu'à ce que vous atteigniez un équilibre confortable.
Lorsque vous appliquez une pression sur le corps, l'arme cesse de fonctionner?	1. Redémarrer le pistolet de massage. Si le redémarrage ne résout pas le problème, veuillez communiquer avec l'équipe de soutien de TOLOCO pour obtenir un remplacement.

GARANTIE

SI DANS L'ANNÉE SUIVANT LA DATE D'ACHAT CE PRODUIT EST DÉFECTUEUX EN RAISON D'UN DÉFAUT DE MATÉRIEL OU DE FABRICATION, NOUS RÉPARERONS OU REMPLACERONS GRATUITEMENT LE PRODUIT OU LES COMPOSANTS NÉCESSAIRES. CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS :

- (a) Dommages causés par un accident, un abus, une manipulation inappropriée, etc.;
- (b) les appareils faisant l'objet de réparations non autorisées;
- (c) Les appareils ne sont pas utilisés conformément à nos instructions;
- (d) les dommages dépassant le coût du produit;
- (e) Détérioration du produit livré résultant d'un stockage anormal ou de conditions de sécurité sur les clients;

Cette garantie garantit des droits juridiques spécifiques, et d'autres droits peuvent varier d'un pays à l'autre et d'un État à l'autre. Ce service de garantie est disponible par les politiques et procédures opérationnelles de TOLOCO et de tous les distributeurs internationaux de TOLOCO. Si vous êtes un client, veuillez communiquer avec l'entité commerciale, le détaillant ou le détaillant TOLOCO approprié, de qui vous avez directement acheté le produit pour obtenir une garantie et une autorisation de retour.

Cette garantie est initiée et exécutée par TOLOCO.

TOLOCO[®]

Merci d'avoir choisi le pistolet de massage TOLOCO!