

Instrumento de depilación

3-en-1

Manual de
usuario



Introducción del producto

Instrumento de depilación 3-en-1 (en adelante denominado como ("depiladora ") es un producto de belleza innovador, que puede eliminar de forma eficaz y segura el vello corporal no deseado, suavizar la piel y mejorar las marcas de acné. Emplea tecnología de irradiación de luz pulsada inteligente e integra múltiples aplicaciones de tecnología óptica en el campo de la belleza y la salud, presumiendo de ser uno de los productos más profesionales y prácticos en este campo.

Lea atentamente las instrucciones antes de utilizarlo

El objetivo final al diseñar depiladoras es garantizar la comodidad y la seguridad del cliente. Todos los productos se fabrican bajo los más altos estándares de calidad. Lea y comprenda todas las instrucciones de uso, las precauciones de seguridad y las advertencias antes de utilizarlas.

Forma de uso

La depiladora es un aparato de venta libre, adecuado para eliminar el vello no deseado tanto en hombres como mujeres.

Tonos de piel aplicables

No utilizar nunca en tonos de piel oscuro.

Para el tono de piel moreno, inicie con el modo de velocidad más bajo y ajuste la velocidad según su sensación de dolor.

Precauciones de seguridad

I. Contraindicaciones

Este producto no está destinado a ser utilizado por:

Niños, ancianos y personas con inflamación local o sistémica; personas con piel fotosensible o que estén tomando medicamentos fotosensibles; personas con marcapasos y otros dispositivos médicos electrónicos implantables, o que de soporte vital, como ECMO.

II. Precauciones


1. No se permite el uso a mujeres embarazadas, niños menores de 11 años, personas con lunares, tatuajes.
2. No se recomienda a personas que toman sol o utilizan camas solares, productos de bronceado sin sol. Si no está seguro de si la piel está bronceada o quemada por el sol, espere un día para recuperarse antes de usar el producto.
3. No utilice la depiladora directamente sobre tatuajes, manchas marrones oscuras y negras, de lo contrario, puede absorber mucha luz y causar molestias en la piel.
4. Nunca la utilice en las zonas alrededor de las orejas, el cuello, los pezones, los genitales o el ano, porque estas partes de la piel son sensibles y más vulnerables a las lesiones.
5. No mantenga la depiladora en la misma zona durante mucho tiempo, ni emita ondas de luz varias veces en una misma posición. Esto puede generar un exceso de calor y causar molestias en la piel. Si se produce alguna reacción alérgica, como enrojecimiento o hinchazón, después de su uso y dura más de 24 horas, deje de utilizarla y póngase en contacto con su médico o consulte al servicio de atención al cliente.

III. Advertencias

1. Debido a los circuitos de alta tensión en el interior del producto, por favor no lo desmonte sin permiso.
2. Por favor, no cubra la ventilación durante el uso.
3. Manténgalo alejado del agua o la humedad.
4. No utilice nunca la depiladora si el enchufe o el cable de alimentación están dañados.
5. No utilice nunca la depiladora en un entorno inflamable o explosivo.

IV. Manipulación correcta

1. Cuando se emita el flash, está prohibido apuntar la luz a los ojos y otras partes vulnerables, y se deben usar gafas cuando se utilice.
2. Antes de utilizar este producto, por favor, quítese todos los elementos metálicos como pulseras y/o anillos de su cuerpo para evitar el mal funcionamiento del equipo.
3. Por favor, utilícelo lejos de los niños y manténgalo fuera de su alcance después de su uso.
4. Conecte el adaptador a la corriente, encienda el aparato y utilizando las gafas de protección especiales incluidas en el producto. La luz de fondo de la pantalla del medidor de depilación se enciende y el estado es en "OFF".

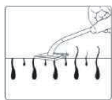


1



2



3

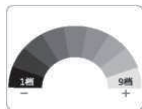

5. Pulse prolongadamente el botón "On/Off/Stand Size" durante 2 segundos, la depiladora se pondrá en marcha. Compruebe el estado de funcionamiento consultando la "Introducción a la visualización de la pantalla" en la sección anterior.

6. Pulse el botón de cambio de función y entre en el modo de depilación cuando la pantalla se muestre HR.

7. La máquina está equipada con 1 a 9 marchas, pulse brevemente el botón "interruptor/tamaño de la instalación" para ajustar la intensidad de la onda de luz. Para la primera vez, por favor comience desde la primera marcha y refuerce la marcha de acuerdo a su propia experiencia, cuanto más alta sea la marcha, mejor será el efecto.

8. Configuración de la luz. Ajuste manual de la luz (para la depilación de zonas pequeñas).

Después de encender la depiladora, mantenga pulsado el botón de flash, la depiladora cambiará al modo de luz deslizante.

Todo lo que tiene que hacer es sostener el cabezal de la lámpara verticalmente contra la piel y el aparato de depilación hará brillar su luz automáticamente

9. Coloque el cabezal de la lámpara en la parte donde se requiere la depilación y utilícelo verticalmente. (1) Cuando el aparato de depilación está en modo de luz manual, espere a que la "pantalla LCD" parpadee, pulse el "botón emisor de flash" para emitir un destello, el cabezal de la lámpara cubre la zona para completar la depilación. Mueva el cabezal de la lámpara a la siguiente zona de depilación y manténgalo cerca de la piel, espere a que la "pantalla LCD" parpadee y pulse el "botón emisor de flash" para emitir un destello. En ciclos sucesivos, se recomienda 2-3 exposiciones para cada parte.

(2) Cuando la depiladora está en modo de luz deslizante, una pulsación larga del "botón emisor de flash" emite un destello de luz, lo que significa que la zona cubierta por el cabezal de la lámpara está completa. Mueva el cabezal de la lámpara a la siguiente zona de depilación y manténgalo cerca de la piel, el aparato de depilación emite un destello de luz en ciclos sucesivos, se recomiendan 2-3 exposiciones por parte. Consejo: Cuando está en modo de deslizamiento, el cabezal está totalmente presionada contra la piel, y puede parpadear continuamente durante 8 segundos mientras el cabezal se desliza.

10. Cuando la máquina esté encendida, se apagará automáticamente si no se realiza ninguna acción durante 5 minutos.
11. Tire de la clavija del adaptador, luego retire el adaptador de la toma de corriente.
12. Después de diez minutos, deje que la superficie de la lámpara se enfríe y limpie la lámpara con una toalla húmeda sin alcohol o con una toalla de papel suave.
13. Después de la limpieza, vuelva a introducir la depiladora y el adaptador en la caja y coloque la depiladora en un lugar seco y ventilado, fuera del alcance de los niños.
14. Cuidado de la piel en las zonas receptoras de luz. 20 minutos después de terminar la depilación, puede optar por productos hidratantes para la zona depilada para su hidratación y reparación. Si hay molestias, aplique compresas frías durante 30-60 minutos hasta que la piel esté libre de dolor por quemaduras.

Atención

- 1 Aplique gel de aloe vera o una crema hidratante similar en la zona depilada después de la depilación, no utilice cosméticos fuertes inmediatamente.
- 2 Asegúrese de que la zona de tratamiento esté limpia antes de la depilación. Se recomienda lavar la piel con agua fría hirviendo y no tocar el agua durante las 2 horas siguientes a la depilación. No se recomienda tomar el sol, baños de agua caliente, baños de vapor, etc. en las 48 horas siguientes.
- 3 Evite exponer la zona de depilación a la luz solar intensa durante las 2 horas siguientes a la depilación, y aplique un protector solar antes de realizar actividades al aire libre.
- 4 No se bañe en la piscina en las 48 horas posteriores a la depilación.
- 5 No pulse el botón de disparo continuamente, sólo pulse una vez, se recomienda irradiar cada parte 2-3 veces. (Todo el cabezal de la lámpara se ajusta a la zona de la piel en un lugar).
- 6 La máquina no debe trabajar más de 25 minutos de forma continua, si la zona de depilación es grande, se puede dividir en varias veces (después de 10 minutos, apague la máquina y desenchufe la corriente, después de 10 minutos de descanso, puede seguir utilizándola).

Ciclo del servicio

El vello tiene un determinado ciclo de crecimiento, y su uso a corto plazo no completa la depilación permanente. El curso completo del tratamiento requiere de 2 a 6 meses. Sólo la adherencia a largo plazo a este producto tendrá un efecto.

Primer mes (utilizar una vez cada 3-5 días)

Después de la irradiación, los folículos pilosos comienzan a atrofiarse y el cabello se vuelve gradualmente suave y fino.

Segundo mes (utilizar una vez a la semana)

La irradiación continua del cabello ha ralentizado su crecimiento, con una importante pérdida de cabello.

Tercer mes (utilizar una vez cada 15 días)

Después de irradiar los folículos pilosos según el ciclo, las raíces del vello se caen sin dejar puntos negros y la piel queda lisa. Cuarto mes (usar una vez cada 30 días)

El 96% del vello deja de crecer, consiguiendo una depilación permanente y una piel perfecta..

Intercambio de funciones

1 Cambia a la interfaz LCD según los pasos de la depiladora.

2 Función de depilación, rejuvenecimiento de la piel y eliminación del acné: Pulse el "botón de cambio de función para cambiar de HR,SC,RA".

3 Pulse el "botón de emisión de flash" durante dos segundos para mostrar "AUTO" y entrar en el modo de flash automático.

Especificaciones

Tipo de fuente de luz	Luz pulsada inteligente	Alimentación	100-240V~ 50-60Hz 36W
Área luminosa	4centímetros cuadrados	Panel de control	Saliente buttons
Talla del cuerpo principal	161 *83*168mm	Entorno laboral	Temperatura -20-60 C Humedad relativa 20-90%
Peso	0.2Kg	Calidad de los ordenadores centrales	Un año de garantía para el ordenador central

Reacciones adversas y tratamiento

Todos los métodos cosméticos pueden conllevar un cierto riesgo, y este producto puede causar molestias si se utiliza de forma inadecuada.

Partes aplicables

Línea de cabello

Pómulos

Bigote

Espalda

Brazo

Axila

Pecho


Abdomen

Línea del bikini

Muslos

Parte inferior
de la pierna



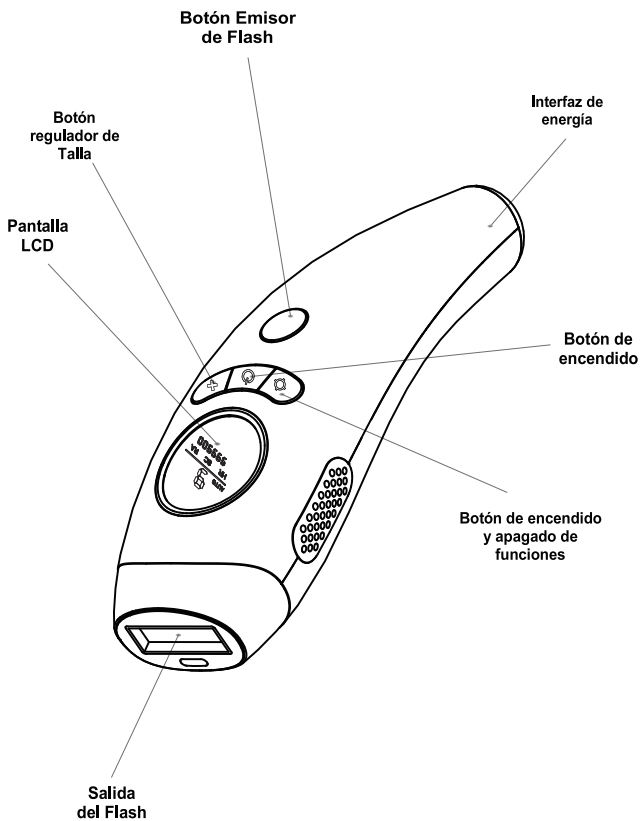

Introducción a la visualización de pantalla

AUTO HRSCRA

Pantalla LCD	Función	Parámetros
HR	Eliminado	0,99 millones de veces
SC	Rejuvenecimiento de la piel	/
RA	Remoción de acné	
AUTO	Modo de emisión automática	
Letras grandes 1 -9	Indicación de intensidad de la onda luminosa	1-9 marchas
Número de seis dígitos	Número de Destellos	/

Prueba de sensibilidad cutánea

Si es la primera vez que utiliza este producto, seleccione una pequeña zona para comprobar la sensibilidad de la piel de acuerdo con los siguientes requisitos.

1. Consulte los siguientes pasos para el encendido.
 2. Seleccione la marcha 1 o la 2.
 3. Siga las instrucciones de funcionamiento y las precauciones de uso para la zona de la piel seleccionada.
 4. Tras 30 minutos de prueba cutánea, compruebe la reacción de la piel.
 5. Si la piel de la zona de prueba es normal, puede seguir utilizándola, si es anormal, deje de utilizarla.
- Utilícelo lejos de los niños y manténgalo fuera de su alcance después de usarlo.

Procedimiento de uso del instrumento de depilación

1. Antes de usarla, por favor, afeite el vello en la zona a depilar, limpie la zona de depilación y séquela. Asegúrese de que los folículos pilosos bajo la piel puedan absorber la máxima cantidad de energía para lograr una depilación óptima.

Los problemas y sugerencias son los siguientes:

Sensación de picor	La sensación de dolor es diferente según la constitución de cada persona. Si siente un poco de ardor, por favor, baje la posición del botón..
Ligero enrojecimiento o ligera sensación de ardor	Es normal y puede desaparecer por sí solo. Puede utilizar gel de aloe vera o una toalla para
Olor a pelo quemado	Asegúrese de afeitarse el vello antes de utilizar la depiladora.

Tabla de resolución de problemas simple

Fenómeno	Causa probable	Solución
No enciende el display	<ol style="list-style-type: none"> 1. El botón de encendido no está presionado 2. Mantenga pulsado el botón de encendido durante menos de 2 segundos 	Conecte el cable de alimentación
No se puede arrancar	Mal contacto de alimentación	Conecte el cable de alimentación
Sin flash	<ol style="list-style-type: none"> 1. El portalámparas no está en contacto con la piel ni es perpendicular a ella 2. La cantidad de flash del portalámparas flash se ha agotado 3. La luz indicadora no parpadea cuando el almacenamiento de energía 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cerca y perpendicular a la piel 2. Pulse después de que el indicador luminoso parpadee
Apagado automático	El sistema está configurado para apagarse automáticamente después de 5 minutos sin flash	Mantenga pulsado el "botón de encendido" durante 2 segundos para iniciar

Preguntas frecuentes

P: ¿Tengo que afeitarme antes de cada uso?

R: No, el afeitado sólo es necesario antes del primer uso. Después del primer uso, puede esperar a que el vello crezca unos 5 mm. Puede afeitarlo de nuevo si lo desea.

P: ¿Por qué mi vello no desaparece inmediatamente o no cambia después de usarlo?

R: Este es un dispositivo de depilación permanente, para eliminar el vello de forma permanente, es necesario utilizarlo durante un curso de tratamiento. Al principio, el crecimiento del vello se inhibe y se ralentiza, con este estado continuo, este dispositivo puede hacer que los folículos pilosos se duerman, logrando así la depilación permanente.

P: ¿Por qué no logré el mismo efecto que los demás, o ningún efecto?

R: Las personas tienen diferentes físicos, y la diferencia del grosor del vello y de las partes tratadas puede afectar al ciclo de efecto. El ciclo de uso es un valor medio, cuyo tiempo específico puede ser ligeramente diferente.

P: ¿Qué nivel es adecuado?

R: No hay un estándar unificado de los niveles adecuados, todo depende de la tolerancia de su piel (cuanto más oscuro sea el color de la piel, más bajo debe ser el nivel utilizado. Y empieza a elegir el nivel adecuado a partir del más bajo. Cuanto más alto sea el nivel, más evidente es el efecto del tratamiento y más corto es el tiempo de tratamiento. Por el contrario, si se utiliza un nivel bajo, el tiempo de tratamiento se prolongará en consecuencia. Se recomienda hacer pruebas locales en la parte de la piel tratada de 1 a 3 destellos antes de cada depilación, y luego comenzar el tratamiento en grandes áreas de la piel después de asegurarse de que no se produzcan molestias en la piel en el segundo día.

P: ¿Dolerá?

R: Durante el proceso de depilación, las ondas de luz generarán calor al encontrarse con la melanina del vello, causando un ligero dolor. Debido a la diferente sensibilidad de la piel y la tolerancia al dolor de los distintos individuos, las sensaciones reales son diferentes. Se recomienda acelerar el nivel lentamente desde el más bajo según su situación real.

P: ¿Cómo hay que afeitarse? ¿Qué tipo de vello debe afeitarse?

R: En general, debe afeitarse el vello de la axila con mayor facilidad:

A- Utilice crema de afeitado o un gel de ducha suave para lubricar la zona de afeitado.

O bien, aplique una toalla caliente en la zona de afeitado durante unos minutos y afeite suavemente el vello inmediatamente después de retirar la toalla, lo que facilitará el afeitado.

P: ¿Por qué hay olor a pelo quemado después del uso?

R: Eso se debe a que el vello no está completamente afeitado. Durante el uso, las ondas de luz generarán calor al encontrarse con la melanina, lo que provoca el olor a pelo quemado. Y eso es normal.

P: Quiero eliminar el vello rápidamente. ¿Puedo usarla todos los días?

R: No se recomienda usar este aparato todos los días. Hay un periodo de crecimiento del vello, puede utilizarlo según el ciclo normal: Utilícelo una vez cada 3-5 días durante el primer mes y disminuya gradualmente el número de veces de uso después de que el crecimiento del vello se ralentice.