


PELCAS

Schröpfmassagegerät

Handbuch

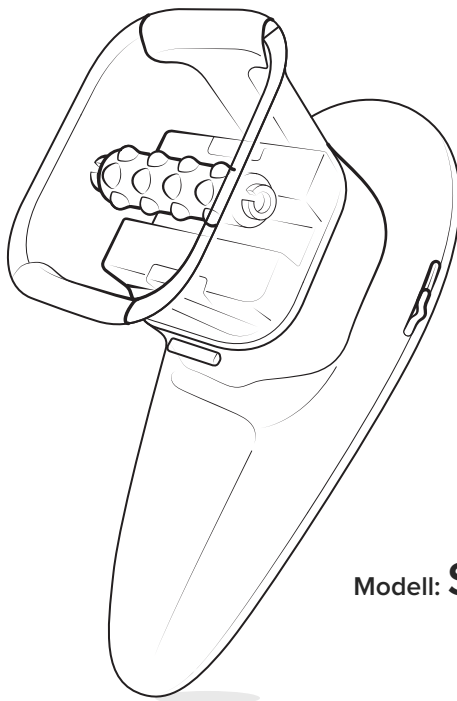

Deutsch

Modell: **SR-07B**

Vor der Verwendung dieses Geräts lesen Sie bitte die folgenden Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie dieses Handbuch für zukünftige Nachschlagezwecke auf.




service@pelcas.com

Verwendungszweck

Cellulite bezeichnet Fettablagerungen, die gegen das Bindegewebe unter der Haut drücken und so ein dellenförmiges oder unebenes Hautbild erzeugen – am häufigsten an Oberschenkeln, Bauch und Gesäß.

Das SR-07B Cellulite-Massagegerät wurde entwickelt, um das Erscheinungsbild von Cellulite zu reduzieren, die Haut zu straffen und zu festigen, Dehnungsstreifen zu verbessern, Muskelverspannungen zu lindern, die Durchblutung zu fördern und durch eine Kombination aus LIPO-Saugtechnologie, EMS (elektrische Muskelstimulation) und verbesserter Rollmassage-Technologie ein glatteres, gesünder aussehendes Hautbild wiederherzustellen.

Produktstruktur und Komponenten

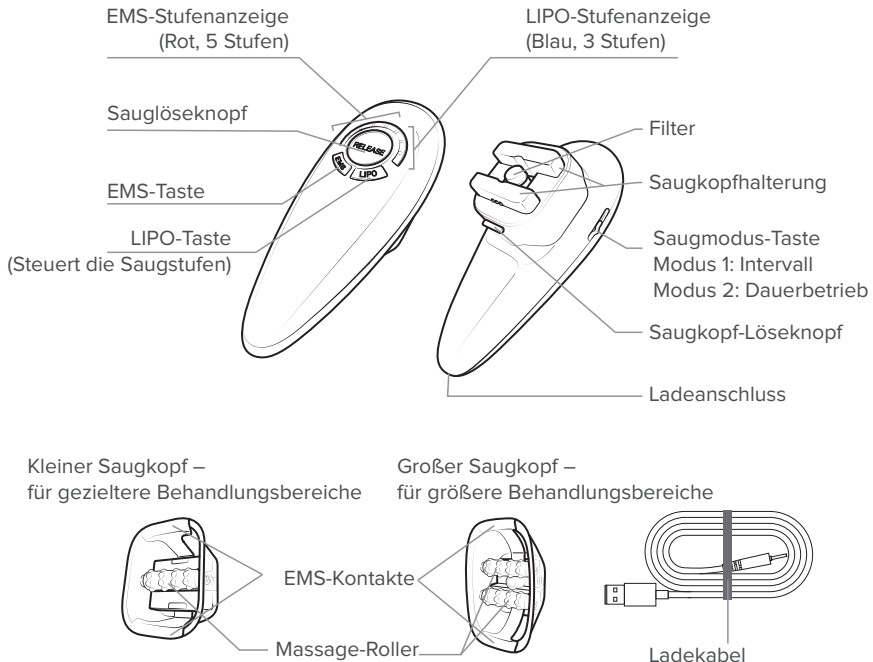

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG: Lesen Sie vor der Verwendung alle Sicherheitshinweise sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung kann zu Unannehmlichkeiten, Geräteschäden oder Stromschlägen führen.

Warnhinweise zur Anwendung

- Nicht im Gesicht oder auf verletzter, entzündeter oder infizierter Haut anwenden.
- Anwendung pro Körperbereich auf maximal 5 Minuten pro Sitzung beschränken.
- Bei schlaffer oder empfindlicher Haut kann es vorübergehend zu Blutergüssen kommen. Bei Auftreten von Blutergüssen oder Hautreizungen bitte die Anwendung sofort abbrechen.
- Wenn Ihre Haut behandelt wird oder sich in schlechtem Zustand befindet, konsultieren Sie vor der Verwendung einen Arzt oder eine medizinische Fachkraft.

Wasser- und Elektrosicherheit

- Halten Sie das Gerät von Wasser und Feuchtigkeit fern. Nicht abspülen, eintauchen oder Flüssigkeiten aussetzen.
- Falls das Gerät versehentlich ins Wasser fällt, sofort vom Stromnetz trennen. Niemals berühren, solange es an die Stromversorgung angeschlossen ist.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, insbesondere nicht in der Nähe von Kindern oder Tieren.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Gerät nicht fallen lassen, auseinanderbauen oder Gegenstände in Öffnungen einführen.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Ladekabel und Netzteil.
- Gerät nach jeder Verwendung und vor der Reinigung stets vom Strom trennen.
- Verwenden Sie keine nicht zugelassenen Zubehörteile.
- Kinder ab 8 Jahren oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten dürfen das Gerät nur unter Aufsicht und nach angemessener Einweisung verwenden.


Aufladen

1. Schließen Sie das USB-Kabel an das Gerät und ein USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) an.
2. Die EMS- und LIPO-Anzeigen leuchten während des Ladevorgangs und schalten sich 2 Minuten nach vollständiger Aufladung aus.
3. Eine vollständige Aufladung dauert etwa 3 Stunden und ermöglicht bis zu 45 Minuten Dauerbetrieb.
4. Wenn der Akkustand niedrig ist, blinken die LED-Anzeigen eine Minute lang zweimal pro Sekunde, bevor sich das Gerät automatisch abschaltet.

Anwendungshinweise

Schritt 1: Vorbereitung

1. Wählen Sie den passenden Saugkopf für den zu behandelnden Bereich aus und befestigen Sie ihn sicher am Gerät.
2. Tragen Sie eine Schicht Creme, Lotion oder Körperöl auf die gewünschte Körperstelle auf, um ein sanftes Gleiten zu ermöglichen und das durch EMS verursachte Kribbeln zu minimieren.

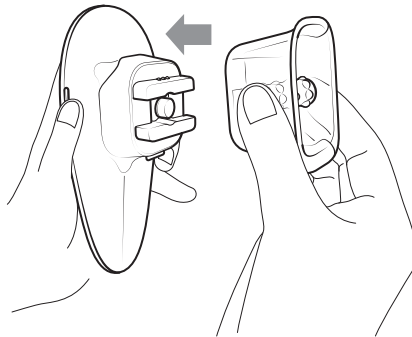

Schritt 2: LIPO-Funktion (Saugkraft) aktivieren

1. Halten Sie die LIPO-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um die Saugfunktion zu aktivieren. Die blaue Anzeige leuchtet auf.
2. Drücken Sie die LIPO-Taste, um zwischen drei Saugstufen zu wechseln. Nach Stufe 3 schaltet ein weiterer Tastendruck die Funktion aus.
3. Verwenden Sie die Saugmodus-Taste, um den gewünschten Modus auszuwählen:
 - Modus 1: Intervall-Saugmodus
 - Modus 2: Dauerbetrieb (kontinuierliche Saugkraft)

Schritt 3: EMS-Funktion aktivieren


1. Halten Sie die EMS-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um die EMS-Funktion zu aktivieren. Die rote Anzeige leuchtet auf.
2. Drücken Sie die EMS-Taste, um zwischen fünf Intensitätsstufen zu wechseln. Nach Stufe 5 schaltet ein weiterer Tastendruck die Funktion aus.

⚠ Es ist normal, während der Anwendung ein leichtes Sauggefühl und Kribbeln zu verspüren. Bei Unwohlsein drücken Sie bitte den Sauglöseknopf und reduzieren Sie die Intensität.

Schritt 4: Massage

1. Setzen Sie den Saugkopf fest auf die zu behandelnde Stelle und bewegen Sie das Gerät langsam und gleichmäßig.
 2. Die empfohlene Behandlungsdauer beträgt 2–3 Minuten pro Bereich, maximal 30 Minuten Gesamtkörperanwendung pro Sitzung.
- ⚠** Üben Sie keinen übermäßigen Druck aus und behandeln Sie dieselbe Stelle nicht wiederholt.

Bitte beachten Sie die Abbildungen zur Bewegungsrichtung für die einzelnen Körperbereiche.

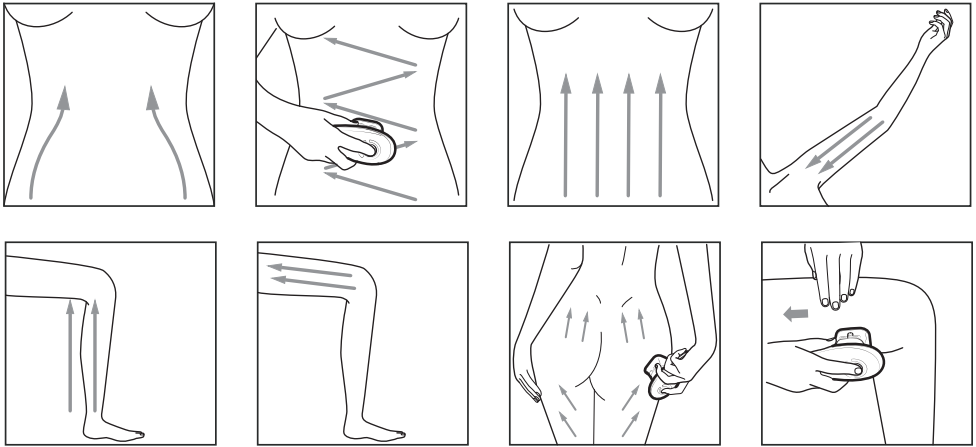


Schritt 5: Ausschalten

1. Das Gerät verfügt über eine automatische Abschaltung nach 10 Minuten, um Energie zu sparen. Um die Massage fortzusetzen, starten Sie das Gerät einfach neu.
2. Zum Ausschalten drücken und halten Sie die LIPO- oder EMS-Taste für 2 Sekunden, um das Gerät manuell auszuschalten.

Reinigung und Wartung

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
2. Drücken Sie den Saugkopf-Löseknopf, um den Saugkopf abzunehmen.
3. Ersetzen Sie den Filter, wenn die Saugleistung nachlässt (empfohlen: einmal im Monat).

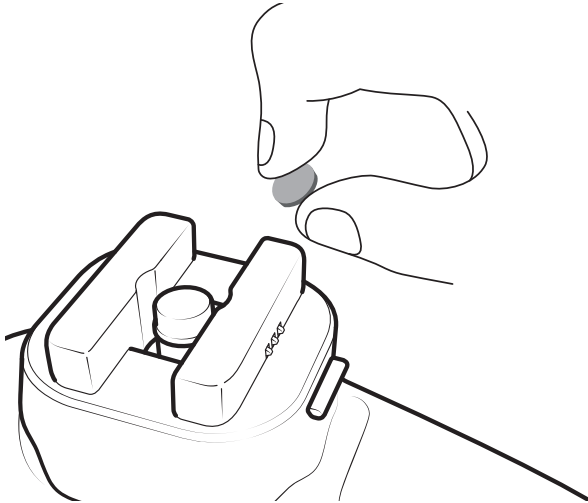

4. Wischen Sie das Hauptgerät mit einem weichen, leicht feuchten Tuch ab.
5. Spülen Sie das Hauptgerät nicht ab und tauchen Sie es nicht in Wasser ein.
6. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder chemischen Reiniger.

Aufbewahrung

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig trocken ist, bevor Sie es aufbewahren.
2. Lagern Sie es an einem kühlen, trockenen Ort, fern von Hitze, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung.
3. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
4. Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, reinigen Sie es gründlich und bewahren Sie es in der Originalverpackung oder einem staubfreien Behälter auf.

Spezifikationen

Modell	SR-07B
Produktgröße	15.4x6.4x6.1cm / 6.06x 2.52x2.4in
Nettogewicht	179g
Nenneingang	5 V= 1 A
Akkukapazität	700 mAh
Ladezeit	3 Stunden
Betriebszeit	245 Minuten

ENTSORGUNG & RECYCLING:



Sie müssen das Schröpfmassagegerät gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften ordnungsgemäß entsorgen. Da dieses Gerät elektronische Komponenten enthält, darf es nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Wenn das Produkt das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden, um Informationen zur Entsorgung und zu Recyclingmöglichkeiten zu erhalten. Helfen Sie mit, die Umwelt zu schützen, indem Sie die örtlichen Vorschriften einhalten und nicht mehr funktionierende Elektrogeräte bei einer geeigneten Entsorgungsstelle abgeben.