


Ear Cleaner with Camera


User Manual
ENDURITIFREES

Steps to use on the phone

Step 1
Download "Souleat" App
For iOS:
Download and install the App "Souleat" from App Store.
For Android:
Download and install the App "Souleat" from Google Play Store.
Optional:
Scan the QR Code below to download the App.




Step 2
Long press the switch key to open the device, after 3 seconds, then step into the next operation.




Step 3
Open the "Souleat" App, click the "CONNECT DEVICE", follow the pop-up prompt and click to connect now to jump to the mobile WiFi setting interface.

Step 4
Find "Souleat-xxxx" on the WiFi setting interface and click to connect.

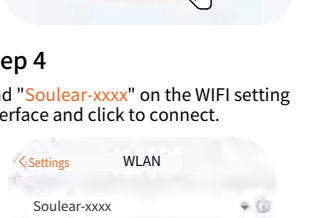

Step 5
After the mobile phone displays "Souleat-xxxx" WiFi is connected, return to the App again and click the "CONNECTED" to enter the device.

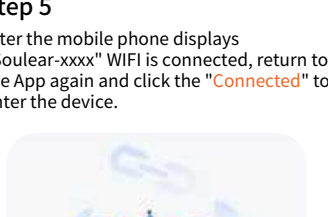

After connecting to the WiFi of the product, you will be asked some questions:

IOS:
"Souleat" would like to find and connect to devices on your local network.
Suggestion: Click "OK".

Android:
"Souleat" would like to find and connect to devices on your local network.
This app will be able to discover and connect to devices on the network you use.
Suggestion: Click "Allow".

Allow "Souleat" to use wireless data?
Click: "WLAN/Cellular/WLAN Only".

Allow "Souleat" to use wireless data?
Some functionality may not work when you are not connected to the internet.
Click: "WLAN/Cellular/WLAN Only".

Android:
If your mobile phone displays the following prompts, WiFi has no data connection, whether to continue trying to use the WiFi? Whether to keep the connection? Whether to switch WiFi?
Suggestion: Click "Keep"/"CONNECT"/"Decline" option.

Troubleshooting

Problems	Suggestions
Camera does not photos or videos to your phone	Let Souleat permit the authority of photos, media and camera to your phone.
Camera is no response, camera doesn't light up	Please charge the device.
App crashed	Please uninstall App and scan the QR Code again.
For endoscope's mid light on	Please charge the product.
WiFi connection break	Please restart ear endoscope, open the App, connect to WiFi.
When photos prompt "cannot post this with", the network is temporarily unavailable, please try again later"	When the above situation occurs, please try to turn off the product, turn on the application, and reconnect to WiFi to connect and use.

Product Parameter

Product Name	Working Frequency
Ear Cleaner with Camera	2.4GHz
Network Standard	Resolution
IEEE 802.11b/g/n	1080P
Image Transmission Rate	Real Focal Length
20fps	1.5-2cm
Environment Temperature	Charging Time
10-30°C	1.5h
Gravity Sensor	Working Voltage
6-axis	3.7V-4.2V
Input Parameter	Lens Diameter
5V=0.6A	3.5mm

Ohrenreiniger mit Kamera

Benutzerhandbuch
ENDURITIFREES


Schritte zur Benutzung am Smartphone

Schritt 1
Laden Sie die App "Souleat" herunter
Für iOS:
Laden Sie die App "Souleat" aus dem App Store herunter und installieren Sie sie.
Für Android:
Laden Sie die App "Souleat" aus dem Google Play Store herunter und installieren Sie sie.
Optional:
Scannen Sie den QR Code unten, um die App herunterzuladen.




Schritt 2
Drücken Sie lange auf die Einschalttaste, um das Gerät zu starten. Nach 3 Sekunden können Sie den nächsten Schritt ausführen.

Schritt 3
Öffnen Sie die "Souleat" App, klicken Sie auf das "Verbinden mit dem Gerät", folgen Sie der Aufforderung und klicken Sie auf "Jetzt verbinden", um die WLAN-Einstellungsüberfläche aufzurufen.

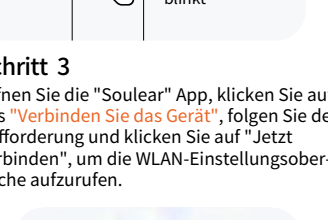

Schritt 4
Suchen Sie "Souleat-xxxx" auf der WLAN-Einstellungsseite und klicken Sie auf "Verbinden".

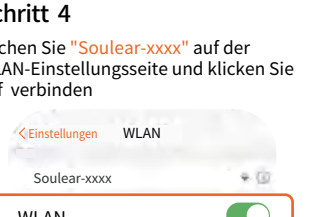

Schritt 5
Nachdem das Mobiltelefon "Souleat-xxxx" WLAN ist verbunden angezeigt, kehren Sie wieder zur App zurück und klicken Sie auf das "Verbunden", um das Gerät zu bedienen.

Nachdem Sie sich mit dem WLAN des Produkts verbunden haben, werden Ihnen einige Fragen gestellt:

IOS:
"Souleat" möchte Geräte in Ihrem lokalen Netzwerk finden und sich mit ihnen verbinden.
Vorschlag: Klicken Sie auf "OK".

Android:
"Souleat" möchte Geräte in Ihrem lokalen Netzwerk finden und sich mit ihnen verbinden.
Vorschlag: Klicken Sie auf "OK".

Erlauben Sie "Souleat", WLAN-Daten zu verwenden?
Vorschlag: Klicken Sie auf "WLAN & Mobilfunk/Nur WLAN".

Erlauben Sie "Souleat", WLAN-Daten zu verwenden?
Für Ihre lokale Netzwerkverbindung ist WLAN erforderlich, wenn die WLAN-Daten deaktiviert sind.

WLAN & Mobilfunk
Nur WLAN
Nicht zulassen

Android:
Wenn Ihr Mobiltelefon die folgende Meldung anzeigt: "WLAN hat keine Datenverbindung", nutzen Sie weiter versuchen, das WLAN zu nutzen? Soll die Verbindung aufrechterhalten werden? Soll zu WLAN gewechselt werden? Vorschlag: Klicken Sie auf "Behalten"/"VERBINDEN"/"Ablehnen"-Option.

Das aktuelle WLAN kann nicht auf das Internet zugreifen und es gibt andere WLAN-Netzwerke, die normal verbunden werden können. Möchten Sie wechseln?
Netzwerk wechseln
Ablehnen

Dieses WLAN-Netz hat keine Internetverbindung. Möchten Sie verbinden?
ABBRUCHEN
VERBINDEN

"Souleat-xxxx" hat kein Internetzugang. WLAN-Abschluss erlauben, so können Sie besser mit dem Internet verbunden werden.
Zulassen
Ablehnen

Fehlerbehebung

Probleme	Vorschläge
Sie können keine Fotos oder Videos auf Ihrem Mobiltelefon aufnehmen. Die Kamera reagiert nicht auf die Kamera.	Lasen Sie "Souleat" den Berechtigungen für Fotos, Medien und Kamera auf Ihrem Gerät zu. Bitte laden Sie das Gerät auf.
App ist abgestürzt	Bitte deinstallieren Sie die App und scannen Sie den QR-Code zur Installation.
Das rote Licht des Endoskops leuchtet	Bitte laden Sie das Produkt auf.
WLAN-Verbindung unterbrochen	Bitte starten Sie das Endoskop ab und verbinden Sie es mit dem WLAN-Netzwerk.
Wenn das iPhone die Meldung anzeigt: "Ihre WLAN-Verbindung ist instabil. Möchten Sie sich mit einem anderen WLAN-Netzwerk verbinden?"	Wenn die oben genannte Situation auftritt, versuchen Sie bitte, das Produkt anzuschließen und zu verbinden. Sie können sich erneut mit dem WLAN-Netzwerk verbinden, wenn es verfügbar ist, oder versuchen Sie es später erneut.
Wenn das Android-Mobiltelefon die Meldung anzeigt: "WLAN hat keine Datenverbindung. Möchten Sie weiter versuchen, das WLAN zu nutzen? Soll die Verbindung aufrechterhalten werden? Soll zu WLAN gewechselt werden?"	Wenn die oben genannte Situation auftritt, versuchen Sie bitte, das Produkt anzuschließen und zu verbinden. Sie können sich erneut mit dem WLAN-Netzwerk verbinden, wenn es verfügbar ist, oder versuchen Sie es später erneut.
Die Stromanzeige des Endoskops leuchtet rot	Bitte verwenden Sie das passende Ladekabel zum Aufladen.

Produktparameter


Produkt Name	Arbeitsfrequenz
Ohrenreiniger mit Kamera	2,4GHz
Netzwerk-Standard	Auflösung
IEEE 802.11b/g/n	1080P
Bildübertragungsrate	Schwerkraft Sensor
20fps	6-Achsen
Umgebungstemperatur	Aufladzeit
10-30°C	1,5h
Reale Brennweite	Arbeitsspannung
1,5-2cm	3,7V-4,2V
Eingangsparameter	Durchmesser der Linse
5V=0,6A	3,5mm

カメラ付き耳かき

ユーザーマニュアル
ENDURITIFREES

手順書

ステップ 1
"Souleat" アプリをダウンロードする
iOSの場合:
App Storeからアプリ "Souleat" をダウンロードし、インストールします。
Androidの場合:
Google Play Storeからアプリ "Souleat" をダウンロードし、インストールします。
オプション:
下のQRコードを読み取り、アプリをダウンロードしてください。



ステップ 2
スイッチを押し続けてデバイスを開き、5秒後に次の操作に進みます。

ステップ 3
"Souleat" アプリを開き、「接続に接続する」をクリックし、ポップアッププロンプトにタッチして今すぐ接続し、インターフェイスにジャンプします。



ステップ 4
WiFi設定インターフェイスで "Souleat-xxxx" を見つけて、クリックして接続します。



ステップ 5
携帯電話に "Souleat-xxxx" と表示された後が接続され、再び「接続済み」をクリックして、デバイスに入ることができ、接続を確認します。

製品のWiFiに接続すると、いくつかの質問が表示されます。

IOSです:
"Souleat" は、ローカルネットワーク上のデバイスを見つけ、接続したいのですが、許可してください。
ヒント: "OK" をクリックしてください。

Android:
"Souleat" がワイヤレスデータを使用できるようにしますか?
ヒント: "WLAN & Mobilfunk/Nur WLAN" をクリックしてください。

"Souleat" の使用を許可します。
WLAN & Mobilfunk
WLANのみ
許可しません

Android:
あなたの携帯電話が次のプロンプトが表示された場合、WiFiに接続しようとするか、WiFiを使用し続けるかどうか、接続を続けるかどうかをWiFiを切り替えるかどうかを決定してください。

現在のWiFiはインターネットにアクセスできません。他のWiFiネットワークがありますか?
別のWiFiネットワーク
はい、接続します
いいえ、接続しません

このWiFiネットワークはインターネットに接続できません。他のWiFiネットワークがありますか?
別のWiFiネットワーク
はい、接続します
いいえ、接続しません

このWiFiネットワークはインターネットに接続できません。他のWiFiネットワークがありますか?
別のWiFiネットワーク
はい、接続します
いいえ、接続しません

"Souleat-xxxx" はインターネットに接続できません。WiFi-Abschluss erlauben, so können Sie besser mit dem Internet verbunden werden.
Zulassen
Ablehnen

トラブルシューティング

問題	提案
写真や動画をスマートフォンで撮影できません。	"Souleat" アプリの権限を許可し、写真、メディア、およびカメラにアクセスする権限を付与してください。
カメラが反応せず、カメラが点灯しません。	充電してください。
アプリがクラッシュします。	アプリをアンインストールし、QRコードを再スキャンしてください。
赤いLEDライトが点滅します。	充電してください。
WiFi接続が切断されます。	WiFi設定を確認し、Souleat-xxxxを選択して接続してください。
iPhoneで「このWiFiネットワークはインターネットに接続できません。他のWiFiネットワークがありますか?」というメッセージが表示されます。	インターネットに接続できる別のWiFiネットワークを選択し、接続を試みます。
Androidで「このWiFiネットワークはインターネットに接続できません。他のWiFiネットワークがありますか?」というメッセージが表示されます。	インターネットに接続できる別のWiFiネットワークを選択し、接続を試みます。
iPhoneで「このWiFiネットワークはインターネットに接続できません。他のWiFiネットワークがありますか?」というメッセージが表示されます。	インターネットに接続できる別のWiFiネットワークを選択し、接続を試みます。
Androidで「このWiFiネットワークはインターネットに接続できません。他のWiFiネットワークがありますか?」というメッセージが表示されます。	インターネットに接続できる別のWiFiネットワークを選択し、接続を試みます。
充電インジケータが赤く点滅します。	充電してください。
充電インジケータが赤く点滅します。	充電してください。

製品パラメータ

項目	仕様
製品名	カメラ付きイヤークリーパー
動作周波数	2.4GHz
ネットワーク標準	解像度
IEEE 802.11b/g/n	1080P
画像伝送速度	重力センサー
20fps	6軸
環境温度	充電時間
10-30°C	1.5時間
実焦点距離	作業電圧
1.5-2cm	3.7V-4.2V
入力パラメータ	レンズ径
5V=0.6A	3.5mm

Detergente per frottecamera

Manuale d'uso
ENDURITIFREES

Passaggi da utilizzare sul telefono

Passo 1
Scarica l'app "Souleat".
Per iOS:
Scarica e installa l'app "Souleat" dall'App Store.
Per Android:
Scarica e installa l'app "Souleat" dal Google Play Store.
Opzionale:
Scansiona il QR Code qui sotto per scaricare l'app.



Passo 2
Premere a lungo il tasto interruttore per aprire il dispositivo, dopo 3 secondi, quindi passare all'operazione successiva.

Passo 3
Apri l'app "Souleat", fai clic su "Connetti il dispositivo", segui la richiesta a comparire e fai clic su Connetti ora per passare all'interfaccia di impostazione WiFi mobile.



Passo 4
Trova "Souleat-xxxx" nell'interfaccia delle impostazioni WiFi e fai clic su "Connetti".



Passo 5
Dopo che il telefono cellulare visualizza "Souleat-xxxx" WiFi è connesso, torna di nuovo all'app e fai clic su "Collegato" per accedere al dispositivo.

Dopo esserti connesso al WiFi del prodotto, ti verranno poste alcune domande:

IOS:
"Souleat" vorrebbe trovare e connettersi ai dispositivi sulla tua rete locale.
Suggerimento: Fai clic su "Consenti".

Android:
"Souleat" vorrebbe trovare i dispositivi sul tuo rete locale e connettersi.
Suggerimento: Fai clic su "WLAN e cellulare/ solo WLAN".

Consentire a "Souleat" di utilizzare i dati wireless?
Suggerimento: Fare clic su "WLAN e cellulare/ solo WLAN".

È permesso che "Souleat" utilizzi le tue informazioni personali?
WLAN e cellulare
Solo WLAN
Non consentire

Android:
Se il tuo telefono cellulare visualizza i seguenti messaggi, il WiFi non ha una connessione. Continua a provare a utilizzare il WiFi? Se mantieni la connessione? Se cambiare WiFi? Suggerimento: Fai clic sull'opzione "Mantieni"/"CONNETTI"/"Declino".

Il tuo attuale WiFi non può accedere a Internet e ci sono altri reti WiFi che possono essere collegate normalmente, vuoi cambiare?
Cambia rete
Mantieni
Noi

Questo WiFi non ha accesso a Internet. Vuoi connettere comunque?
ANNULLA
CONNETTI

"Souleat-xxxx" nessun accesso a Internet, consentire il tuo telefono di passare a una rete migliore?
Permettere
Rifiutare

Risoluzione dei problemi

Problemi	Suggerimenti
Impossibile memorizzare foto o video sul telefono	Consenti a Souleat di accedere alle informazioni di foto, media e camera sul tuo dispositivo.
La fotocamera non risponde o la fotocamera non si accende	Si prega di caricare il dispositivo.
L'app è andato in crash	Disinstalla l'app e reinstalla il codice QR per installare il nuovo prodotto.
La luce rossa dell'endoscopio si accende	Si prega di caricare il prodotto.
Interruzione della connessione WiFi	Verifica l'impostazione di rete, apriti app, connessi a WiFi.
Quando l'iPhone mostra "Impossibile accedere a questo WiFi. Il tuo rete non è configurata correttamente o non è disponibile. Riprova più tardi".	Quando il telefono verifica la situazione di rete, prova a collegarti al prodotto, attendi circa 30 secondi e riconnetti al WiFi per connettersi e utilizzare.
Quando il telefono Android mostra "Il tuo attuale WiFi non può accedere a Internet e ci sono altri reti WiFi che possono essere collegate normalmente, vuoi cambiare?".	Quando il telefono verifica la situazione di rete, prova a collegarti al prodotto, attendi circa 30 secondi e riconnetti al WiFi per connettersi e utilizzare.
L'indicatore di alimentazione del telescopio è rosso	Si prega di utilizzare il cavo di carica corrispondente per caricare.

Parametro del prodotto

nome del prodotto	Frequenza di lavoro
Oscoscopio	2,4GHz
Standard di rete	Risoluzione
IEEE 802.11b/g/n	1080P
Tecnologia di trasmissione dell'immagine	Sensore di gravità
20fps	6 Assi
Temperatura ambiente	Tempo di carica
10-30°C	1,5h
Migliore distanza focale	Tensione di lavoro
1,5-2cm	3,7V-4,2V
Parametro di input	Diametro lente
5V=0,6A	3,5mm

Se le istruzioni operative di cui sopra non risolvono i problemi, contatta il servizio clienti del venditore tramite e-mail o il numero di telefono fornito.

Nettoyeur d'oreilles avec caméra

Manuel de l'utilisateur
ENDURITIFREES

Étapes à suivre au téléphone

Étape 1
Téléchargez l'application "Souleat"
Pour iOS:
Téléchargez et installez l'application "Souleat" depuis l'App Store.
Pour Android:
Téléchargez et installez l'application "Souleat" à partir de Google Play Store.
Facultatif:
Scannez le code QR ci-dessous pour télécharger l'application.



Étape 2
Appuyez longuement sur la touche de commutation pour ouvrir l'appareil, après 5 secondes, puis passez à l'opération suivante.

Étape 3
Ouvrez l'application "Souleat", cliquez sur "Connecter l'appareil", suivez l'invite contextuelle et cliquez pour vous connecter maintenant pour accéder à l'interface de configuration du WiFi mobile.



Étape 4
Trouvez "Souleat-xxxx" sur l'interface de réglage WiFi et cliquez pour vous connecter.



Étape 5
Une fois que le téléphone mobile affiche "Souleat-xxxx", le WiFi est connecté, revenez à l'application et cliquez sur "connecté" pour entrer dans l'appareil.

Après connexion au WiFi du produit, quelques questions vous seront posées:

IOS:
"Souleat" aimerait trouver et se connecter à des appareils sur votre réseau local.
Suggestion: Cliquez sur "Autoriser".

Android:
"Souleat" voudrait trouver des appareils sur votre réseau local et se connecter.
Suggestion: Cliquez sur "WLAN uniquement".

Permettre à "Souleat" d'utiliser les données sans fil?
WLAN et données
WLAN uniquement
Refuser

Android:
Si votre téléphone mobile affiche les invites suivantes, le WiFi n'a pas de connexion de données, voulez-vous continuer à essayer d'utiliser le WiFi? Voulez-vous garder la connexion? Voulez-vous changer de WiFi? Suggestion: Cliquez sur l'option "Garder"/"CONNETTER"/"Refuser".

Le WiFi actuel ne peut pas accéder à Internet et il y a d'autres réseaux WiFi qui peuvent être connectés normalement, voulez-vous basculer?
Changer de réseau
Garder
Non

Ce réseau WiFi n'a pas accès à Internet, souhaitez-vous continuer à utiliser ce réseau?
ANNULLER
SE CONNECTER

"Souleat-xxxx" Pas d'accès Internet, autoriser Souleat WiFi à passer à un meilleur réseau?
Permettre
Récuser

Résolution des problèmes

Problèmes	Suggestions
Impossible de stocker des photos ou des vidéos sur votre téléphone	Permettre à Souleat d'autoriser l'accès aux photos, médias et appareil.
La caméra ne répond pas ou la caméra ne s'allume pas	Veuillez charger l'appareil.
L'application a planté	Veuillez déinstaller l'application et rescaner le code QR pour l'installer.
Le voyant rouge de l'endoscope s'allume	Veuillez charger le produit.
Coupage de la connexion WiFi	Veuillez vérifier l'impostation de réseau, ouvrir l'application, connectez-vous au WiFi.
Quand l'iPhone montre "Impossible d'accéder à ce réseau WiFi. Le réseau n'est pas configuré correctement ou n'est pas disponible. Réessayez plus tard".	Lorsque la situation ci-dessus se produit, veuillez essayer d'utiliser le produit, attendez environ 30 secondes et reconnectez-vous au WiFi pour vous connecter et l'utiliser.
Quand le téléphone Android montre "Le WiFi actuel ne peut pas accéder à Internet et il y a d'autres réseaux WiFi qui peuvent être connectés normalement, voulez-vous basculer?".	Lorsque la situation ci-dessus se produit, veuillez essayer d'utiliser le produit, attendez environ 30 secondes et reconnectez-vous au WiFi pour vous connecter et l'utiliser.
L'indicateur d'alimentation de l'endoscope est rouge	Veuillez utiliser le câble de charge correspondant pour charger.

Paramètre de produit

Nome del prodotto	Frequenza di lavoro
Nettoyeur d'oreilles avec caméra	2,4GHz
Norme réseau	Résolution
IEEE 802.11b/g/n	1080P
Taux de transmission des images	Détecteur de gravité
20fps	6 Axes
Température de l'environnement	Temps de charge
10-30°C	1,5h
Mémoire distance focale	Tension de travail
1,5-2cm	3,7V-4,2V
Paramètre d'entrée	Diamètre de la lentille
5V=0,6A	3,5mm

Si les instructions de fonctionnement ci-dessus ne résolvent pas les problèmes, contactez le service client du vendeur par e-mail, et vous nous fournirons d'autres solutions.

Limpiador de oídos con cámara

Manual de usuario
ENDURITIFREES


Pasos para usar el teléfono

Paso 1
Descarga la aplicación "Souleat"
Para iOS:
Descarga e instala la App "Souleat" desde App Store.
Para Android:
Descarga e instala la App "Souleat" desde Google Play Store.
Opcional:
Escanea el código QR a continuación para descargar la aplicación.




Paso 2
Mantenga presionada la tecla del interruptor para abrir el dispositivo, después de 5 segundos, luego pase a la siguiente operación.

Paso 3
Abra la aplicación "Souleat", haga clic en "Conectar el dispositivo", siga el mensaje emergente y haga clic para conectarse ahora para saltar a la interfaz de configuración de WiFi móvil.

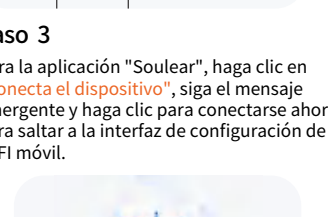

Paso 4
Busque "Souleat-xxxx" en la interfaz de configuración de WiFi y haga clic para conectarse.

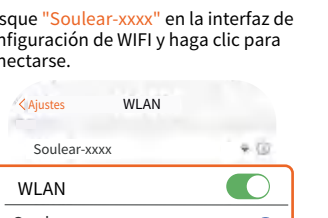

Paso 5
Después de que el teléfono móvil muestre "Souleat-xxxx", el WiFi está conectado, regrese a la aplicación nuevamente y haga clic en "Conectado" para ingresar al dispositivo.

Después de conectarse al WiFi del producto, se le harán algunas preguntas:

IOS:
"Souleat" quisiera encontrar y conectarse a dispositivos en su red local.
Suggerencia: Haga clic en "Permitir".

Android:
"Souleat" quiere buscar dispositivos en tu red local o conectarse ellos.
Suggerencia: Haga clic en "WLAN y datos/Solo WLAN".

¿Permitir que "Souleat" use datos inalámbricos?
Suggerencia: Haga clic en "WLAN y datos/Solo WLAN".

¿Permitir que "Souleat" use datos inalámbricos?
Suggerencia: Haga clic en "WLAN y datos/Solo WLAN".

¿Permitir que "Souleat" use datos inalámbricos?
Suggerencia: Haga clic en "WLAN y datos/Solo WLAN".

¿Permitir que "Souleat" use datos inalámbricos?
Suggerencia: Haga clic en "WLAN y datos/Solo WLAN".

"Souleat-xxxx" Si acceso a Internet, permitir que WiFi cambie a una red mejor?
Permitir
Rechazar

Solución de problemas

Problemas	Sugerencias
No puede almacenar fotos o videos en su teléfono	Deje que Souleat permita la autoridad de fotos, medios y servicios en su dispositivo.
La cámara no responde, la cámara no se enciende	Por favor, cargue el dispositivo.
Aplicación se estroñó	Por favor, cargue el producto y escanee el código QR para instalarlo.
La luz roja del endoscopio está encendida	Por favor, cargue el producto.
Interrupción de la conexión WiFi	Verifique el endoscopio de red, abra la aplicación, conéctese al WiFi.
Cuando el iPhone muestra "No se puede acceder a este WiFi. El network no está configurado correctamente o no está disponible. Intente reconectar más tarde".	Luego de que la situación ci-dessus se produce, intente utilizar el producto, espere unos 30 segundos y reconecte al WiFi para conectarse y usarlo.
Cuando el teléfono Android muestra "El WiFi actual no puede acceder a Internet y hay otros redes WiFi que se pueden conectar normalmente, ¿quieres cambiar?".	Luego de que la situación ci-dessus se produce, intente utilizar el producto, espere unos 30 segundos y reconecte al WiFi para conectarse y usarlo.
El indicador de alimentación del endoscopio muestra rojo	Utilice el cable de carga correspondiente para cargar.

Parametro del producto

numero del producto	Frecuencia de trabajo
Limpiador de oídos con cámara	2,4GHz
Estándar de red	Risolución
IEEE 802.11b/g/n	1080P
Tasa de transmisión de imagen	Sensor de gravedad
20fps	6 Ejes
Temperatura ambiental	Tempo de carga
10-30°C	1,5h
Mayor distancia focal	Tensión de trabajo
1,5-2cm	3,7V-4,2V
Parámetro de entrada	Díametro de la lente
5V=0,6A	3,5mm

Si las instrucciones de funcionamiento anteriores no resuelven los problemas, comuníquese con el servicio de atención al cliente del vendedor por correo electrónico y le brindaremos más soluciones.