

SISTEMA KIM 8 SLIM

CAVITACIÓN+VACÍO+ MULTIPOLAR RF+LÁSER

Manual



Gracias por usar los productos de nuestra empresa de la manera adecuada y prolongada.
uso de nuestro
Productos, recomendamos sinceramente adherirse a lo siguiente:

- Lea atentamente el manual y guárdelo para futuras lecturas y referencias.
- Siga las instrucciones para ensamblar y operar correctamente la máquina.
- No retire ni cambie ningún accesorio de la máquina.
- Prohibir energicamente que personal no autorizado abra y extraiga la unidad central del
Dispositivo.
- El mantenimiento y la reparación del dispositivo deben ser realizados por profesionales capacitados.
- Por favor contáctenos si tiene alguna pregunta durante la operación.

Principio de
funcionamiento 1.

Sistema de ondas de grasa Con nuestro potente cabezal de ondas de sonido colectivo, se emiten potentes ondas de sonido de 40 KHZ, hacen vibrar las células de grasa a máxima velocidad y generan numerosas bolsas de aire al vacío dentro y fuera de las células de grasa. Acción robusta sobre las células grasas para crear una explosión introvertida y disolver los triglicéridos en glicerol y ácidos grasos libres. agotan el glicerol integrado y los ácidos grasos libres a través de la circulación hepatoentérica.
Finalmente, la radiofrecuencia de vacío y el electrodo de energía se utilizan para colocar y tensar la grasa.
En física esto se llama "cavitación". La explosión introvertida de microporos dentro y fuera de la célula conduciría a un mayor movimiento molecular y un mayor nivel de energía. Esto finalmente hará que las células grasas estallen, logrando así los efectos de pérdida de peso y construcción del cuerpo.

2. ¿Cuáles son las ventajas de la lipoláser?

Adopta la última innovación en lipólisis láser no invasiva y no quirúrgica. Lipo-Laser emite energía láser baja que crea una señal química en las células grasas que convierte los triglicéridos almacenados en ácidos grasos libres, glicerol y moléculas de agua. Esto es similar a la respuesta natural del cuerpo cuando necesita usar sus reservas de energía almacenadas.

Estos ácidos grasos libres son luego transportados a través del cuerpo por el sistema linfático para proporcionar energía al cuerpo. Nuevamente, la forma en que el cuerpo reaccionaría durante los períodos de alta escasez de calorías.

Un período de ejercicio después del tratamiento permitiría el metabolismo completo de estos ácidos grasos libres. Reducir las células grasas y lograr la forma del cuerpo son el resultado de la búsqueda de nuestros pacientes. El tratamiento con láser es un método no destructivo destinado a la reducción de grasa específica, lo que significa que los depósitos de grasa en exceso se pueden tratar en cualquier parte del cuerpo y las células grasas no se destruyen con el tratamiento. La pérdida de grasa dirigida y la reducción de la circunferencia tienen muchas ventajas sobre otras tecnologías de modelado corporal.

¡Aquí hay algunos!

Beneficios 1. Procedimiento seguro y mínimamente invasivo: utiliza un nivel bajo de luz láser roja visible para brindar una estimulación segura e indolora similar a la reacción química natural en nuestro cuerpo para liberar las reservas de energía almacenadas en la grasa para reponerlas. Es seguro, efectivo y muestra resultados instantáneos.

2. Fácil de usar, los tratamientos son pasivos y solo requieren la colocación adecuada de las almohadillas de tratamiento. No afectará el tiempo ni la productividad del personal del consultorio, y no afectará el estilo de vida ni el trabajo después del tratamiento. Tiene un tiempo de curación rápido.


3 . Trate todo tipo de piel y partes del cuerpo como cuello, pecho, espalda, rodillas, caderas, muslos, fondos y brazos

4. Acelerar la coagulación de los tejidos para evitar la relajación muscular después de perder peso.

5. Sin sangrado, sin dolor, sin efectos secundarios.

6. Económica y rápida amortización de su inversión.

Elija el tratamiento apropiado e instale el mango apropiado para llegar a la interfaz de operación

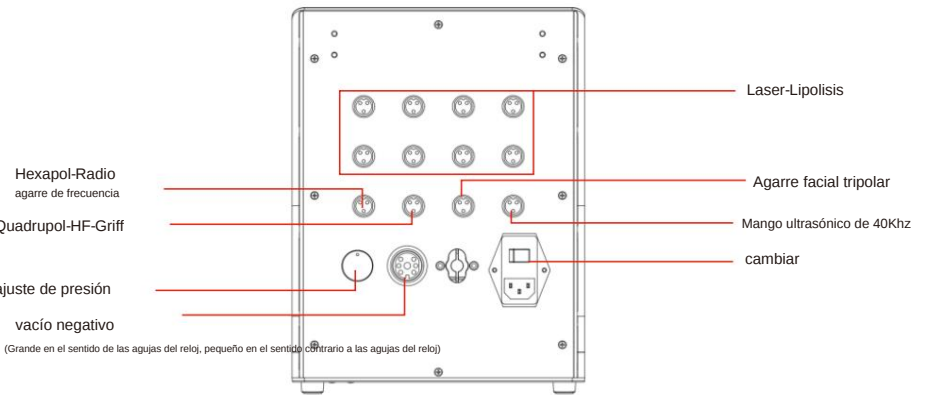

Paquete que incluye:

Agarre facial tripolar * 1

Quadrupol-HF-Griff *1

Mango de radiofrecuencia Hexapole * 1

Mango ultrasónico de 40Khz * 1

Mango RF bipolar de vacío * 1

Soporte * 3

Láser-Lipolisis *8

Cable de alimentación * 1

cinturón * 2

. Esquema del funcionamiento del cabezal de trabajo de RF tripolar facial.

1. Masajee el centro de la mandíbula inferior con un movimiento circular para crear calor profundo.

2. Masajee la mandíbula inferior de forma lineal.

3. Masajee la zona triangular de ambos lados de la cara con un movimiento circular.

4. Masajee en línea desde la mandíbula hasta el ángulo de la boca hasta la oreja.



FALTA DE APTITUD

1. Mujeres embarazadas o mujeres durante la menstruación.
2. Epilépticos
3. Pacientes con malignidad.
4. Paciente cuya herida no ha cicatrizado después de la operación.
5. Pacientes con inflamación aguda o epidémica.
6. Personas con enfermedades del corazón o marcapasos.
7. Aquellos con enfermedad renal (cálculos biliares).
8. Aquellos con objeto de metal incrustado o gel de sílice.
9. Personas en menstruación, en control de la natalidad, con incontinencia de emisión o sometidas a cirugía abdominal.
10. Personas con hipersensibilidad genética.

NOTA

1. Asegúrese de utilizar el gel ultrasónico especial.
2. Manipule las cabezas con cuidado, evite golpes.
3. Use y prepare suficiente gel para evitar el sobrecalentamiento de las cabezas.
4. No se detenga en una sola región por mucho tiempo y evite los huesos.
5. No use desinfectantes para desinfectar las cabezas, use algodón húmedo o una toalla seca en su lugar.
6. Asegúrese de que el adaptador de corriente esté conectado y colocado correctamente.
7. Si no va a utilizar el dispositivo durante mucho tiempo, apáguelo y desconecte el cable de alimentación.
8. Los operadores y pacientes no deben usar joyas u objetos de metal.
9. La máquina debe descansar unos 10 minutos cada hora de funcionamiento continuo.
10. No acepte otros tratamientos durante la operación.

Mango ultrasónico 1.40Khz (cavitación)

Cabeza gorda de explosión de onda de sonido fuerte: con la cabeza de onda de sonido fuerte colectiva, se puede emitir una onda de sonido fuerte de 40 KHZ al cuerpo humano para afectar las células de grasa violentamente, causando un movimiento de fricción entre las células de grasa. Esto puede conducir a una absorción efectiva de calorías y humedad en las células grasas y reducir el tamaño de las células grasas. Además, la vibración de la onda de sonido puede impactar violentamente las células grasas para hacerlas explotar instantáneamente, reducir la cantidad de células grasas y lograr así los efectos de la eliminación de grasa.


Hay 4 modos de A, B, C y D, que se describen a continuación: "A" funciona continuamente durante 3 segundos e intermitentemente durante 3 segundos.

"B" funciona continuamente durante 2 segundos e intermitentemente durante 2 segundos.

"C" funciona continuamente durante 1 segundo e intermitentemente durante 1 segundo.

"D" significa trabajar continuamente durante 0,5 segundos e intermitentemente durante 0,5 segundos.

Opere con el cabezal de cavitación de 40 KHZ durante 15 a 20 minutos principalmente con el movimiento en espiral en el cuerpo. Seleccione el modo de operación seleccionando "-" "+".

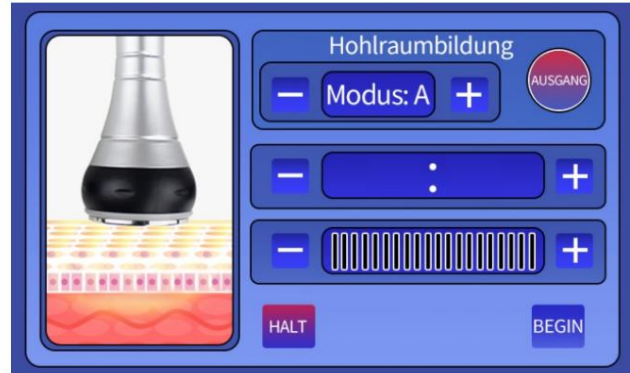

Pulse "-" "+" para configurar el tiempo de funcionamiento.

Debajo de la selección de duración está la selección de intensidad.

Haga clic en "-" para disminuir la fuerza o "+" para aumentarla.

Presiona "START" para iniciar la potente cabeza gorda de explosión de ondas de sonido.

Método: Utilizar la sonda para masajear la zona de la piel a tratar con movimientos circulares, después de aplicar la crema reductora durante unos 15 a 20 minutos. Podría revitalizar la circulación sanguínea del área de la piel tratada y tiene efectos reductores de grasa.

Asuntos que requieren atención:

1. Antes del tratamiento, aplicar una crema reductora o un gel refrescante en la zona de la piel a tratar.
2. Mantenga un estrecho contacto entre la sonda y la piel.
3. Ajuste la intensidad de menor a mayor.
4. Al usar, preste atención a la temperatura del mango de cavitación y deje de usar

úsalo durante diez minutos después de media hora.


Funciones del dispositivo y principios de tratamiento

2. Mango de RF bipolar de vacío (RF de vacío y bipolar)

Disuelva la grasa, mejore el drenaje linfático, apriete la piel y mejore la elasticidad de la piel.

Tiene una atracción anti-geocéntrica para la piel. Atrae y extiende los tejidos conectivos fibrilares de varias cortezas a través del masaje rítmico y descompone eficazmente la grasa subcutánea y reduce la acumulación de grasa en el tejido celular. Aunado al uso de la metodología patentada de masaje profundo con el rodillo sobre diferentes partes del cuerpo para aumentar la capa de grasa en dermis curio y subcutánea. Libera libremente vasos linfáticos microvasculares mientras promueve el metabolismo y convierte las células grasas en ácidos grasos en un movimiento pasivo. Las toxinas en las células también se eliminan del sistema linfático. La desintoxicación in vitro mejora la función hasta cuatro veces. La piel se vuelve más elástica y brillante. El perfecto experto en "manejo de esculturas corporales saludables".

Ajuste de succión Ajuste de relajación

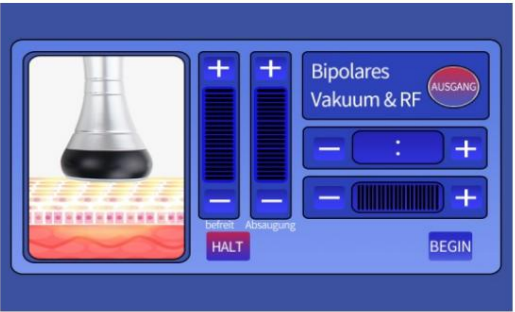

Selección de duración

Selección del nivel de energía

Panel de control: Pulse "CANAL RF" en la pantalla para seleccionar la salida RF de vacío bipolar.


Seleccione la intensidad adecuada (ajuste de acuerdo con el nivel aceptable del cliente, se recomienda 3-6) y presione el botón "INICIO" para iniciar la operación.

Método: Use la sonda para masajear el área específica de la piel con un movimiento circular después de aplicar la crema reductora, déjela actuar durante unos 30 a 40 minutos. Esto aceleraría la circulación sanguínea en la zona de la piel a tratar y tiene un efecto reductor de grasa.


Nota:

1. Antes del tratamiento, aplique una crema reductora o un gel refrescante en el área de la piel a tratar.
2. Mantenga un estrecho contacto entre la sonda y la piel.
3. Ajuste la intensidad de menor a mayor.
4. Trabaje con el cabezal de vacío bipolar en el cuerpo durante 15-20 minutos con un movimiento principalmente en espiral.
5. Después de completar el proceso, limpie el aceite del interior con alcohol/toallas de papel

Instrucciones de funcionamiento 1. Diagrama esquemático del funcionamiento del cabezal de trabajo de explosión de cavitación de 40K Masajee la grasa del muslo en círculos

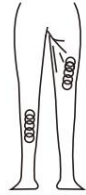

2. Dibujo esquemático del cabezal láser Sextupole RF para el cuidado de la cintura y el abdomen (25 minutos, 2-3 días/hora)

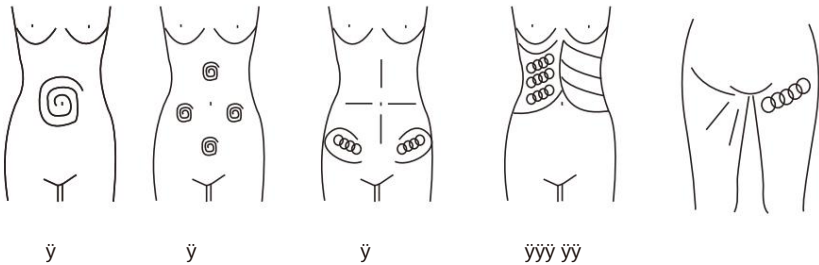

- . Masajear en el ombligo como centro y poco a poco ampliando la zona
- . Masajee el nido del pecho, ambos lados del abdomen anterior y debajo del ombligo (en forma de diamante) de adentro hacia afuera en un círculo.
- . Se concentra en la grasa de las 4 direcciones del ombligo como centro
- . Masajee con movimientos circulares desde la costilla interior hasta el borde exterior.
- ÿ.Masaje en círculo desde el final de la pelvis hasta la ingle.
- . Masajee de un lado a otro en línea recta desde la costilla interior hasta el borde exterior.
- . Levante la cadera y el cuidado de la parte inferior del cuerpo (30 minutos, 2-3 días/tiempo) use una sonda de 50 mm
- . Concentrado desde la cintura hasta la ingle en círculos o líneas rectas. Repita el masaje desde el interior hacia el borde exterior. Reciclar el movimiento.

3. Esquema del funcionamiento del cabezal de trabajo de RF tripolar facial.

1. Masajee el centro de la mandíbula inferior en círculos para crear calor profundo.
2. Masajee la mandíbula inferior de forma lineal.
3. Masajee la zona triangular de ambos lados de la cara con un movimiento circular.
4. Masajee en líneas desde la mandíbula hasta el ángulo de la boca hasta la oreja.
5. Masajee en línea desde la mandíbula hasta el ángulo de la boca hasta la oreja.

6.Láser-lipólisis

El lipoláser de diodo emite una energía láser baja que crea una señal química en la grasa descompone y libera los triglicéridos almacenados en ácidos grasos libres y glicerol a través de canales en las membranas celulares. A continuación, los ácidos grasos y el glicerol se transportan alrededor del cuerpo sobre las cuestiones que utilizan durante el metabolismo para crear energía.


Este proceso de liberación de ácidos grasos es una respuesta natural del cuerpo cuando el cuerpo lo toma ^{necesidades}

utilizar las reservas de energía almacenadas para que no ocurran reacciones antinaturales en el cuerpo Tampoco causa daño a las estructuras circundantes, como la piel, los vasos sanguíneos y nervios periféricos. Una fase de actividad física después del tratamiento asegura el metabolismo completo

y así eliminar los ácidos grasos liberados del cuerpo

Este sistema de lipoláser de 5 mw puede absorber la luz para penetrar en las capas profundas de la piel y estimularla.

Metabolismo para un tratamiento adelgazante eficaz. Ate la cinta de la placa láser al lugar que necesita el tratamiento y use el láser durante 20 minutos.

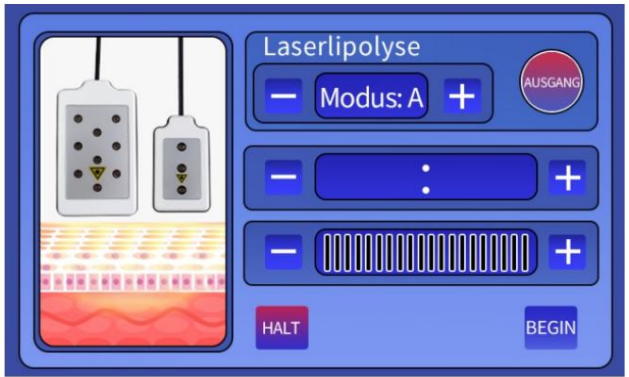


Precauciones de funcionamiento

1. No irradie el globo ocular con luz de color directamente

3. Augengriff tripolar (RF tripolar)

Mejora el rejuvenecimiento mediante el uso de microcorrientes positivas y negativas, que activan la energía para liberar las células de la piel, lo que permite una rápida síntesis de colágeno de fibroblastos y elasticidad de la piel. Se estimula y aumenta la tensión muscular, se eliminan gradualmente las arrugas y se previene la piel.

Envejecimiento, restaurando la elasticidad de la piel.

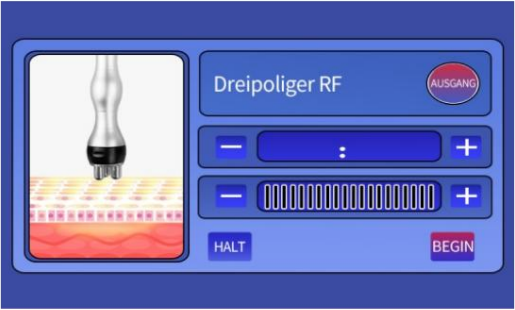

Presione "-" "+" para ajustar el tiempo, haga clic en "+" para aumentar la intensidad de la FC, "-" para disminuir la FC
Intensidad. Elija la intensidad adecuada (ajuste de acuerdo con el nivel aceptable del cliente,

3-6) se recomienda) y presione el botón "TRABAJAR" para comenzar.

Extender gel o esencia antiarrugas en las zonas tratadas

(generalmente 20-30G por uso),

Trabaje con el cabezal de RF facial durante 15-20 minutos, principalmente haciendo movimientos en espiral en la cara y alrededor de los ojos.

Precauciones de funcionamiento


1. No irradie el globo ocular directamente con luz de color.
2. No deje el electrodo HF en su lugar, manténgalo en constante movimiento lento.
3. La piel alrededor de los ojos y la frente es muy sensible, la intensidad de salida de RF debe ser se mantienen en tales áreas relativamente bajas.

4. Mango RF de cuerpo sextupolar (cuerpo RF)

Al integrarse con la tecnología de radiofrecuencia más avanzada, el instrumento puede alcanzar directamente la capa de grasa profunda con la capacidad de posicionamiento incisivo de la radiofrecuencia. En el estado de actividad rápida, el tejido adiposo puede generar calor por fricción, aumentar la temperatura local y el exceso de tejido elimina la grasa y las toxinas del cuerpo a través de las glándulas sudoríparas, la circulación enterohepática y la linfa.

Finalmente logra el efecto de disolver la grasa. Con tecnología de profundidad controlada, ajuste la potencia de succión mediante succión al vacío y contacto con una fuerte fuerza de presión negativa para explotar directamente la grasa gruesa.

Los efectos son muy obvios: promueven la circulación sanguínea, aceleran la pérdida de grasa, eliminan los desechos, mejoran el efecto de la eliminación de la celulitis, mejoran efectivamente la condición del tejido areolar, eliminan la grasa persistente y mejoran la capacidad de absorber los alimentos adecuadamente.

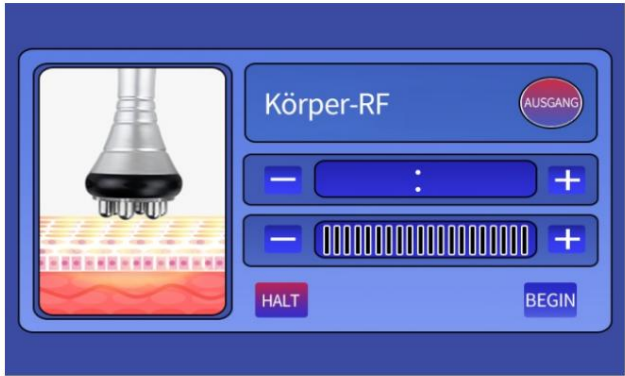

Presione "-" "+" para establecer la duración y haga clic en "+" para aumentar la intensidad de RF o "-" para disminuir la intensidad de RF. Presione "START" para iniciar la operación del cabezal RF de vacío de presión negativa. Aplique gel al cabezal RF de vacío de presión negativa, apunte al área para perder peso y opere con la técnica de tracción (áreas grasas en la posición para adelgazar, estire la posición donde está más cerca de la glándula linfática) durante aproximadamente 20 minutos.

Notas: 1.

Extienda el gel o la esencia uniformemente sobre el área tratada.

2. Comience con poca energía. Recomendamos probar el nivel de energía adecuado para la espalda del cliente

antes de la aplicación a las zonas a tratar.

3. No use aceite esencial como medio.

4. En funcionamiento, solo comience a tirar después de que el cabezal de succión esté adherido a la piel.

5. No irradie el globo ocular directamente con luz de color.

5. Manija RF cuadrupolo - (Cara RF)

Se utiliza un electrodo de acoplamiento capacitivo para transmitir energía de ondas de radio y crear un campo eléctrico para penetrar el tejido subcutáneo a través de la superficie de la piel. En alta frecuencia, también se cambian las direcciones de las partículas eléctricas de la piel.

En este momento, la resistencia eléctrica natural del tejido subcutáneo se mueve y genera energía térmica. Porque el colágeno de la dermis papilar puede contraerse inmediatamente cuando la temperatura está en el rango de 45 a 55 grados centígrados. Después del tratamiento antiarrugas, el cliente puede sentir inmediatamente el efecto tensor de la piel mientras se levanta y aprieta.

Cuando el colágeno se produce continuamente, el grosor y la densidad de la dermis papilar de la piel se pueden aumentar para eliminar las arrugas, eliminar las cicatrices, restaurar la elasticidad y el brillo de la piel, y hacerla rubia y suave.

A medida que aumenta el colágeno, se crea piel fresca en la posición de tratamiento y las arrugas se eliminan en masa. Además, si se separa la corteza sin elasticidad o con una gruesa capa córnea en la zona con arrugas, la piel circundante también se renueva.



Pulse "-" "+" para establecer la duración. Haga clic en "+" para aumentar la intensidad de RF o "-" para disminuir la intensidad de RF, seleccione la intensidad adecuada (de acuerdo con el nivel aceptable del cliente, se recomienda 3-6) y finalmente presione el botón "INICIO" para comenzar.

Método: Utilice la sonda para masajear la zona de la piel a tratar con un movimiento circular después de aplicar la crema adelgazante durante unos 15 a 20 minutos. Podría revitalizar la circulación sanguínea del área de la piel tratada y tiene efectos reductores de grasa.

Asuntos que requieren atención: 1. Antes del tratamiento, aplique una crema reductora o un gel refrescante en el área de la piel a tratar.

2. Mantenga un estrecho contacto entre la sonda y la piel.

3. Ajuste la intensidad de menor a mayor.

4. No irradie el globo ocular directamente con luz de color.

5. Trabaje con el cabezal RF facial durante 15-20 minutos, principalmente con movimiento en espiral en la cara.