




Wearable Breast Pump **S21(2 Pump)**

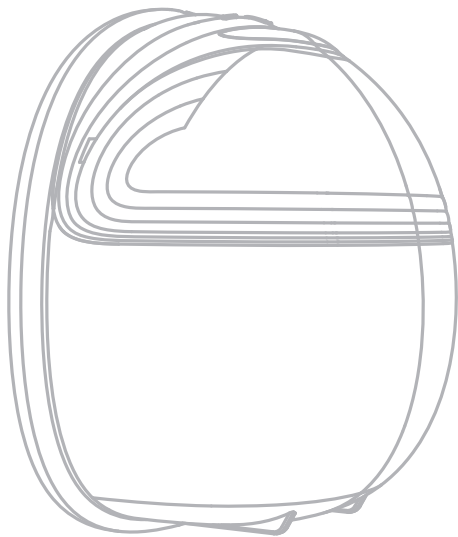

Read this user manual carefully before using your electric breast pump, and save the user manual for future reference.

Table of Contents

English	1-11
German	12-22
French	23-33
Italian	34-44
Spanish	45-55


THE USER MANUAL IN ENGLISH

Parts list


- ① 27mm wearable breast pump x2
- ② 0.94inch/24mm flange insert x2
- ③ Bra adjustment strap x2
- ④ Type-c cable x2
- ⑤ Small brush x2
- ⑥ Storage bag x2
- ⑦ User manual x1
- ⑧ Breastfeeding manual x1

Wearable breast pump:


27mm Silicone breast shields

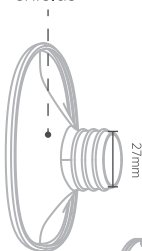

Pump motor

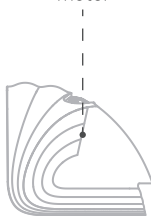

Silicone diaphragm

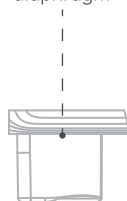

Milk collector
+ Linker



Duckbill
valve

Assembling


- ① Put the silicone diaphragm into the milk collector, and press it with your hands to make the edges fasten tightly to ensure a perfect seal.




- ② Put the silicone shield into the breast milk collector and press it with your hands to make the edges tightly fastened. Make sure to install it in the correct direction.



- ③ Install the pump motor on the breast milk collector to ensure that it fits perfectly with the breast milk collector.

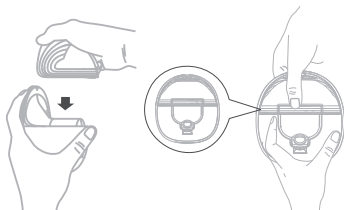

- ④ Connect the type-c charging cable to charge the battery.

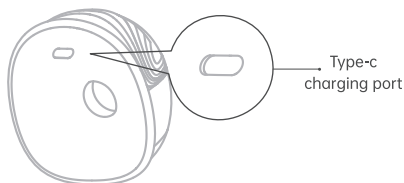


⚠ Note:

- 1.This product has a built-in li-Ion battery. When the battery indicator lights red, we recommend that you use a certified 5V==1A adapter to charge the pump motor as soon as possible.
- 2.The power adapter is a common standard accessory on the market. This product is not provided and can be purchased separately if necessary. Power adapter specifications: 5V==1A.
- 3.The duration of pumping should be no more than 20 minutes.
- 4.Check all parts for malfunction or damage. Parts may need to be replaced in time.

Cleaning and sterilizing

- 1.For the first time and before each use, you must disassemble, wash and sterilize all the breast pump parts that come into contact with breast milk.
- 2.After use, please immediately disassemble and clean all parts in contact with breasts and breast milk (membrane, milk bottle,duckbill valve, shield) to avoid breast milk residue or bacterial growth; It is recommended to use drinking water or detergent for cleaning (water temperature should not exceed 100°C, exceeding it will damage the part sand lead to deformation of the parts).

Control panel

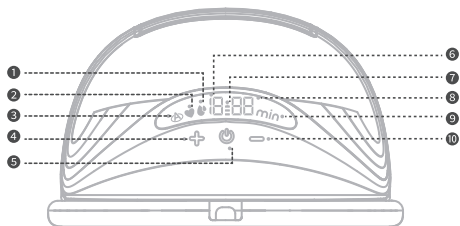


- | | |
|--|--------------------------|
| ① Expression Mode | ⑥ Strength Display |
| ② Stimulation Mode | ⑦ Battery Display |
| ③ Auto Mode | ⑧ Time-Consuming Display |
| ④ Increase Power | ⑨ Time/Minute |
| ⑤ Power Button/
Mode Selection Button | ⑩ Reduce Power |

⚠ Operation cautions


1. These components do not come into your breast milk. You can wipe those parts clean with a soft cloth.
2. Take care when cleaning the valve and the silicone diaphragm. If it gets damaged, your breast pump will not function properly.
3. To clean the valve, rub it gently between your fingers in warm soapy water. Do not insert objects as this may cause damage.

Display description:


- ① Press the silicone funnel firmly against the breast, leave no gaps and make sure your nipples are centered. Keep it upright. Be careful not to distort the position of the product and the chest, otherwise, the breast pump will not have suction.

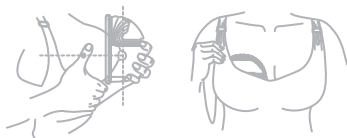


- ② Lightly press the power button to start the breast pump, and the screen display will light up.

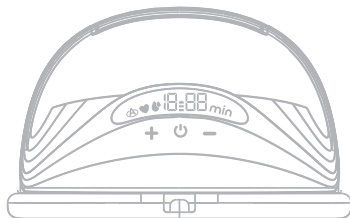


- ③ Short press the "⏻" power button to switch to the Stimulation Mode "♥". There are 12 levels in this mode. You can press the "+" and "-" button to select the suction power that makes you comfortable.

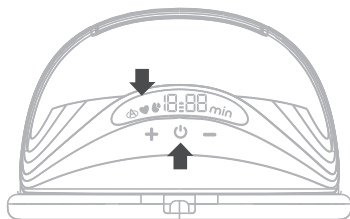


- ④ Short press the "⏻" power button to switch the Expression Mode "♣". There are 12 levels in this mode. You can press the "+" and "-" buttons to select the suction power that makes you comfortable.

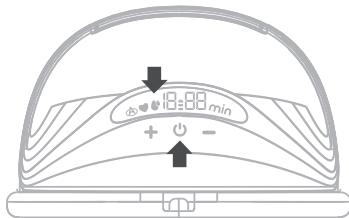

- ⑤ Short press the power button "⏻" to switch to the Auto Mode "👤". There are 12 levels in this mode. Levels 1-6 are Stimulation Mode "❤️", and levels 7-12 are Expression Mode "❤️👤". The range of automatic upshift is 1-9 levels and, the interval between up shifts is 20 seconds. 10-12 levels need to be adjusted manually. During the up shifting process, you can select the suction power that makes you comfortable by pressing the "+" and "-" buttons.

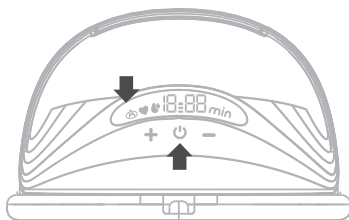

- ⑥ Long press the power button "⏻" to turn off the breast pump.

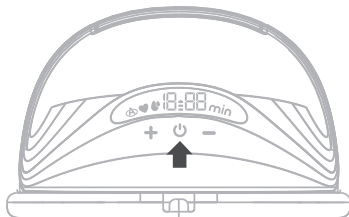

- ⑦ After pumping, press the power button to turn off the breast pump, lean forward slightly, and then carefully remove the breast pump from the breast. If there is a small amount of breast milk remaining at the silicone shield, you can tilt the breast pump slightly to pour the remaining breast milk from the silicone shield.



Tips:

1. This model has a built-in memory function, when you turn on the machine again, the machine automatically enters and up shifts to the working mode and suction level you used last time.
2. The breast pump will automatically stop after 30 minutes of work.
3. When you wear the breast pump, relax and sit in a comfortable chair, leaning forward slightly (use the cushion to support your back). In this way, the silicone shield of the breast pump can be slightly inclined upward, which facilitates the flow of breast milk into the milk collector and reduces the residual breast milk in the silicone shield.

Instructions for duckbill valve installation

Insert the raised part of the duckbill valve into the round hole at the bottom of the suction bowl groove of the bra.



Picture 1




Picture 2



Duckbill valve


Instructions for bra adjusting buckle


Adjusting the length of bra straps, makes pumping more comfortable. One end of the bra adjustment buckle hung on the inside buckle of nursing bra. Adjust the length of the bra buckle according to your preference.

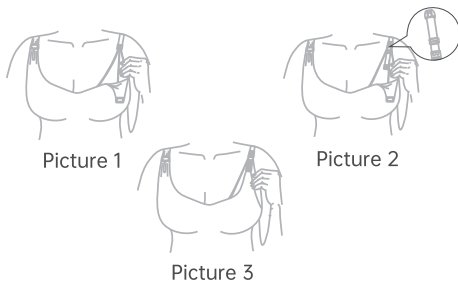

Instructions for pouring milk

After you finish pumping, please remove the breast pump from the breast. Keep the breast pump upright and remove the motor part, hold the milk collector to pour the breast milk into a bottle, and make sure the milk collector gap of the breast cup is aligned with the mouth of the bottle to prevent breast milk spilled.

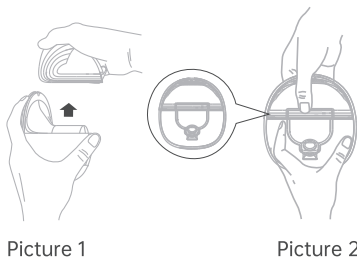

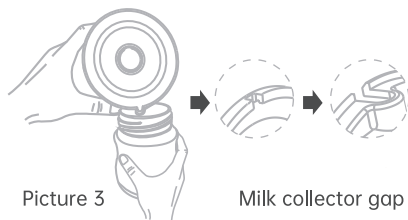

Picture 3

Milk collector gap

Storing your breast milk

• Breast milk storage

1. Only store breast milk collected from sterilized breast pumps.
2. The sucked milk should be placed in a clean and sterilized milk storage bag or a milk bottle with a seal, and immediately placed in the refrigerator to refrigerate or freeze.

• Breast milk cold storage

1. Do not refreeze breast milk twice.
2. Do not mix fresh breast milk with frozen breast milk.
3. Be sure to throw away any remaining breast milk after feeding.
4. The pumped milk can be refrigerated in the refrigerator for 48 hours, or frozen in the freezer for 3 months (Do not store breast milk in the door of the refrigerator or freezer). The milk bottle or milk storage bag can be affixed with a label clearly marking the milking date and time.

• Thawing breast milk

Place the frozen breast milk in the refrigerator overnight to thaw. If you're in a hurry, the fastest way to defrost breast milk is to put it in a bowl of warm water. The thawed breast milk must be consumed within 24 hours.

• Heating breast milk

1. Place the baby bottle with breast milk upright in a bowl of warm water or in a food heater to warm breast milk safely and quickly.
2. Keep in mind! Before feeding your baby, be sure to check the temperature of breast milk.

3. Do not use a microwave oven to heat breast milk as this may destroy important nutrients and antibodies.
4. Uneven heating may lead to partial overheating of the milk and cause burns.
5. Do not heat the baby bottle with breast milk in boiling water to avoid rupturing or cracking.

FAQ:

Q: Why does the breast pump leak milk?

A: Possible reason 1: You may be in an incorrect milking position.

Solution: Please choose the most comfortable seated position for milking.

Possible reason 2: The parts of the pump were not disassembled during cleaning, resulting in the deformation of the product.

Solution: Please disassemble all parts while cleaning the breast pump. If the parts are deformed during use, please replace the accessories timely.

Possible reason 3: The duckbill valve and milk collector are in poor condition. If they are damaged or aged, the milk cannot go down into the bottle and will run out of the bra's place.

Solution: Please check if the product is in good condition before using it, and replace it with new accessories in time.

Q: Why does the breast pump suck little breast milk?

A: The design principle of the breast pump is to imitate the action of the baby sucks, stimulating the breast to secrete milk, and achieve the purpose of expressing breast milk; If you feel that the effect of the breast pump is not obvious and hope to pump more breast milk, you can place warm, wet washcloths on your breasts for 3 minutes in advance to activate your chest, and then use the automatic gear or massage gear for 3 minutes, and then slowly adjust the gear to find out the appropriate frequency for yourself.

Q: Can a breast pump with a lithium battery be taken on a plane?

A: Yes, although our breast pump has a built-in lithium battery, the capacity of it meets the flight safety requirements.

Q: Why does the breast pump have a plastic smell?

A: Please don't worry, it's normal for the product to have a slight smell. Our breast pumps are made of environmental-friendly BPA-free PP and silicone materials. We recommend that you open the bag and box and put them aside for a day after receiving the goods. If you need it urgently, we suggest you wash it with white vinegar or baking soda, and there will be no odor.

Q: What should mothers pay attention to while breastfeeding?

A: 1.Before using the breast pump, we recommend that you use a hot towel for about 3 minutes to encourage the breasts to open up and produce milk so that the pumping speed will be faster.

2.When you use the breast pump, the gear of it should not be too large, you just need to adjust to the gear you feel comfortable with. It is recommended that mothers fully open the breasts with a massage or automatic block, and then increase the suction.

3.Generally speaking, one breast can be pumped within 8 minutes, we recommend that the maximum use time should not exceed 20 minutes.

Q: Why do I feel the suction of my breast pump is too low?

A: Please check whether all parts are installed correctly and whether the breast pump is adjusted to the appropriate gear.

Product parameters

Model	S21
Product name	Wearable Breast Pump
Material	Food Grade Silicone, ABS
Product size	7.08*5.70*3.14inch/180*145*80mm
Adapter Output	5V/1A
Lithium Battery Voltage	3.7V
Battery Capacity	1000 mAh, 1.85Wh
Duration	30 Minutes

After-Sales Service

If you reach us for any product problem, damaged product or product defects, we are responsible for our Wearable Breast Pumps.

 support@mommed.com


 www.mommed.com

Liste der Einzelteile


- ① 27mm Tragbare Milchpumpe x2
- ② BH-Anpassungsriemen x2
- ③ 24mm Flanscheinsatz x2
- ④ Kleine Bürste x2
- ⑤ Aufbewahrungstasche x2
- ⑥ Typ-C-Kabel x2
- ⑦ Benutzerhandbuch x1
- ⑧ Stillhandbuch x1

Produktstruktur


Brustschutz aus Silikon

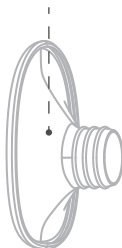

Milchpumpenmotor

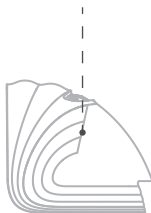

Silikonmembran

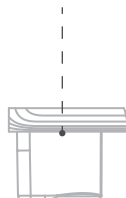

Milchsammler



Entenschnabelventil

Wie Man Zusammenbaut


- ① Legen Sie die Silikonmembran in den Muttermilchsammler und drücken Sie mit den Händen darauf, damit die Ränder fest anliegen und eine perfekte Abdichtung gewährleistet ist.




- ② Legen Sie das Silikonschild in den Muttermilchsammler und drücken Sie es mit Ihren Händen, um die Kanten fest zu befestigen. Stellen Sie sicher, dass Sie es in der richtigen Richtung installieren.



- ③ Installieren Sie den Pumpenmotor am Muttermilchsammler, um sicherzustellen, dass er perfekt zum Muttermilchsammler passt.

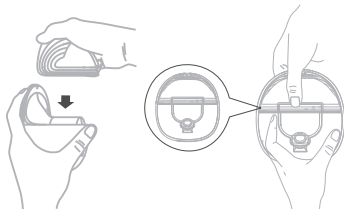

- ④ Schließen Sie das Typ-C-Ladekabel an, um die Milchpumpen aufzuladen.

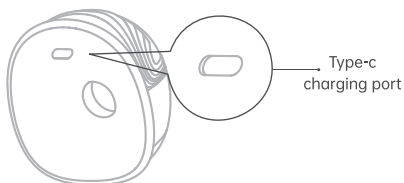


⚠ Notiz:

1. Dieses Produkt hat einen eingebauten Lithium-Ionen-Akku. Wenn die Batterieanzeige rot leuchtet, empfehlen wir die Verwendung eines zertifizierten 5V==1A Adapters, um den Motor der Milchpumpe so schnell wie möglich aufzuladen.
2. Das Netzteil ist ein alltägliches Standardzubehör auf dem Markt. Dieses Produkt ist nicht im Lieferumfang enthalten und kann bei Bedarf separat erworben werden. Spezifikationen des Netzteils 5V==1A.
3. Die Dauer des Pumpens sollte nicht mehr als 20 Minuten betragen.
4. Prüfen Sie alle Teile auf Fehlfunktion oder Beschädigung. Einige Teile müssen möglicherweise rechtzeitig ersetzt werden.

Reinigen und Sterilisieren

1. Beim ersten Mal und vor jedem Gebrauch müssen Sie alle Milchpumpenteile, die mit Muttermilch in Kontakt kommen, zerlegen, waschen und sterilisieren.
2. Zerlegen und reinigen Sie nach dem Gebrauch bitte sofort alle Teile, die mit Brüsten und Muttermilch in Kontakt kommen (Silikonmembran, Milchsammler, Entenschnabelventil, Silikon-Brusthauben), um Muttermilchrückstände oder Bakterienwachstum zu vermeiden. Es wird empfohlen, zur Reinigung Trinkwasser oder Reinigungsmittel zu verwenden (die Wassertemperatur sollte 100 °C nicht überschreiten, da eine Überschreitung das Teil beschädigt und zu einer Verformung der Teile führt).

Panel-Einführung

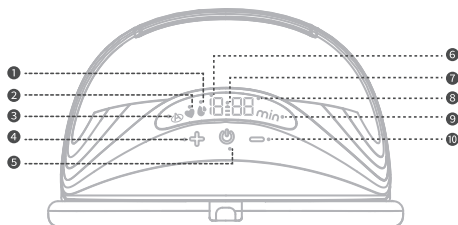


- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| ① Expressions Modus | ⑥ Stärkeanzeige |
| ② Stimulations Modus | ⑦ Batterieanzeige |
| ③ Auto Modus | ⑧ Zeitraubende Anzeige |
| ④ Erhöhen Sie die Leistung | ⑨ Zeit/Minute |
| ⑤ Einschalttaste/Modusauswahl-taste | ⑩ Leistung reduzieren |

⚠ Betriebshinweise


1. Der Motor der Milchpumpe gelangt nicht in Ihre Muttermilch. Sie können diesen Teil mit einem weichen Tuch abwischen.
2. Gehen Sie beim Reinigen des Entenschnabelventils und der Silikonmembran vorsichtig vor. Wenn sie beschädigt wird, funktioniert Ihre Milchpumpe nicht richtig.
3. Um das Entenschnabelventil zu reinigen, reiben Sie es sanft zwischen Ihren Fingern in warmem Seifenwasser. Führen Sie keine Gegenstände ein, da dies zu Beschädigungen führen kann.

Taste Einführung


- ① Drücken Sie die Silikon-Brusthauben fest gegen die Brust, lassen Sie keine Lücken und achten Sie darauf, dass Ihre Brustwarzen zentriert sind. Achten Sie darauf, die Position des Produkts und der Brust nicht zu verzerren, da die Milchpumpe sonst nicht ansaugt.

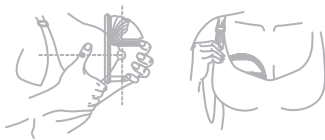


- ② Drücken Sie leicht auf die Ein/Aus-Taste "  ", um die Milchpumpe zu starten, und die Bildschirmanzeige leuchtet auf.

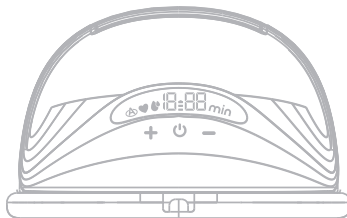


- ③ Drücken Sie kurz die Ein/Aus-Taste "  ", um in den Stimations-Modus zu wechseln "  ". In diesem Modus gibt es 12 Stufen. Sie können die Tasten " + " und " - " drücken, um die Saugleistung auszuwählen, die Ihnen angenehm ist.

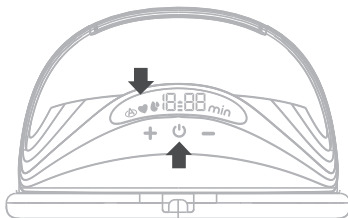


- ④ Drücken Sie kurz die Ein/Aus-Taste "  ", um den Expression-Modus umzuschalten "  ". Es gibt 12 Stufen in diesem Modus. Sie können die Tasten " + " und " - " drücken, um die Saugleistung auszuwählen, die Ihnen angenehm ist.

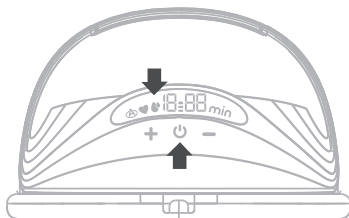

- ⑤ Drücken Sie kurz die Ein/Aus-Taste "  ", um in den Auto-Modus "  " zu wechseln. Es gibt 12 Stufen in diesem Modus. Die Stufen 1–6 sind der Stimulations-Modus "  " und die Stufen 7–12 der Expressions-Modus "  ". Der Bereich der automatischen Hochschaltstufen beträgt 1–9 Stufen und das Intervall zwischen den Hochschaltvorgängen beträgt 20 Sekunden. 10–12 Stufen müssen manuell angepasst werden. Während des Hochschaltvorgangs können Sie durch Drücken der "  " und "  " Tasten die für Sie angenehme Saugleistung wählen.

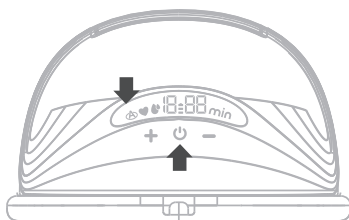

- ⑥ Drücken Sie lange auf die Ein/Aus-Taste "  ", um die Milchpumpe auszuschalten.

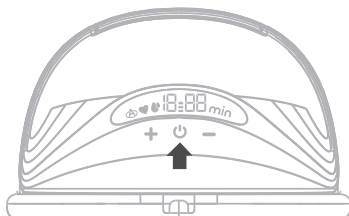

- ⑦ Drücken Sie nach dem Abpumpen den Netzschalter, um die Milchpumpe auszuschalten, lehnen Sie sich leicht nach vorne und entfernen Sie die Milchpumpe dann vorsichtig von der Brust. Wenn eine kleine Menge Muttermilch am Silikonschild verbleibt, können Sie die Milchpumpe leicht kippen, um die restliche Muttermilch aus dem Silikonschild zu gießen.



Tipps:

1. Diese Milchpumpe verfügt über eine integrierte Speicherfunktion. Wenn Sie die Maschine wieder einschalten, wechselt die Maschine automatisch in den Arbeitsmodus und die Saugstufe, die Sie zuletzt verwendet haben.
2. Die Milchpumpe stoppt automatisch nach 30 Minuten Arbeit.
3. Wenn Sie die Milchpumpe tragen, entspannen Sie sich und setzen Sie sich auf einen bequemen Stuhl, lehnen Sie sich leicht nach vorne (verwenden Sie das Kissen, um Ihren Rücken zu stützen). Auf diese Weise kann das Silikonschild der Milchpumpe leicht nach oben geneigt werden, was den Fluss der Muttermilch in den Milchauffangbehälter erleichtert und die Restmilch im Silikonschild reduziert.

Anleitung zum Einbau des Entenschnabelventils

Setzen Sie den oberen Teil des Entenschnabelventils in das runde Loch am Boden des Milchsammelbehälters ein.



Picture 1




Picture 2



Duckbill valve


Anleitung zum Anpassen der BH-Schnalle

Das Anpassen der Länge der BH-Träger macht das Abpumpen angenehmer. Ein Ende der BH-Einstellschnalle hing an der inneren Schnalle des Still-BHs. Passen Sie die Länge der BH-Schnalle nach Ihren Wünschen an.

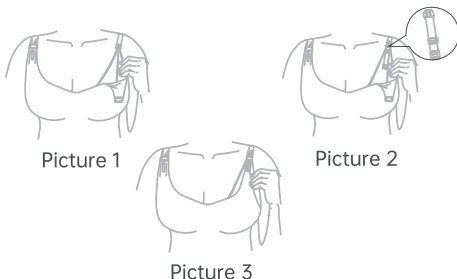

Anleitung zum Einschenken von Milch

Nachdem Sie mit dem Abpumpen fertig sind, entfernen Sie bitte die Milchpumpe von der Brust. Halten Sie die Milchpumpe aufrecht und entfernen Sie das Motorteil, halten Sie den Milchsammler, um die Muttermilch in eine Flasche zu gießen, und stellen Sie sicher, dass der Milchsammlerspalt der Brusttasse mit der Mündung der Flasche ausgerichtet ist, um zu verhindern, dass Muttermilch verschüttet wird.

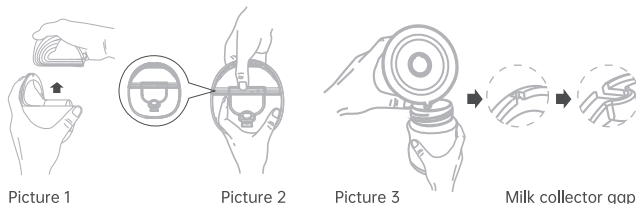

Aufbewahrung Ihrer Muttermilch

• Aufbewahrung von Muttermilch

1. Bewahren Sie nur Muttermilch auf, die von sterilisierten Milchpumpen stammt.
2. Die angesaugte Milch sollte in einen sauberen und sterilisierten Milchbeutel oder eine versiegelte Milchflasche gegeben und sofort zum Kühlen oder Einfrieren in den Kühlschrank gestellt werden.

• Muttermilch Kühl Lagern

1. Muttermilch nicht zweimal wieder einfrieren.
2. Mischen Sie keine frische Muttermilch mit gefrorener Muttermilch.
3. Achten Sie darauf, die restliche Muttermilch nach dem Füttern wegzuschütten.
4. Die abgepumpte Milch kann 48 Stunden lang im Kühlschrank gekühlt oder 3 Monate lang im Gefrierschrank eingefroren werden (Lagern Sie Muttermilch nicht in der Tür des Kühl- oder Gefrierschranks). Die Milchflasche oder der Milchbeutel kann mit einem Etikett versehen werden, auf dem Datum und Uhrzeit des Melkens deutlich zu erkennen sind.

• Muttermilch Auftauen

Legen Sie die gefrorene Muttermilch über Nacht zum Auftauen in den Kühlschrank. Wenn Sie es eilig haben, können Sie Muttermilch am schnellsten auftauen, indem Sie sie in eine Schüssel mit warmem Wasser geben. Die aufgetaute Muttermilch muss innerhalb von 24 Stunden verzehrt werden.

• Muttermilch Erwärmen

1. Stellen Sie die Babyflasche mit Muttermilch aufrecht in eine Schüssel mit warmem Wasser oder in einen Lebensmittelwärmer, um die Muttermilch sicher und schnell zu erwärmen.
2. Bevor Sie Ihr Baby füttern, überprüfen Sie unbedingt die Temperatur der Muttermilch.
3. Verwenden Sie zum Erhitzen von Muttermilch keine Mikrowelle, da dies wichtige Nährstoffe und Antikörper zerstören kann.
4. Eine ungleichmäßige Erwärmung kann zu einer teilweisen Überhitzung der Milch führen und Verbrennungen verursachen.
5. Erhitzen Sie die Babyflasche nicht mit Muttermilch in kochendem Wasser, um ein Reißen oder Reißen zu vermeiden.

Häufig gestellte Fragen

F: Warum tritt Milch aus der Milchpumpe aus?

A: Möglicher Grund 1: Sie befinden sich möglicherweise in einer falschen Melkposition.

Lösung: Bitte wählen Sie die bequemste Sitzposition zum Melken und schlagen Sie vor, keine großflächigen Bewegungen wie Bücken und Springen auszuführen.

Möglicher Grund 2: Defektes Zubehör wie Entenschnabelventil und Milchsammler. Wenn sie beschädigt oder gealtert sind, kann die Milch nicht in die Flasche fließen und läuft aus dem BH heraus.

Lösung: Bitte überprüfen Sie vor der Verwendung, ob das Produkt in gutem Zustand ist, und ersetzen Sie es rechtzeitig durch neues Zubehör.

F: Warum saugt die Milchpumpe wenig Muttermilch?

A: Das Konstruktionsprinzip der Milchpumpe besteht darin, die Wirkung des Saugens des Babys zu imitieren, die Brust zur Milchsekretion zu stimulieren und den Zweck des Ausdrückens von Muttermilch zu erreichen. Wenn Sie das Gefühl haben, dass die Wirkung der Milchpumpe nicht offensichtlich ist, und hoffen, mehr Muttermilch abpumpen zu können, können Sie 3 Minuten vorher warme, nasse Waschlappen auf Ihre Brüste legen, um Ihre Brust zu aktivieren, und dann den Simulationsmodus oder den Massagemodus verwenden 3 Minuten lang, und stellen Sie dann langsam den Gang ein, um die geeignete Frequenz für sich selbst herauszufinden.

F: Darf eine Milchpumpe mit Lithiumbatterie in ein Flugzeug mitgenommen werden?

A: Ja, obwohl unsere Milchpumpe über eine eingebaute 1000-mAh-Lithiumbatterie verfügt, erfüllt ihre Kapazität die Flugsicherheitsanforderungen.

F: Warum riecht die Milchpumpe nach Plastik?

A: Bitte machen Sie sich keine Sorgen, es ist normal, dass das Produkt einen leichten Geruch hat. Unsere Milchpumpen sind aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt. Wir empfehlen Ihnen, Beutel und Karton zu öffnen und nach Erhalt der Ware einen Tag beiseite zu legen. Wenn Sie es dringend brauchen, empfehlen wir Ihnen, es mit weißem Essig oder Backpulver zu waschen, und es wird keinen Geruch geben.

F: Worauf sollten Mütter beim Stillen achten?

- A: 1. Bevor Sie die Milchpumpe verwenden, empfehlen wir Ihnen, etwa 3 Minuten lang ein heißes Handtuch zu verwenden, um die Brust zu ermutigen, sich zu öffnen und Milch zu produzieren, damit die Pumpgeschwindigkeit schneller wird.
2. Wenn Sie die Milchpumpe verwenden, sollte das Zahnrad nicht zu groß sein, Sie müssen sich nur an das Zahnrad anpassen, mit dem Sie sich wohl fühlen. Es wird empfohlen, dass Mütter die Brüste mit einer Massage oder einem automatischen Block vollständig öffnen und dann die Saugkraft erhöhen.
3. Im Allgemeinen kann eine Brust innerhalb von 8 Minuten abgepumpt werden, wir empfehlen, dass die maximale Anwendungszeit 20 Minuten nicht überschreiten sollte.

F: Warum habe ich das Gefühl, dass die Saugleistung meiner Milchpumpe zu gering ist?

A: Bitte überprüfen Sie, ob alle Teile richtig montiert sind und ob die Milchpumpe auf den richtigen Gang eingestellt ist.

Produktparameter

[	Modell	]	S21
[	Produktname	]	Tragbare Milchpumpen
[	Material	]	Silikon in Lebensmittelqualität, ABS
[	Produktgröße	]	7.08*5.70*3.14inch/180*145*80mm
[	Adapterausgang	]	5V/1A
[	Lithiumbatteriespannung	]	3.7V
[	Batteriekapazität	]	1000 mAh, 1.85Wh
[	Dauer	]	30 Minuten

Kundendienst

Wenn Sie uns wegen eines Produktproblems, eines beschädigten Produkts oder eines Produktfehlers erreichen, sind wir für unsere tragbaren Milchpumpen verantwortlich.



support@mommed.com




www.mommed.com

Liste des Pièces

- ① 27mm Tire-Lait Portable x2
- ② Sangle de Réglage du Soutien-Gorge x2
- ③ Petite Brosse x2
- ④ Manuel d'utilisation x1
- ⑤ Insert de Bride de 0,94 pouce/24 mm x2
- ⑥ Câble de Type C x2
- ⑦ Sac de Rangement x2
- ⑧ Manuel d'allaitement x1

La Structure du Produit

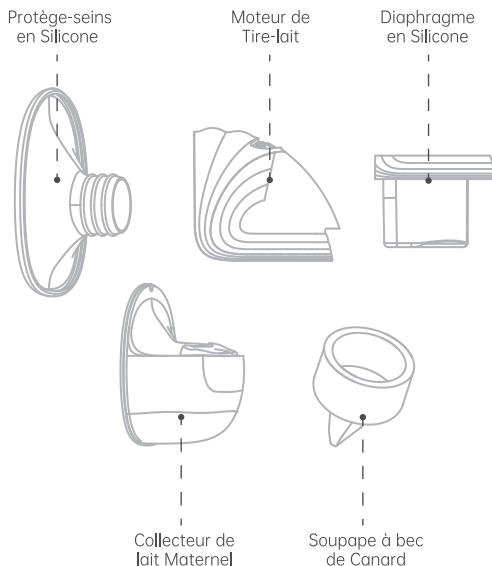


Comment Assembler


- ① Placez le diaphragme en silicone dans le collecteur de lait maternel et appuyez dessus avec vos mains pour que les bords se fixent fermement afin d'assurer une étanchéité parfaite.




- ② Mettez le bouclier en silicone dans le collecteur de lait maternel et appuyez dessus avec vos mains pour bien fixer les bords. Assurez-vous de l'installer dans le bon sens.

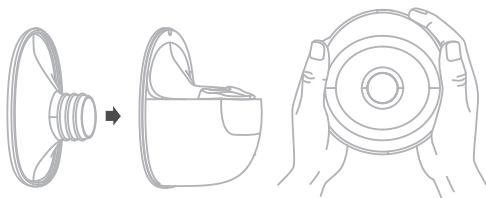

- ③ Installez le moteur de la pompe sur le collecteur de lait maternel pour vous assurer qu'il s'adapte parfaitement au collecteur de lait maternel.

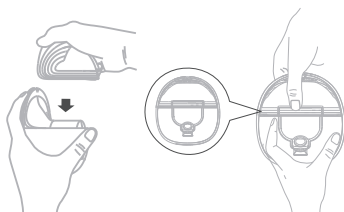

- ④ Connectez le câble de charge de Type C pour charger les tire-lait.

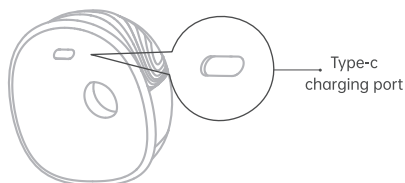


⚠ Note:

1. Ce produit a une batterie li-ion intégrée. Lorsque les voyants de la batterie sont rouges, nous vous recommandons d'utiliser un adaptateur certifié 5V==1A pour charger le moteur du tire-lait dès que possible.
2. L'adaptateur secteur est un accessoire standard de tous les jours sur le marché. Ce produit n'est pas fourni et peut être acheté séparément si nécessaire. Spécifications de l'adaptateur secteur 5V==1A.
3. La durée du pompage ne doit pas dépasser 20 minutes.
4. Vérifiez que toutes les pièces ne fonctionnent pas ou ne sont pas endommagées. Certaines pièces peuvent devoir être remplacées à temps.

Nettoyage et stérilisation

1. Pour la première fois et avant chaque utilisation, vous devez démonter, laver et stériliser toutes les pièces du tire-lait qui entrent en contact avec le lait maternel.
2. Après utilisation, veuillez démonter et nettoyer immédiatement toutes les pièces en contact avec les seins et le lait maternel (diaphragme en silicone, collecteur de lait, valve à bec de canard, protections mammaires en silicone) pour éviter les résidus de lait maternel ou la croissance bactérienne; Il est recommandé d'utiliser de l'eau potable ou un détergent pour le nettoyage (la température de l'eau ne doit pas dépasser 100°C, son dépassement endommagera la pièce et entraînera la déformation des pièces).

Panneau de Commande

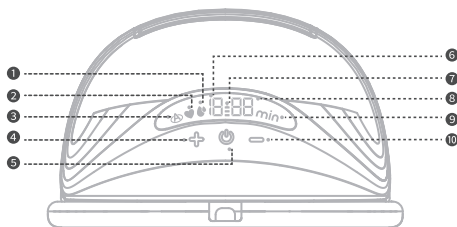


- | | |
|---|----------------------------|
| ① Mode de Expression | ⑥ Affichage de la Force |
| ② Mode de Stimulation | ⑦ Affichage de la Batterie |
| ③ Mode de Automatique | ⑧ Affichage Chronophage |
| ④ Augmenter la Puissance | ⑨ Minute |
| ⑤ Bouton d'alimentation/Bouton de Sélection de Mode | ⑩ Réduire la Puissance |

⚠ Précautions d'utilisation


1. Le moteur du tire-lait n'entre pas dans votre lait maternel. Vous pouvez essuyer cette partie avec un chiffon doux.
2. Faites attention lorsque vous nettoyez la valve à bec de canard et le diaphragme en silicone. S'il est endommagé, votre tire-lait ne fonctionnera pas correctement.
3. Pour nettoyer la valve à bec de canard, frottez-la doucement entre vos doigts dans de l'eau chaude savonneuse. N'insérez pas d'objets car cela pourrait causer des dommages.

Instructions sur les Boutons


- ① Appuyez fermement les tétérilles en silicone contre le sein, ne laissez aucun espace et assurez-vous que vos mamelons sont centrés. Attention à ne pas déformer la position du produit et de la poitrine, sinon le tire-lait n'aura pas d'aspiration.

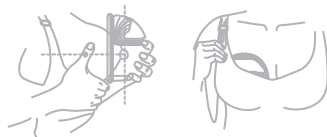


- ② Appuyez légèrement sur le bouton d'alimentation "  " pour démarrer le tire-lait et l'écran s'allume.

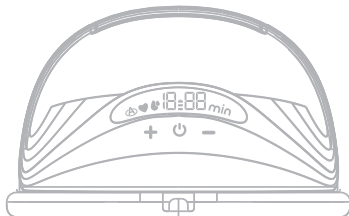


- ③ Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation "  " pour passer au mode de stimulation "  ", il y a 12 niveaux dans ce mode. Vous pouvez appuyer sur les boutons "  " et "  " pour sélectionner la puissance d'aspiration qui vous met à l'aise.

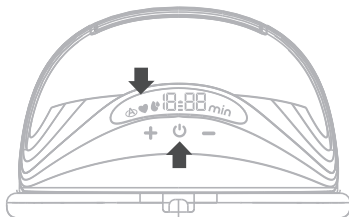


- ④ Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation "  " pour changer le mode d'expression "  ". Il y a 12 niveaux dans ce mode. Vous pouvez appuyer sur les boutons "  " et "  " pour sélectionner la puissance d'aspiration qui vous met à l'aise.

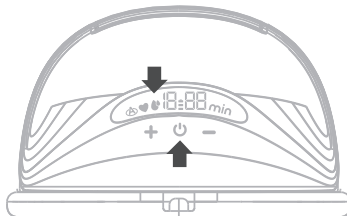

- ⑤ Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation "  " pour passer en mode automatique "  ". Il y a 12 niveaux dans ce mode. Les niveaux 1 à 6 sont le mode de stimulation "  ", et les niveaux 7 à 12 sont le mode d'expression "  ". L'intervalle de puissance de 1 à 9 niveaux de 20 secondes augmentera automatiquement la puissance. Les niveaux 10 à 12 doivent ajuster manuellement la puissance. Pendant le processus, vous pouvez choisir la puissance d'aspiration qui vous met à l'aise grâce aux boutons " + " et " - ".

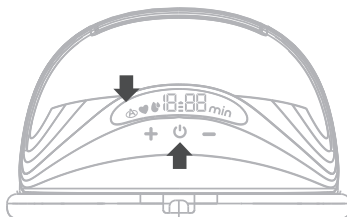

- ⑥ Appuyez longtemps sur le bouton d'alimentation "  " pour éteindre le tire-lait.

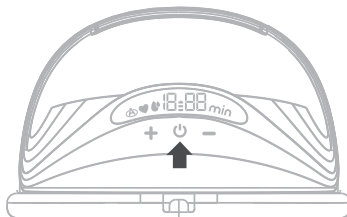

- ⑦ Après avoir tiré, appuyez sur le bouton d'alimentation pour éteindre le tire-lait, penchez-vous légèrement vers l'avant, puis retirez délicatement le tire-lait du sein. S'il reste une petite quantité de lait maternel au niveau de la protection en silicone, vous pouvez incliner légèrement le tire-lait pour verser le lait maternel restant de la protection en silicone.



Conseils

1. Ce modèle a une fonction de mémoire intégrée, lorsque vous rallumez la machine, la machine entre automatiquement et passe au mode de travail et au niveau d'aspiration que vous avez utilisés la dernière fois.
2. Le tire-lait s'arrêtera automatiquement après 30 minutes de travail.
3. Lorsque vous portez le tire-lait, détendez-vous et asseyez-vous dans une chaise confortable, légèrement penché en avant (utilisez le coussin pour soutenir votre dos). De cette manière, la protection en silicone du tire-lait peut être légèrement inclinée vers le haut, ce qui facilite l'écoulement du lait maternel dans le collecteur de lait et réduit le lait maternel résiduel dans la protection en silicone.

Instructions d'installation de la valve à bec de Canard

Insérez la partie supérieure de la valve à bec de canard dans le trou rond au fond du réservoir collecteur de lait.



Picture 1




Picture 2



Duckbill valve


Instructions Pour la Boucle de Réglage du Soutien-gorge

Ajuster la longueur des bretelles du soutien-gorge rend le pompage plus confortable. Une extrémité de la boucle de réglage du soutien-gorge était accrochée à la boucle intérieure du soutien-gorge d'allaitement. Ajustez la longueur de la boucle du soutien-gorge selon vos préférences.

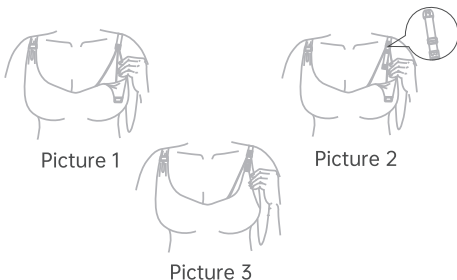

Instructions pour verser le lait Maternel

Une fois l'expression terminée, veuillez retirer le tire-lait du sein. Gardez le tire-lait droit et retirez la partie moteur, tenez le collecteur de lait pour verser le lait maternel dans un biberon et assurez-vous que l'espace du collecteur de lait du gobelet est aligné avec l'embouchure du biberon pour éviter que le lait maternel ne se renverse.

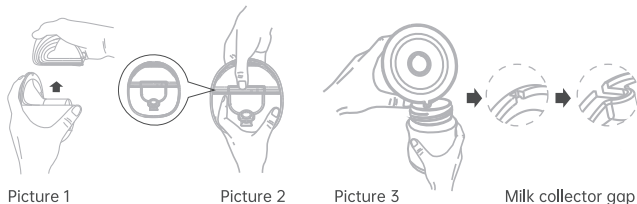

Conservation de Votre lait Maternel

• Conservation du Lait Maternel

1. Ne conservez que le lait maternel provenant de tire-lait stérilisés.
2. Le lait sucé doit être placé dans un sac de stockage de lait propre et stérilisé ou une bouteille de lait avec un sceau, et immédiatement placé au réfrigérateur pour réfrigérer ou congeler.

• Stockage au Froid du Lait Maternel

1. Ne recongelez pas le lait maternel deux fois.
2. Ne mélangez pas le lait maternel frais avec du lait maternel congelé.
3. Assurez-vous de jeter tout lait maternel restant après la tétée.
4. Le lait pompé peut être réfrigéré au réfrigérateur pendant 48 heures ou congelé au congélateur pendant 3 mois (ne pas conserver le lait maternel dans la porte du réfrigérateur ou du congélateur). La bouteille de lait ou le sac de stockage du lait peut être apposé avec une étiquette indiquant clairement la date et l'heure de la traite.

• Décongeler le Lait Maternel

Placez le lait maternel congelé au réfrigérateur pendant la nuit pour décongeler. Si vous êtes pressée, le moyen le plus rapide de décongeler le lait maternel est de le mettre dans un bol d'eau tiède. Le lait maternel décongelé doit être consommé dans les 24 heures.

• Chauffer le lait Maternel

1. Placez le biberon avec le lait maternel à la verticale dans un bol d'eau tiède ou dans un chauffe-aliments pour réchauffer le lait maternel en toute sécurité et rapidement.
2. Avant de nourrir votre bébé, assurez-vous de vérifier la température du lait maternel.
3. N'utilisez pas de four à micro-ondes pour chauffer le lait maternel car cela pourrait détruire des nutriments et des anticorps importants.
4. Un chauffage irrégulier peut entraîner une surchauffe partielle du lait et provoquer des brûlures.
5. Ne chauffez pas le biberon avec du lait maternel dans de l'eau bouillante pour éviter toute rupture ou fissuration.

Questions Fréquemment Posées

Q : Pourquoi le tire-lait laisse-t-il échapper du lait?

A : Raison possible 1 : Vous êtes peut-être dans une position de traite incorrecte.

Solution : Veuillez choisir la position assise la plus confortable pour la traite et suggérez de ne pas faire de mouvements à grande échelle, comme se pencher et sauter.

Raison possible 2 : Accessoires défectueux tels que la valve à bec de canard et le collecteur de lait. S'ils sont abîmés ou vieilliss, le lait ne peut pas descendre dans le biberon et s'écoulera de la place du soutien-gorge.

Solution : veuillez vérifier si le produit est en bon état avant de l'utiliser et remplacez-le par de nouveaux accessoires à temps.

Q : Pourquoi le tire-lait aspire-t-il peu de lait maternel?

A : Le principe de conception du tire-lait est d'imiter l'action de succion du bébé, de stimuler le sein à sécréter du lait et d'atteindre l'objectif d'exprimer le lait maternel ; Si vous sentez que l'effet du tire-lait n'est pas évident et que vous espérez tirer plus de lait maternel, vous pouvez placer des débarbouillettes chaudes et humides sur vos seins pendant 3 minutes à l'avance pour activer votre poitrine, puis utiliser le mode simulation ou le mode massage. pendant 3 minutes, puis ajustez lentement la vitesse pour trouver la fréquence appropriée pour vous-même.

Q : Un tire-lait avec une batterie au lithium peut-il être emporté dans un avion ?

A : Oui, bien que notre tire-lait ait une batterie au lithium intégrée de 1000 mAh, sa capacité répond aux exigences de sécurité des vols.

Q : Pourquoi le tire-lait a-t-il une odeur de plastique ?

A : Ne vous inquiétez pas, il est normal que le produit ait une légère odeur. Nos tire-lait sont fabriqués à partir de matériaux respectueux de l'environnement. Nous vous recommandons d'ouvrir le sac et la boîte et de les mettre de côté pendant une journée après avoir reçu la marchandise. Si vous en avez un besoin urgent, nous vous suggérons de le laver avec du vinaigre blanc ou du bicarbonate de soude, et il n'y aura pas d'odeur.

Q : À quoi les mères doivent-elles faire attention pendant l'allaitement ?

A : 1. Avant d'utiliser le tire-lait, nous vous recommandons d'utiliser une serviette chaude pendant environ 3 minutes pour encourager les seins à s'ouvrir et à produire du lait afin que la vitesse de pompage soit plus rapide.

2. Lorsque vous utilisez le tire-lait, la vitesse de celui-ci ne doit pas être trop grande, il vous suffit de vous adapter à la vitesse avec laquelle vous vous sentez à l'aise. Il est recommandé aux mères d'ouvrir complètement les seins avec un massage ou un blocage automatique, puis d'augmenter la succion.

3. D'une manière générale, un sein peut être tiré du lait en 8 minutes, nous recommandons que le temps d'utilisation maximum ne dépasse pas 20 minutes.

Q: Pourquoi ai-je l'impression que l'aspiration de mon tire-lait est trop faible?Milchpumpe zu gering ist?

A : Veuillez vérifier si toutes les pièces sont correctement installées et si le tire-lait est réglé à la puissance appropriée.

Paramètres du Produit

[	Modèle	]	S21
[	Nom du Produit	]	Tire-lait Portable
[	Matériel	]	Silicone de qualité alimentaire, ABS
[	Taille du Produit	]	7.08*5.70*3.14inch/180*145*80mm
[	Adaptateur Sortie	]	5V/1A
[	Tension de la Batterie au Lithium	]	3.7V
[	Capacité de la Batterie	]	1000 mAh, 1.85Wh
[	Durée	]	30 Minutes

Service Après-vente

Si vous nous contactez pour tout problème de produit, produit endommagé ou défaut de produit, nous sommes responsables de nos tire-lait portables.



support@mommed.com




www.mommed.com

Elenco delle Parti


- ① 27mm Tiralatte Indossabile x2
- ② Cinghia di Regolazione del Reggiseno x2
- ③ Pennello Piccolo x2
- ④ Manuale dell'utente x1
- ⑤ Inserto flangia da 0,94 pollici/24 mm x2
- ⑥ Cavo di Tipo C x2
- ⑦ Custodia x2
- ⑧ Manuale per l'allattamento al Seno x1

Struttura del Prodotto


Protezioni per il
Seno in Silicone

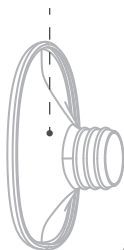

Motore per
Tiralatte

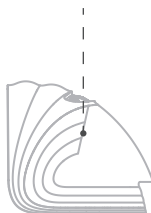

Membrana in
Silicone

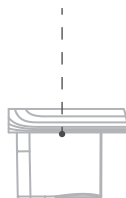

Raccoglitore di
latte Materno




Valvola a
becco d'anatra

Come Assemblare


- ① Inserisci il diaframma in silicone nel collettore del latte materno e premilo con le mani per fissare saldamente i bordi per garantire una tenuta perfetta.




- ② Inserisci lo scudo in silicone nel collettore del latte materno e premilo con le mani per fissare saldamente i bordi. Assicurati di installarlo nella direzione corretta.

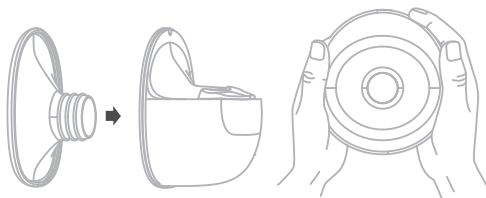

- ③ Installare il motore della pompa sul collettore del latte materno per assicurarsi che si adatti perfettamente al raccoglitore del latte materno.

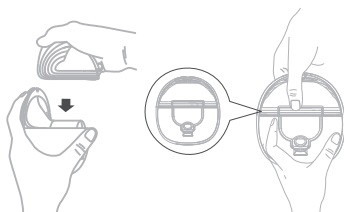

- ④ Collegare il cavo di ricarica di Tipo C per caricare i tiralatte.

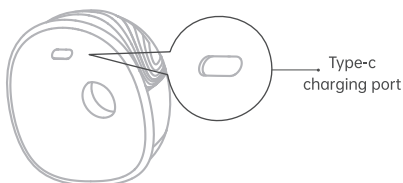


⚠ Nota:

1. Questo prodotto ha una batteria Li-Ion incorporata. Quando le spie della batteria sono rosse, si consiglia di utilizzare un adattatore 5V $\overline{=}$ 1A certificato per caricare il motore del tiralatte il prima possibile.
2. L'alimentatore è un accessorio standard di tutti i giorni sul mercato. Questo prodotto non è fornito e può essere acquistato separatamente se necessario. Specifiche dell'adattatore di alimentazione: 5V $\overline{=}$ 1A.
3. La durata del pompaggio non deve superare i 20 minuti.
4. Verificare che tutte le parti non presentino malfunzionamenti o danni. Potrebbe essere necessario sostituire alcune parti in tempo.

Pulizia e sterilizzazione

1. Per la prima volta e prima di ogni utilizzo, è necessario smontare, lavare e sterilizzare tutte le parti del tiralatte che entrano in contatto con il latte materno.
2. Dopo l'uso, smontare e pulire immediatamente tutte le parti a contatto con il seno e il latte materno (diaframma in silicone, collettore del latte, valvola a becco d'anatra, coppe per il seno in silicone) per evitare residui di latte materno o crescita batterica; Si consiglia di utilizzare acqua potabile o detergente per la pulizia (la temperatura dell'acqua non deve superare i 100°C, il superamento danneggerà la parte e provocherà la deformazione delle parti).

Pannello di Controllo

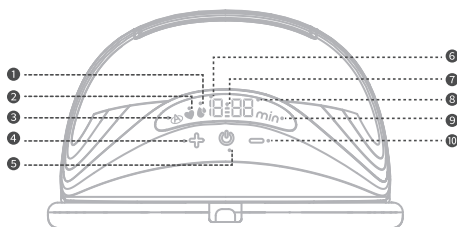


- | | |
|---|---|
| ① Modalità di Espressione | ⑥ Visualizzazione della Forza/Affichage de la |
| ② Modalità di Stimolazione | ⑦ Visualizzazione della Batteria |
| ③ Modalità di Automatica | ⑧ Display che Consuma Tempo |
| ④ Aumenta la Potenza | ⑨ Minuti |
| ⑤ Pulsante di Accensione/Pulsante di Selezione della Modalità | ⑩ Ridurre la Potenza |

⚠ Avvertenze Operative


1. Il motore del tiralatte non entra nel latte materno. Puoi pulire questa parte con un panno morbido.
2. Prestare attenzione durante la pulizia della valvola a becco d'anatra e del diaframma in silicone. Se viene danneggiato, il tiralatte non funzionerà correttamente.
3. Per pulire la valvola a becco d'anatra, strofinarla delicatamente tra le dita in acqua tiepida e sapone. Non inserire oggetti in quanto ciò potrebbe causare danni.

Pulsante Istruzioni


- ① Premere saldamente le coppe per il seno in silicone contro il seno, senza lasciare spazi vuoti e assicurarsi che i capezzoli siano centrati. Fare attenzione a non distorcere la posizione del prodotto e del torace, altrimenti il tiralatte non avrà aspirazione.

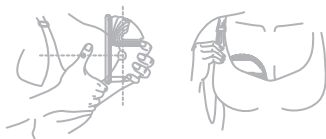


- ② Premere leggermente il pulsante di accensione "  " per avviare il tiralatte e lo schermo si illuminerà.

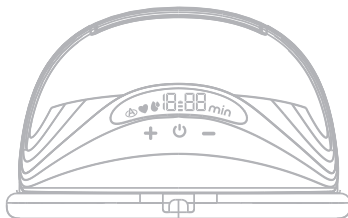


- ③ Premere brevemente il pulsante di accensione "  " per passare alla modalità di stimolazione "  ", ci sono 12 livelli in questa modalità. Puoi premere i pulsanti " + " e " - " per selezionare la potenza di aspirazione che ti fa sentire a tuo agio.

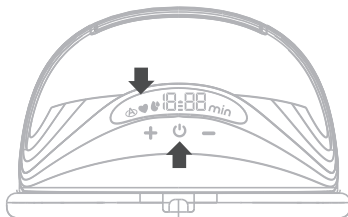


- ④ Premere brevemente il pulsante di accensione "  " per cambiare la modalità di espressione "  ". Ci sono 12 livelli in questa modalità. Puoi premere i pulsanti " + " e " - " per selezionare la potenza di aspirazione che ti fa sentire a tuo agio.

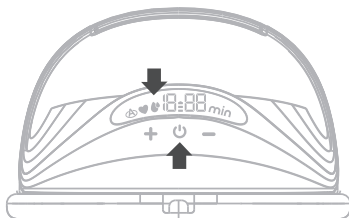

- ⑤ Premere brevemente il pulsante di accensione "  " per passare alla modalità automatica "  ". Ci sono 12 livelli in questa modalità. I livelli 1-6 sono la modalità di stimolazione "  ", mentre i livelli 7-12 sono la modalità di espressione "  ". L'intervallo di potenza di livello 1-9 di 20 secondi aumenterà automaticamente la potenza. I livelli 10-12 devono regolare manualmente la potenza. Durante il processo, puoi scegliere la potenza di aspirazione che ti fa sentire a tuo agio attraverso i pulsanti "  " e "  ".

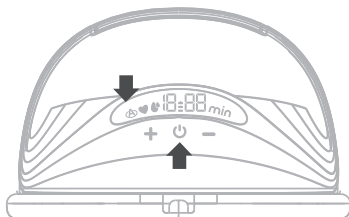

- ⑥ Premere a lungo il pulsante di accensione "  " per spegnere il tiralatte.

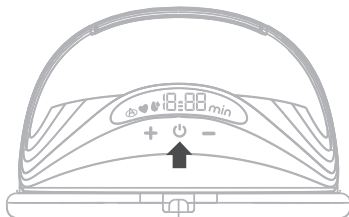

- ⑦ Dopo aver pompato, premere il pulsante di accensione per spegnere il tiralatte, piegarsi leggermente in avanti, quindi rimuovere con attenzione il tiralatte dal seno. Se rimane una piccola quantità di latte materno sulla protezione in silicone, puoi inclinare leggermente il tiralatte per versare il latte materno rimanente dalla protezione in silicone.



Suggerimenti

1. Questo modello ha una funzione di memoria incorporata, quando si riaccende la macchina, la macchina entra automaticamente e passa alla modalità di lavoro e al livello di aspirazione che hai usato l'ultima volta.
2. Il tiralatte si fermerà automaticamente dopo 30 minuti di lavoro.
3. Quando indossi il tiralatte, rilassati e siediti su una sedia comoda, piegandoti leggermente in avanti (usa il cuscino per sostenere la schiena). In questo modo, la protezione in silicone del tiralatte può essere leggermente inclinata verso l'alto, il che facilita il flusso del latte materno nel collettore del latte e riduce il latte materno residuo nella protezione in silicone.

Istruzioni per l'installazione della valvola a becco d'anatra

Inserire la parte superiore della valvola a becco d'anatra nel foro rotondo sul fondo del serbatoio di raccolta del latte.



Picture 1




Picture 2



Duckbill valve


Istruzioni per la Fibbia di Regolazione del Reggiseno

La regolazione della lunghezza delle spalline del reggiseno rende il pompaggio più confortevole. Un'estremità della fibbia di regolazione del reggiseno era appesa alla fibbia interna del reggiseno per l'allattamento. Regola la lunghezza della fibbia del reggiseno in base alle tue preferenze.

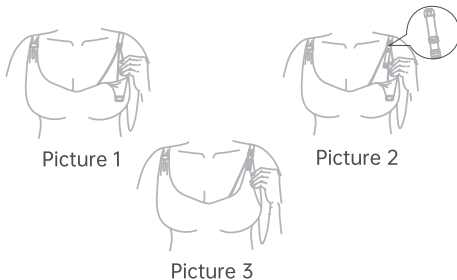

Istruzioni Per Versare il Latte Materno

Dopo aver finito di pompare, rimuovere il tiralatte dal seno. Tieni il tiralatte in posizione verticale e rimuovi la parte del motore, tieni il collettore del latte per versare il latte materno in un biberon e assicurati che lo spazio del raccogliatore del latte della coppa del seno sia allineato con l'imboccatura del biberon per evitare che il latte materno si rovesci.

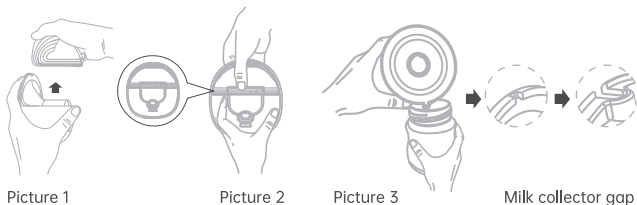

Conservare il latte Materno

• Conservazione del Latte Materno

1. Conservare solo il latte materno raccolto da tiralatte sterilizzati.
2. Il latte aspirato deve essere posto in un sacchetto per la conservazione del latte pulito e sterilizzato o in una bottiglia per il latte con un sigillo e posto immediatamente in frigorifero per refrigerare o congelare.

• Conservazione del latte materno

1. Non ricongelare il latte materno due volte.
2. Non mescolare latte materno fresco con latte materno congelato.
3. Assicurati di buttare via il latte materno rimanente dopo l'allattamento.
4. Il latte estratto può essere refrigerato in frigorifero per 48 ore o congelato nel congelatore per 3 mesi (non conservare il latte materno nella porta del frigorifero o del congelatore). La bottiglia del latte o la sacca per la conservazione del latte possono essere apposte con un'etichetta che indica chiaramente la data e l'ora della mungitura.

• Scongeler il latte materno

Mettere il latte materno congelato in frigorifero durante la notte per scongelarlo. Se hai fretta, il modo più veloce per scongelare il latte materno è metterlo in una ciotola di acqua tiepida. Il latte materno scongelato deve essere consumato entro 24 ore.

• Riscaldare il latte materno

1. Metti il biberon con il latte materno in posizione verticale in una ciotola di acqua tiepida o in uno scaldavivande per riscaldare il latte materno in modo rapido e sicuro.
2. Prima di allattare il tuo bambino, assicurati di controllare la temperatura del latte materno.
3. Non utilizzare un forno a microonde per riscaldare il latte materno in quanto ciò potrebbe distruggere importanti nutrienti e anticorpi.
4. Il riscaldamento irregolare può causare un parziale surriscaldamento del latte e provocare ustioni.
5. Non riscaldare il biberon con il latte materno in acqua bollente per evitare rotture o crepe.

Domande Frequenti

Q: Perché il tiralatte perde latte?

A: Possibile motivo 1: potresti trovarti in una posizione di mungitura errata.

Soluzione: Scegliere la posizione seduta più comoda per la mungitura e suggerire di non eseguire movimenti su larga scala, come piegarsi e saltare.

Possibile motivo 2: accessori difettosi come la valvola a becco d'anatra e il collettore del latte. Se sono danneggiati o invecchiati, il latte non può essere versato nel biberon e finirà fuori dal reggiseno.

Soluzione: verificare se il prodotto è in buone condizioni prima di utilizzarlo e sostituirlo tempestivamente con nuovi accessori.

Q: Perché il tiralatte succhia poco latte materno?

A: Il principio di progettazione del tiralatte è quello di imitare l'azione del bambino che succhia, stimolando il seno a secernere il latte e raggiungendo lo scopo di esprimere il latte materno; Se ritieni che l'effetto del tiralatte non sia evidente e speri di pompare più latte materno, puoi mettere salviette calde e bagnate sul seno per 3 minuti in anticipo per attivare il torace, quindi utilizzare la modalità di simulazione o la modalità massaggio per 3 minuti, quindi regola lentamente la marcia per scoprire la frequenza appropriata per te stesso.

Q: È possibile portare in aereo un tiralatte con batteria al litio?

A: Sì, sebbene il nostro tiralatte abbia una batteria al litio integrata da 1000 mAh, la sua capacità soddisfa i requisiti di sicurezza del volo.

Q: Perché il tiralatte ha un odore di plastica?

A: Non preoccuparti, è normale che il prodotto abbia un leggero odore. I nostri tiralatte sono realizzati con materiali ecocompatibili. Ti consigliamo di aprire il sacchetto e la scatola e metterli da parte per un giorno dopo aver ricevuto la merce. Se ne hai bisogno urgentemente, ti consigliamo di lavarlo con aceto bianco o bicarbonato di sodio e non ci sarà odore.

Q: A cosa dovrebbero prestare attenzione le madri durante l'allattamento?

A: 1. Prima di utilizzare il tiralatte, si consiglia di utilizzare un asciugamano caldo per circa 3 minuti per incoraggiare il seno ad aprirsi e produrre latte in modo che la velocità di estrazione sia più veloce.

2. Quando usi il tiralatte, l'ingranaggio non dovrebbe essere troppo grande, devi solo adattarti all'ingranaggio con cui ti senti a tuo agio. Si raccomanda alle madri di aprire completamente il seno con un massaggio o un blocco automatico, quindi aumentare la suzione.

3. In generale, un seno può essere pompato entro 8 minuti, raccomandiamo che il tempo massimo di utilizzo non superi i 20 minuti.

Q: Perché sento che l'aspirazione del mio tiralatte è troppo bassa?

A: Verificare che tutte le parti siano installate correttamente e che il tiralatte sia regolato sulla marcia appropriata.

Parametri del Prodotto

[	Modello	]	S21
[	Nome del Prodotto	]	Tiralatte Indossabili
[	Materiale	]	Silicone Alimentare, ABS
[	Dimensioni del Prodotto	]	7.08*5.70*3.14inch/180*145*80mm
[	Uscita Adattatore	]	5V/1A
[	Tensione Della Batteria al Litio	]	3.7V
[	Capacità Della Batteria	]	1000 mAh, 1.85Wh
[	Durata	]	30 Minuti

Assistenza Post-Vendita

Se ci contatti per qualsiasi problema con il prodotto, prodotto danneggiato o difetti del prodotto, siamo responsabili dei nostri tiralatte indossabili.



support@mommed.com




www.mommed.com

¿Qué hay en el paquete?

- ① 27mm Extractor de leche eléctrico portátil x2
- ② 0.94inch/24mm Insertos de flange de silicona x2
- ③ Hebilla de ajuste del sujetador x2
- ④ Cable tipo c x2
- ⑤ Cepillo pequeño x2
- ⑥ Bolsas de almacenamiento x2
- ⑦ Manual de usuario x1
- ⑧ manual de lactancia x1

Extractor de leche eléctrico portátil:

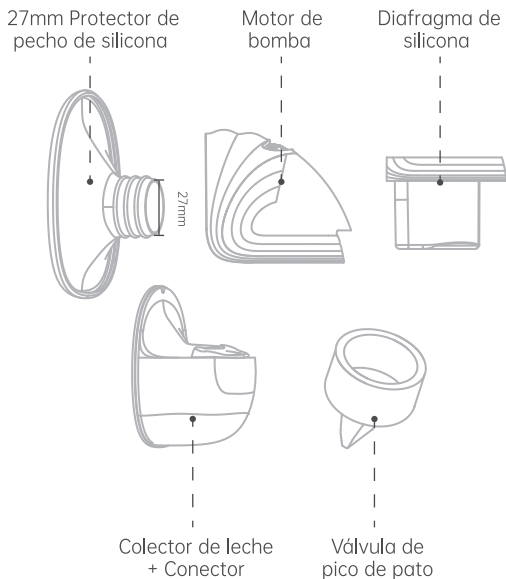

Armado del aparato


- ① Sitúe el diafragma de silicona en el colector de leche, y presione con las manos para que los bordes queden bien sujetos para asegurar un sellado perfecto.




- ② Sitúe el escudo de silicona en el colector de leche materna y presione con las manos para que los bordes queden bien sujetos. Asegúrese de instalarlo en la dirección correcta.



- ③ Instale el motor de la bomba en el colector de leche materna para asegurarse de que encaja perfectamente con el colector de leche materna.

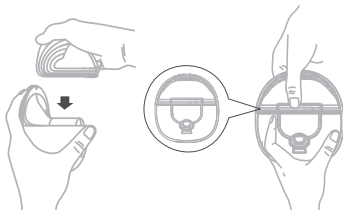

- ④ Conecte el cable de carga tipo c para cargar la batería.

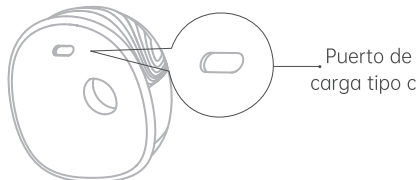


⚠ Nota:

1. Este producto contiene una batería Li-Ion incorporada. Cuando el indicador de la batería se ilumina en rojo, le recomendamos que utilice un adaptador certificado de 5V==1A para cargar el motor de la bomba lo antes posible.
2. El adaptador de corriente es un accesorio muy común en el mercado. Este producto no se suministra y puede adquirirse por separado si es necesario. Especificaciones de adaptador de corriente: 5V==1A.
3. La duración del bombeo no debe ser superior a 20 minutos.
4. Verifique periódicamente todos los componentes en busca de derrotas o roturas, es posible que las piezas deban reemplazarse a tiempo.

Proceso de limpieza y esterilización

1. En su primer uso y antes de cada uso, debe desmontar, lavar y esterilizar todas las piezas del sacaleches que entren en contacto con la leche materna.
2. Después de usarse, desmonte y limpie inmediatamente todas las piezas que estuvieron en contacto con los pechos y la leche materna (membrana, biberón, válvula de pico de pato, escudo) para evitar que queden residuos de leche materna o se produzca un crecimiento bacteriano; se recomienda utilizar agua potable o detergente para la limpieza (la temperatura del agua no debe superar los 100°C, ya que si se supera se dañan las piezas y se deforman).

Panel de control

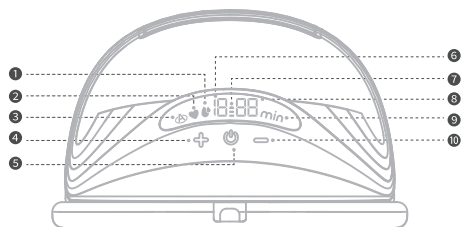

- | | |
|---|------------------------------|
| ① Modo de Expresión | ⑥ Pantalla de Fuerza |
| ② Modo de Estimulación | ⑦ Pantalla de Batería |
| ③ Modo de Automático | ⑧ Pantalla que Consume Mucho |
| ④ Aumentar el Poder | ⑨ Tiempo/Minuto |
| ⑤ Botón de Encendido/Botón de Selección de Modo | ⑩ Reducir Potencia |

⚠ Precauciones de función


- 1.El motor del extractor de leche no entra en la leche materna. Puede limpiar esta parte con un paño suave.
- 2.Tenga cuidado al limpiar la válvula y el diafragma de silicona. Si se dañan, el sacaleches no funcionará correctamente.
- 3.Para limpiar la válvula, frótela suavemente entre los dedos con agua tibia y jabón. No introduzca objetos, ya que podría causar daños.

Prro comenzar la extraccion


- ① Presionar el embudo de silicona firmemente contra el pecho, sin dejar huecos y asegurándose de que sus pezones están centrados. Manténgalo en posición vertical. Tenga cuidado de no distorsionar la posición del producto y del pecho, de lo contrario el sacaleches no tendrá succión.




- ② Presione ligeramente el botón de encendido "  " para iniciar el extractor de leche y la pantalla se iluminará.

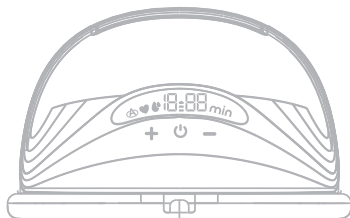


- ③ Presione brevemente el botón de encendido "  " para cambiar al modo de estimulación "  ". Hay 12 niveles en este modo. Puede presionar los botones " + " y " - " para seleccionar la potencia de succión que le haga sentir cómodo.

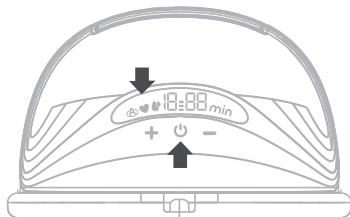


- ④ Pulsar brevemente el botón de encendido "  " para cambiar el Modo de expresión, "  ". Hay 12 niveles en este modo. Puede pulsar los botones " + " y " - " para seleccionar la potencia de succión que le resulte más cómoda.

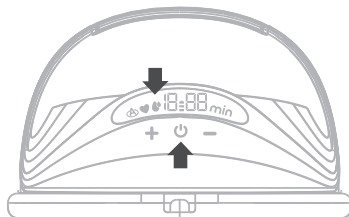

- ⑤ Presione brevemente el botón de encendido "  " para cambiar al modo automático "  ". Hay 12 niveles en este modo. Los niveles 1-6 son Modo de estimulación "  ", y los niveles 7-12 son Modo de expresión "  ". El intervalo de potencia de nivel 1-9 20 segundos aumentará automáticamente la potencia. Los niveles 10-12 necesitan ajustar manualmente la potencia. Durante el proceso , puedes elegir la potencia de succión que te haga sentir cómodo a través de los botones "  " y "  ".

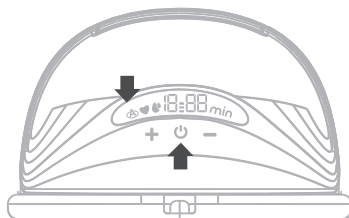

- ⑥ Mantenga pulsado el botón de encendido "  " para apagar el sacaleches.

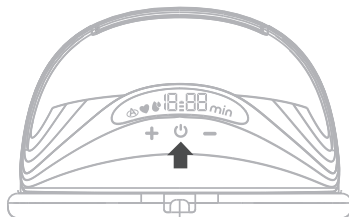

- ⑦ Después de la extracción, pulse el botón de encendido para apagar el sacaleches, inclínese ligeramente hacia delante y, a continuación, retire con cuidado el sacaleches del pecho. Si queda una pequeña cantidad de leche materna en el protector de silicona, puede inclinar ligeramente el sacaleches para verter la leche materna restante del protector de silicona.



Puntas:

1. Este modelo tiene una función de memoria incorporada, cuando usted enciende la máquina de nuevo, la máquina entra automáticamente y cambia al modo de trabajo y el nivel de succión que utilizó la última vez.
2. El sacaleches se detendrá automáticamente después de 30 minutos de trabajo.
3. Relajarse y sentarse en una silla cómoda, inclinándose ligeramente hacia delante (utilice el cojín para apoyar la espalda). De este modo, el escudo de silicona del sacaleches puede inclinarse ligeramente hacia arriba, lo que facilita el flujo de la leche materna hacia el colector de leche y reduce la leche materna residual en el escudo de silicona.

Instrucciones de instalación de la válvula de pico de pato

Introducir la parte elevada de la válvula de pico de pato en el orificio redondo situado en la parte inferior de la ranura de la copa de succión del sujetador.



Imagen 1




Imagen 2



Válvula duckbill


Instrucciones para ajuste de la hebilla del sujetador

Ajuste la longitud de los tirantes del sujetador para una succión sea más cómoda. Un extremo de la hebilla de ajuste del sujetador se cuelga en la hebilla interior del sujetador de lactancia. La longitud de la hebilla del sujetador en el otro extremo de la hebilla de ajuste del sujetador.

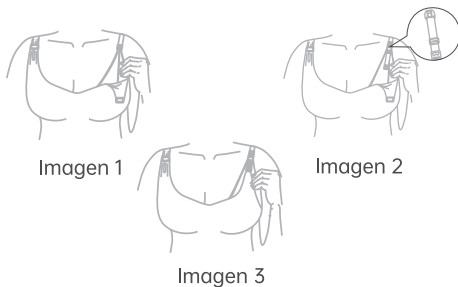

Instrucciones de extracción de leche

Al terminar de extraerse la leche, retire el sacaleches del pecho, mantenga el sacaleches en posición vertical y retire la parte del motor, sujete el colector de leche para verter la leche materna en el biberón, asegúrese de que la parte de la ranura de la copa del pecho está alineada con la boca del biberón para evitar que la leche materna se derrame.

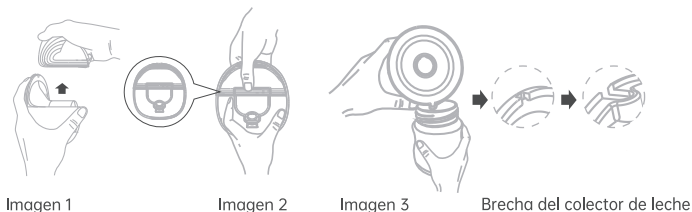

Espacio del colector de leche

• Almacenamiento de la leche materna

1. Almacene sólo la leche materna recogida por los sacaleches esterilizados.
2. La leche extraída puede ser colocada en una bolsa de almacenamiento de leche limpia y esterilizada o en un biberón con una almohadilla de cierre, y colocarse inmediatamente en el frigorífico para refrigerarla o congelarla.

• Almacenamiento en frío de la leche materna

1. No congelar la leche materna repetidamente.
2. No mezclar la leche materna fresca con la congelada.
3. Asegúrese de desechar la leche materna que queda después de la alimentación.
4. La leche extraída se puede refrigerar en el frigorífico durante 48 horas (dentro de la nevera), o congelar en el congelador durante tres meses, y en el biberón o en la bolsa de almacenamiento de la leche se puede colocar una etiqueta que marque claramente la fecha y la hora del ordeño.

• Descongelar la leche materna

Colocar la leche materna congelada en el refrigerador durante una noche para que se descongele. En caso de emergencia, puede utilizar un recipiente con agua caliente para descongelar la leche materna. Una vez descongelada la leche materna, debe consumirse en un plazo de 24 horas.

• Calentamiento de la leche materna

1. Ponga el biberón en una olla con agua caliente o calienta la leche materna de forma segura y rápida con un calentador de biberones y alimentos.
2. ¡Tenga en cuenta! Antes de alimentar al bebé, asegúrese de comprobar la temperatura de la leche materna.

Preguntas frecuentes

P: ¿Por qué el extractor de leche pierde leche?

R: 1. Análisis del motivo: es posible que esté en una posición de ordeño incorrecta. Solución: Elija la posición sentada más cómoda para ordeñar.
2. Análisis del motivo: Las piezas de la bomba no se desmontaron durante la limpieza, lo que provocó la deformación del producto.

Solución: desmonte todas las piezas mientras limpia el extractor de leche. Si las piezas se deforman durante el uso, reemplace los accesorios a tiempo.

3. Análisis del motivo: compruebe si la válvula de pico de pato y el colector de leche están en buenas condiciones. Si están dañados o envejecidos, la leche no puede bajar al biberón y se saldrá del lugar del sostén.

Solución: Verifique que el producto esté en buenas condiciones antes de usarlo y reemplácelo con nuevos accesorios a tiempo.

P: ¿Por qué el extractor de leche produce menos leche materna que otros extractores de leche?

R: El principio de diseño del extractor de leche es imitar la acción de la succión del bebé, estimular el pecho para secretar leche y lograr el propósito de extraer la leche materna; Si siente que el efecto del extractor de leche no es obvio, puede comprimir su pecho con una toalla caliente a unos 60 grados durante 3 minutos antes de activar su pecho y luego usar el engranaje automático o el engranaje de masaje durante 3 minutos, y luego ajuste el engranaje, para encontrar lentamente la frecuencia adecuada para usted.

P: ¿Se puede llevar en un avión un extractor de leche con batería de litio?

R: Sí, nuestro extractor de leche es una batería de litio incorporada y la capacidad de la batería de litio cumple con los requisitos de seguridad de vuelo.

P: ¿Por qué el extractor de leche huele a plástico?

R: No se preocupe, es normal que el producto tenga un ligero olor. Nuestros extractores de leche están fabricados con materiales de silicona y PP sin BPA que no dañan el medio ambiente. Recomendamos que después de recibir los productos, abra la bolsa y la caja y déjelos secar durante un día. Si lo necesita con urgencia, le sugerimos que lo lave con vinagre blanco o bicarbonato de sodio, y no habrá olor.

P: ¿A qué deben prestar atención las madres durante la lactancia?

R: 1. Antes de usar el extractor de leche, le recomendamos que use una toalla caliente durante aproximadamente 3 minutos para promover que los senos se abran y produzcan leche para que la velocidad de extracción sea más rápida.

2. Cuando use el extractor de leche, el engranaje no debe ser demasiado grande, solo necesita ajustarse al engranaje con el que se sienta cómodo. Se recomienda que las madres abran completamente los senos con un masaje o bloqueo automático, y luego aumenten la succión.

3. En términos generales, se puede bombear un seno en 8 minutos, recomendamos que el tiempo máximo de uso no exceda los 20 minutos, de lo contrario, la fuerza de succión será demasiado alta y la leche se descargará demasiado.

P: ¿Por qué siento que la succión de mi extractor de leche es demasiado baja?

R: Compruebe si todas las piezas están instaladas correctamente y si el extractor de leche está ajustado al engranaje adecuado.

Parametros del producto

[Modelo]	S21
[Nombre del producto]	Sacaleches
[Material]	Silicona de Grado Alimenticio, ABS
[Tamaño del producto]	7.08*5.70*3.14inch/180*145*80mm
[Adaptador de Salida]	5V/1A
[Voltaje de la Batería de Litio]	3.7V
[Capacidad de la Batería]	1000 mAh, 1.85Wh
[Duración]	30 Minutos

Servicio Postventa

Si se comunica con nosotros por cualquier problema con el producto, producto dañado o defectos del producto, somos responsables de nuestros extractores de leche portátiles.

 support@mommed.com

 www.mommed.com



Shenzhen TPH Technology Co., Ltd.

5th Floor, Building NO. 29 East Side, Lianchuang 2nd Technology Park,
Bulan Road, Longgang District, Shenzhen, China.



APEX CE SPECIALISTS LIMITED

UNIT 3D NORTH POINT HOUSE,
NORTH POINT BUSINESS PARK, NEW MALLOW ROAD
CO. CORK, T23 AT2P IRELAND
Tel: +353212066339 E-Mail: info@apex-ce.com



APEX CE SPECIALISTS LIMITED

89 Princess Street, Manchester, UK M1 4HT
Tel: +441616371080 E-Mail: info@apex-ce.com



Warning

This is not a toy, keep out of reach of children.