


NCVI

Wearable Breast Pump

—— User Manual ——



Installation Video

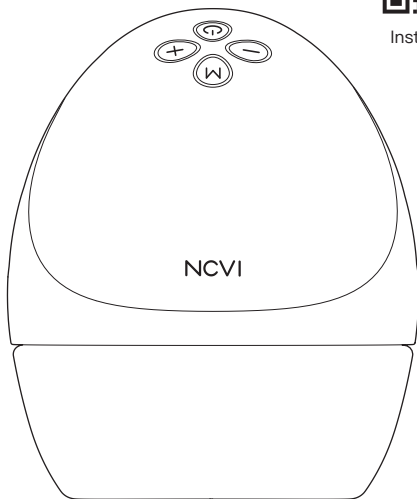

Heating Mode · Four mode switch ·
Anti-back flow design · Lithium battery

FEATURES

4 MODES & 9 LEVELS: Mothers can try different modes(Multitronic Mode, Massage Mode, Express Mode & Suck simulate mode) and levels 1~9 to select the best way to pump.

Innovative Heating Mode: Featuring a built-in heating base (up to 40°C/104°F) delivers uniform heat through the soft flange for comforting warmth. Enhance milk flow, reduce clogs, and relieve breast tenderness, offering a comfortable pumping experience.

LOW NOISE: The breast pump electric is made with better design and craftsmanship. Noise is only 55 dB.


PORTABLE: It is wearable and fits in the bra, the rechargeable lithium battery allows you to pump anywhere and anytime.

COMPONENTS

Please check the following accessories before use, if there are missing or damaged pieces, please contact the supplier.


	Component Name	Materials	Operating Temperature	Sterilization Instruction
(a)	Motor	/	/	Wipe with soft duster
(b)	19/21/24mm Flange Insert	Silicone	-20°C/-4°F~200°C/392°F	Rinse in water/Not suitable for prolong sterilizing
(c)	Diaphragm Cover	PP	-20°C/-4°F~120°C/248°F	Boiling water/Microwave/Dishwasher/UV safe
(d)	Flange	Silicone PPSU	-20°C/-4°F~110°C/230°F	Rinse in water/Not suitable for prolong sterilizing
(e)	Diaphragm	Silicone	-20°C/-4°F~200°C/392°F	Rinse in water/Not suitable for prolong sterilizing
(f)	Duckbill Valve	Silicone	-20°C/-4°F~200°C/392°F	
(g)	Milk Collector	PP	-20°C/-4°F~120°C/248°F	Boiling water/Microwave/Dishwasher/UV safe
(h)	Storage Lid	PP PS	-20°C/-4°F~120°C/248°F -40°C/-40°F~149°C/300.2°F	
(i)	Bra Adjustment Buckle	/	/	Wipe with soft duster
(j)	Charging Cable	/	/	
	Instructions	/	/	/

Please clean and disinfect the parts used for food contact before and after each use.

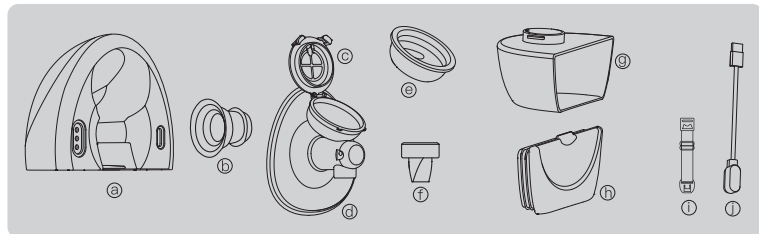


INSTALLATION


- Clean the pump and wash your hands before installation.

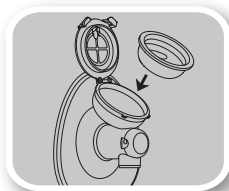


1. Place the diaphragm into the holder on the flange.

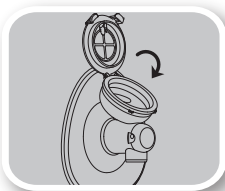


2. Close the flange cover, ensuring the diaphragm lies flat without wrinkles.

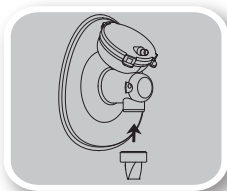


3. Insert the duckbill valve onto the flange. Push it in until fully seated.

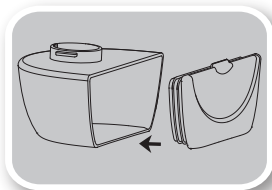


4. Fasten the storage lid to the mouth of the milk collector. Ensure it is properly assembled.

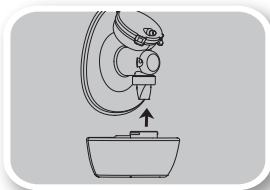

5. Assemble the breast milk collector with the flange.

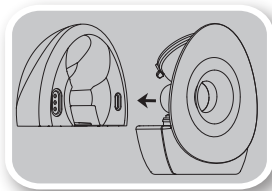

6. Assemble the motor and flange.

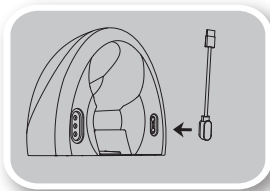


7. Place the charging head on the motor's charging position. Then insert the other end into the adapter (5V/1A adapter) socket and then connect the adapter to the power outlet.



WARNINGS

The breast pump will not work when charging.

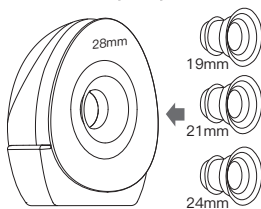


Measure your nipple size and choose the right flange size suit you the best.

19/21/24mm flange inserts are included in the box. Original pump body is 28mm.


INSTRUCTIONS FOR BRA ADJUSTING BUCKLE

Adjust the length of bra straps, make pumping more comfortable. One end of the bra adjustment buckle hung on the inside buckle of nursing bra. Tight bra buckle on the other end of bra adjustment buckle.

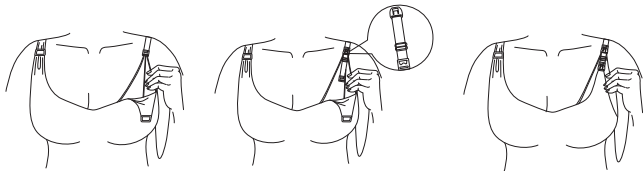

TO BEGIN PUMPING

Press the flange firmly against the breast, leave no gaps and make sure your nipples are centered. Keep it upright. Be careful not to distort the position of the product and the chest, otherwise the breast pump will not have suction.

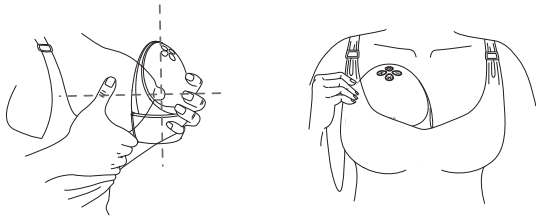


DISPLAY AND BUTTONS

Relax and sit in a comfortable chair, lean slightly forward (use a cushion for back support). Make sure to keep the breast pump and breast cup upright.



Sitting posture

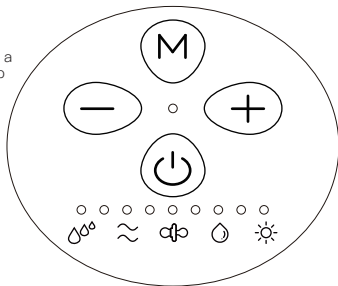

Button use instruction

	On/Off Button	Long press to turn on/down. Short press to pause/continue pumping session. Automatically shut down after pausing for 10 minutes. Note: When the motor is paused, the pump can continue heating function.
	Mode Switch Button	Short press to switch modes. Added built-in memory function, the pump will automatically enter the mode and suction level you used last time when the motor every time turned on. Note: Memory function DOES NOT automatically turn on heating function.
	Suction power switch button	To decrease/increase suction level. Heating level can not be adjusted.

Display Instruction


	Multitronic Mode	Variable frequency to get MORE milk.
	Massage Mode	Gentle STIMULATION to get milk flow.
	Suck Simulate Mode	Simulate NATURAL SUCKING of baby.
	Express Mode	Slow and deep sucking to EMPTY OUT .
	Heating Mode	Long press "M" button to turn on/off heating mode. Automatically stop heating after 10 minutes.

Light Display


○○○○○○○○	1 to 9 light indicators will indicate current mode and suction level when working.
○	Light in the middle of 4 buttons indicate battery power and charging process when charging.

TRANSFERRING MILK

1. When you finished pumping, long press “” to turn off the motor. Break the seal between the breast and the pump with your finger, and then carefully remove the pump from your breast.

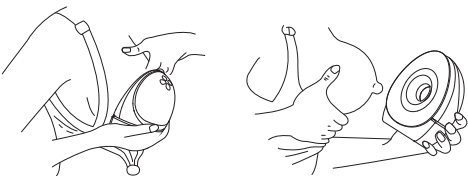


2. Remove the pump motor from the container. Shown in picture **A** and **B**, hold the motor with one hand and use the thumb of the other hand to pull the milk container edge outward to release the motor from the milk collector. Then remove the flange from the milk collector.

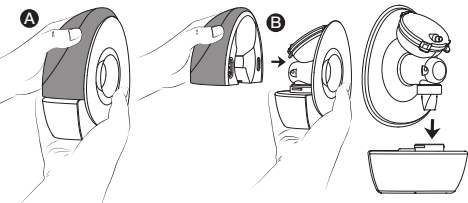

3. Tilt the container as shown in picture **C** to pour milk from the pouring spout into the bottle. Open the storage lid to completely empty the trapped milk then clean the collection cup.

Note: Do not exceed the maximum capacity line in the milk collector to prevent overflow. If breast milk reaches the line, immediately stop pumping. Replace the milk collector before continuing.

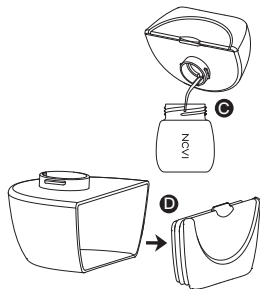

WORKING CONDITION

Rated temperature range: 5°C/41°F to 40°C/104°F

Rated relative humidity: 20%–80%

Rated atmospheric Pressure: 850Hpa – 1060Hpa

Long-term storage should be kept in a dry and cool place

TRANSPORT & STORAGE CONDITION

Temperature: –20°C/–4°F to 55°C/131°F

Humidity: 20% – 80%

Atmospheric pressure: 850Hpa – 1060Hpa



★ After cleaning and disinfection, the suction diaphragm must be dried before use.

HOW TO CHOOSE MODE

Based on professional research and study, NCVI electric breast pump uses two-stage milk suction mode to stimulate the true rhythm that is closest to the baby's suction. There are four different modes and nine levels of suction. The intensity of suction increases with each level increasing.

 **Multitronic Mode:** Variable frequency to get **MORE** milk.

 **Massage Mode:** Gentle **STIMULATION** to get milk flow.

 **Suck Simulate Mode:** Simulate **NATURAL SUCKING** of baby.

 **Express Mode:** Slow and deep sucking to **EMPTY OUT**.

1 Min Massage Mode → Suck Simulate Mode “  ” → “  ”	Painless Pumping for Daily Use
1 Min Massage Mode → Express Mode “  ” → “  ”	Express Pumping for A Tight Schedule
1 Min Multitronic Mode → Express Mode “  ” → “  ”	Exclusive Combination for Oversupplyer
↓ ↓ ↓ There is a SPECIAL INGREDIENT for new moms who cannot produce much breastmilk at the beginning. Please relax yourself then try this combination below. ↓ ↓ ↓	
1 Min Massage Mode → 1 Min Multitronic Mode → Express Mode “  ” → “  ” → “  ”	Try it with a comfortable suction level

* How to use:

1. Ensure all parts of the breast pump were sterilized and installed correctly.
2. Please wash your hands and use a hot wet towel to massage your breast before use.
3. Press the flange firmly against the breast, leave no gaps and make sure your nipples are centered.
4. Keep it upright. Be careful not to distort the position of the product and the chest, otherwise the breast pump will have no suction.
5. Long press the power button to start. Choose the suction that makes you comfortable.

* Tips:

We suggest moms to try different modes and suction according to your actual breastfeeding situation. It is recommended to use the heating function with different pumping modes to make pumping process more comfort and to increase efficiency.

Note:

This breast pump will automatic turn off after working 30 minutes.



CAUTIONS

1. Please read the manual carefully before use.
2. Please fully charge the product before first use. Do not charge the battery pack for long time. Lithium batteries can only be replaced by NCVI or authorized service providers, and replacing the wrong model battery will have explosion dangers. Dispose the waste battery packs under local laws and regulations.
3. If the product is not used for a long time, the battery will run out of power. It needs to be plugged in for reactivation. wait for ten minutes for the light to indicate that is has been activated. Then continue charge the product till fully charged. If it is not activated for more than half an hour, please consult customer service.
4. The pump motor and other electric parts CAN NOT be washed in water or sterilized into steam sterilizer.
5. Please use the charging cable provided with this product. Do not plug the charging cable of any other manufacturer into the motor for use, so as not to cause damage to the motor.
6. Please use DC adapter, select the adapter with input voltage AC100–240V and output DC 5V and 1A.
7. This appliance can be used by person with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

CHARGING METHOD

1. Please ensure the motor is turned off before charging.
 2. Connect the magnetic charging head to the motor's charging position.
 3. Plug the other end into adaptor(adaptor not included).
 4. Insert the adaptor into power outlet.
- The battery indicator light flashes red when charging and turns green when fully charged.

Warning: The breast pump has built-in lithium battery. Please DO NOT self-disassemble the battery to avoid damage to the motor.

BATTERY DISPLAY

1. Green Light: Battery level is above 66%.
 2. Yellow Light: Battery level is above 33%.
 3. Red Light: Battery level is below 33%. Need to charge promptly.
- When the battery power is critically insufficient, the indicator light will flash red, and the motor will stop working after 3 seconds.

TROUBLE SHOOTING

Too little or no suction

- A. Check if all components are installed correctly.
- B. Check if the centre of flange aligns the nipple and clings to breasts, make sure no air entry.

NO HEATING

- A. Heating mode light indicator will flash red.
- B. Check if the heating base is properly assembled.

STORING BREAST MILK

Breast milk should be sealed and stored in refrigerator for long time storage.

Storage Ways	Storage Temperature	Longest Storage Time
Room	19°C/66.2°F-26°C/78.8°F	4-6 Hours
Refrigerator	<4°C/39.2°F	3-8 Days
Freezer	-15°C/5°F	14 Days
	-18°C/-0.4°F	3-6 Months
	-20°C/-4°F	3-6 Months

TO WARM MILK

1. In order to preserve the nutrition of the breast milk, you can warm the breast milk with 40°C/104°F warm water or use a NCVI bottle warmer.
2. Do not thaw frozen breast milk in the microwave oven or the boiling water (will damage the nutrition of breast milk).

SAFETY CLASSIFICATION

Properly dispose of the device in accordance with local, state and federal regulations Safety Classification.

—Type of protection against electric shock: Internally powered equipment.


—Degree of protection against electric shock: Type BF applied part.

—Safety degree of using in flammable anesthetic gas blending with air, oxygen or nitrous oxide: Non-AP/APG.

—Continuous or Non-continuous operation: Continuous.

—Classification of sterilization methods:

No need for sterilization.

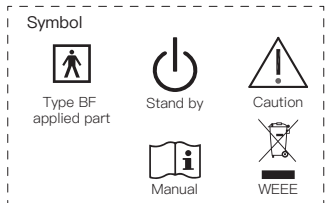

PRODUCT SPECIFICATIONS

Name	Wearable breast pump	Model	AM8161	Battery Specification	3.7V 2000mAh
Warranty Time	1 year	Place of Origin	China		
Voltage	5V	Power	5W	Quantity	1pc

GUIDANCE AND MANUFACTURER'S DECLARATION

Below cables information are provided for EMC reference.

Cable	Max. cable length, Shielded/unshielded		Number	Cable classification
Type-C Power Line	0.6m	Unshielded	1 Set	Type-C Power

Important information regarding Electro Magnetic Compatibility (EMC)

This electrical medical equipment needs special precautions regarding EMC and put into service according to the EMC information provided in the user manual; The equipment conforms to this IEC 60601-1-2:2014 standard for both immunity and emissions. Nevertheless, special precautions need to be observed:

- The equipment with no ESSENTIAL PERFORMANCE is intended used in Home healthcare environment.
- **WARNING:** Use of this equipment adjacent to or stacked with other equipment should be avoided because it could result in improper operation. If such use is necessary, this equipment and the other equipment should be observed to verify that they are operating normally”.
- The use of accessories, transducers and cables other than those specified or provided by the manufacturer of this equipment could result in increased electromagnetic emissions or decreased electromagnetic immunity of this equipment and result in improper operation.
- **WARNING:** Portable RF communications equipment (including peripherals such as antenna cables and external antennas) should be used no closer than 30 cm (12 inches) to any part of the the equipment, including cables specified by the manufacturer. Otherwise, degradation of the performance of this equipment could result.”
- **WARNING:** If the use location is near (e.g. less than 1.5 km from) AM, FM or TV broadcast antennas, before using this equipment, it should be observed to verify that it is operating normally to assure that the equipment remains safe with regard to electromagnetic disturbances throughout the expected service life.

EMI Compliance Table (Table 1)

Table 1 – Emission

Phenomenon	Compliance	Electromagnetic environment
RF emissions	CISPR 11 Group 1, Class B	Home healthcare environment
Harmonic distortion	IEC 61000–3–2 Class A	Home healthcare environment
Voltage fluctuations and flicker	IEC 61000–3–3 Compliance	Home healthcare environment

EMS Compliance Table (Table 2–5)

Table 2 – Enclosure Port

Phenomenon	Basic EMC standard	Immunity test levels
		Home healthcare environment
Electrostatic Discharge	IEC 61000–4–2	±8 kV contact ±2kV, ±4kV, ±8kV, ±15kV air
Radiated RF EM field	IEC 61000–4–3	10V/m 80MHz–2.7GHz 80% AM at 1kHz
Proximity fields from RF wireless communications equipment	IEC 61000–4–3	Refer to table 3
Rated power frequency magnetic fields	IEC 61000–4–8	30A/m 50Hz or 60Hz

Table 3 — Proximity fields from RF wireless communications equipment

Test frequency (MHz)	Band (MHz)	Immunity test levels
		Home healthcare environment
385	380–390	Pulse modulation 18Hz, 27V/m
450	430–470	FM, ± 5 kHz deviation, 1kHz sine, 28V/m
710	704–787	Pulse modulation 217Hz, 9V/m
745		
780		
810		
870	800–960	Pulse modulation 18Hz, 28V/m
930		
1720		
1845		
1970	1700–1990	Pulse modulation 217Hz, 28V/m
2450		
5240		
5500		
5785	5100–5800	Pulse modulation 217Hz, 9V/m

Table 4 — Input a.c. power Port

Phenomenon	Basic EMC standard	Immunity test levels
		Home healthcare environment
Electrical fast transients/burst	IEC 61000–4–4	± 2 kV 100kHz repetition frequency
Surges Line-to-line	IEC 61000–4–5	± 0.5 kV, ± 1 kV
Conducted disturbances induced by RF fields	IEC 61000–4–6	3V, 0.15MHz–80MHz 6V in ISM bands and amateur radio bands between 0.15MHz and 80MHz 80%AM at 1kHz
Voltage dips	IEC 61000–4–11	0% U_r ; 0.5 cycle At 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° and 315°
		0% U_r ; 1 cycle and 70% U_r ; 25/30 cycles Single phase: at 0°
Voltage interruptions	IEC 61000–4–11	0% U_r ; 250/300 cycles

Table 5 — Signal input/output parts Port

Phenomenon	Basic EMC standard	Immunity test levels
		Home healthcare environment
Conducted disturbances induced by RF fields	IEC 61000–4–6	3V, 0.15MHz–80MHz 6V in ISM bands and amateur radio bands between 0.15MHz and 80MHz 80%AM at 1kHz

WARRANTY CARD

Thank you for purchasing our product. Please keep your receipt as proof of purchase for any warranty claim.

Battery and motor can only be replaced by authorized party.

For repair or replacement of battery and motor, please scan QR code.



You can also visit our website
[Https: //www.ncvi.co](https://www.ncvi.co) for more information.
If you have any question,
please email us at ncvi_amz@xenbea.com.

NOTICE

- 1.This product comes with 1 YEAR warranty. Please contact the MANUFACTURER for warranty claims.
- 2.This warranty does not cover defects caused by: misuse, abuse, improper storage/alteration of the product, use of improper components, failure to comply with the operating instructions using the accessories supplied with the product, or normal wear and tear.
- 3.The user of this product assumes all responsibility and risk for the use of this product.
- 4.WARNING: No modification of this equipment is allowed.

Jiangsu Xinbei Electrical Appliances Co., Ltd.

Add: No. 115 Xinjin Road, Xinwu District, Wuxi City, Jiangsu Province, China.

Tel: +1(818)291-3826

[Https: //www.ncvi.co](https://www.ncvi.co)

E-MAIL: ncvi_amz@xenbea.com

Please read the manual carefully before use.

Please store the product where children can not reach.




NCVI

Extractor de Leche Portátil

—— Manual de usuario ——



Vídeo de instalación

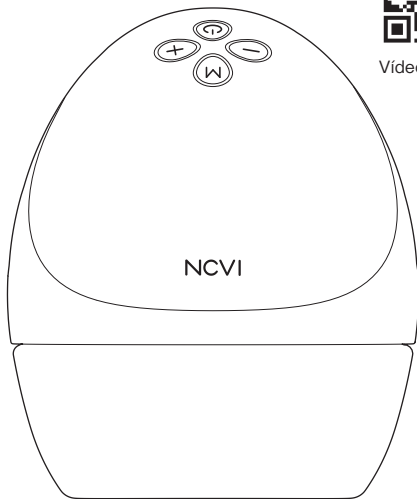

Modo Calefacción · Interruptor de cuatro modos ·
Diseño anti-retorno · Batería de litio

CARACTERÍSTICAS

4 MODOS Y 9 NIVELES: Las madres pueden probar diferentes modos (Modo Multitronic, Modo Masaje, Modo Express y Modo de simulación de succión) y niveles 1~9 para seleccionar la mejor forma de extraerse leche.

Modo de calentamiento innovador: con una base calefactora integrada (hasta 40 °C/104 °F) que proporciona un calor uniforme a través de la suave abrazadera para una calidez reconfortante. Mejora el flujo de leche, reduce los atascos y alivia la sensibilidad mamaria, ofreciendo una experiencia de extracción cómoda.

BAJO RUIDO: El sacaleches eléctrico está fabricado con mejor diseño y artesanía. El ruido es de sólo 55 dB.


PORTÁTIL: Es fácil de llevar y cabe en el sujetador. La batería recargable de litio te permite bombear en cualquier lugar y en cualquier momento.

COMPONENTES

Compruebe los siguientes accesorios antes de utilizarlos, si faltan piezas o están dañadas, póngase en contacto con el proveedor.


	Nombre del componente	Materiales	Temperatura de funcionamiento	Instrucciones de Esterilización
Ⓐ	Motor	/	/	Limpie con un plumero suave
Ⓑ	Inserto de brida de 19/21/24 mm	Silicona	-20°C/-4°F~200°C/392°F	Enjuagar en agua/No apto para esterilización prolongada
Ⓒ	Cubierta de Diafragma	PP	-20°C/-4°F~120°C/248°F	Apto para agua hirviendo/microondas/lavavajillas/UV
Ⓓ	Brida	Silicona PPSU	-20°C/-4°F~110°C/230°F	Enjuagar en agua/No apto para esterilización prolongada
Ⓔ	Diafragma	Silicona	-20°C/-4°F~200°C/392°F	Enjuagar en agua/No apto para esterilización prolongada
Ⓕ	Válvula Duckbill	Silicona	-20°C/-4°F~200°C/392°F	Enjuagar en agua/No apto para esterilización prolongada
Ⓖ	Recolector de leche	PP	-20°C/-4°F~120°C/248°F	Apto para agua hirviendo/microondas/lavavajillas/UV
Ⓗ	Tapa de almacenamiento	PP PS	-20°C/-4°F~120°C/248°F -40°C/-40°F~149°C/300.2°F	
Ⓘ	Hebilla de ajuste del sujetador	/	/	Limpie con un plumero suave
⓷	Cable de carga	/	/	
	Instrucciones	/	/	/

Limpie y desinfecte las piezas en contacto con alimentos antes y después de cada uso.

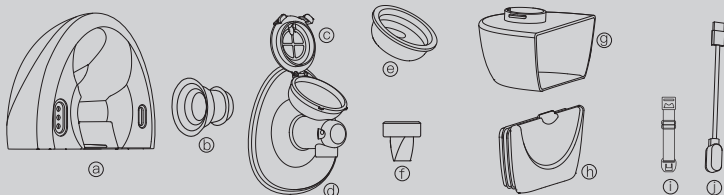


INSTALACIÓN


- Limpie la bomba y lávese las manos antes de la instalación.

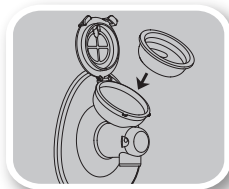


1. Coloque el diafragma en el soporte de la brida.

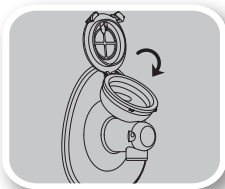


2. Cierre la tapa de la brida, asegurándose de que el diafragma quede plano y sin arrugas.

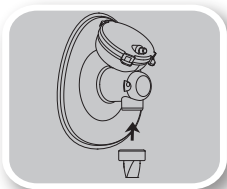


3. Inserte la válvula de pico de pato en la brida. Empújela hasta que quede completamente asentada.

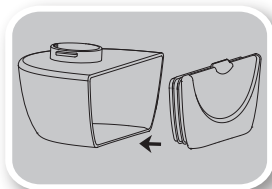


4. Fije la tapa de almacenamiento a la boca del colector de leche. Asegúrese de que esté correctamente montada.

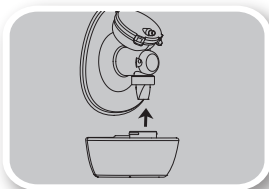

5. Ensamble el colector de leche materna con la brida.

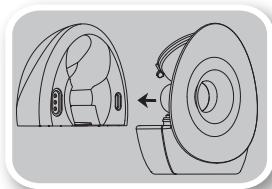

6. Monte el motor y la brida.

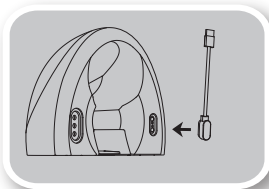


7. Coloque el cabezal de carga en la posición de carga del motor. A continuación, inserte el otro extremo en la toma del adaptador (adaptador de 5 V/1 A) y conecte el adaptador a la toma de corriente.



ADVERTENCIAS

El extractor de leche no funcionará durante la carga.

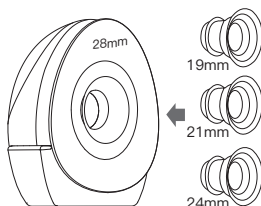


Mida el tamaño de su pezón y elija el tamaño de brida adecuado para usted.

En la caja se incluyen insertos de brida de 19/21/24 mm mm. El cuerpo de la bomba original es de 28 mm.


INSTRUCCIONES PARA AJUSTAR LA HEBILLA DEL SUJETADOR

Ajuste la longitud de los tirantes del sujetador, haga que el bombeo sea más cómodo. Un extremo de la hebilla de ajuste del sujetador colgaba de la hebilla interior del sujetador de lactancia. Hebilla de sujetador apretada en el otro extremo de la hebilla de ajuste del sujetador.

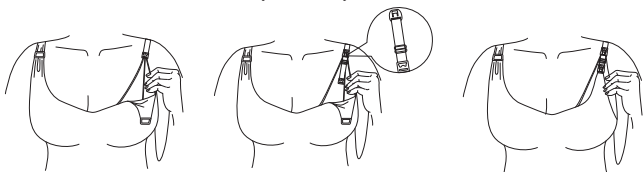

PARA EMPEZAR A BOMBEAR

Presione el reborde firmemente contra el pecho, no deje espacios y asegúrese de que sus pezones estén centrados. Manténlo en posición vertical. Tenga cuidado de no distorsionar la posición del producto y del pecho, de lo contrario el extractor de leche no tendrá succión.

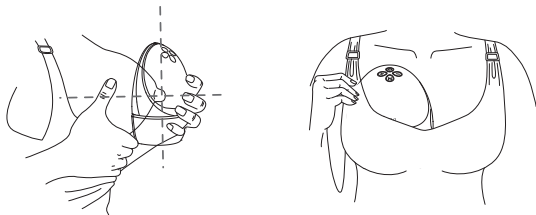


DISPLAY Y BOTONES

Relájese y siéntese en una silla cómoda, inclínese ligeramente hacia adelante (use un cojín como apoyo para la espalda). Asegúrese de mantener el extractor de leche y la copa para el pecho en posición vertical.



Postura sentada

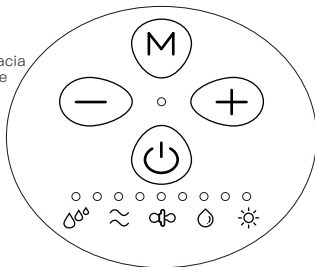

Instrucciones de uso de los botones

	Botón de encendido/apagado	Mantenga pulsado para encender/apagar. Pulse brevemente para pausar /continuar la sesión de bombeo. Se apaga automáticamente tras 10 minutos en pausa. Nota: Cuando el motor está en pausa, la bomba puede continuar con la función de calentamiento.
M	Botón de cambio de modo	Pulse brevemente para cambiar de modo. Se ha añadido una función de memoria integrada, por lo que la bomba entrará automáticamente en el modo y el nivel de succión que utilizó la última vez cada vez que se encienda el motor. Nota: La función de memoria NO activa automáticamente la función de calentamiento.
+ -	Botón interruptor de potencia de succión	Para disminuir/aumentar el nivel de succión. El nivel de calentamiento no se puede ajustar.

Instrucciones de visualización

	Modo Multitronic	Frecuencia variable para obtener MÁS leche.
	Modo Masaje	ESTIMULACIÓN suave para que la leche fluya.
	Modo de Simulación	Simula la SUCCIÓN NATURAL del bebé.
	Modo Exprés	Chupada lenta y profunda hasta VACIARSE .
	Modo Calefacción	Mantenga pulsado el botón "M" para activar o desactivar el modo de calentamiento. El calentamiento se detiene automáticamente después de 10 minutos.

Indicador luminoso


o o o o o o o o	De 1 a 9 indicadores luminosos indicarán el modo actual y el nivel de succión durante el funcionamiento.
o	La luz situada en el centro de los 4 botones indica la carga de la batería y el proceso de carga cuando se está cargando.

TRANSFERENCIA DE LECHE

1. Cuando haya terminado de extraer leche, mantenga pulsado "⏻" para apagar el motor. Rompa el sello entre el pecho y el sacaleches con el dedo y, a continuación, retire con cuidado el sacaleches del pecho.




2. Retire el motor de la bomba del recipiente. Como se muestra en las imágenes A y B, sujete el motor con una mano y utilice el pulgar de la otra mano para tirar del borde del recipiente de leche hacia fuera y liberar el motor del colector de leche. A continuación, retire la brida del colector de leche.

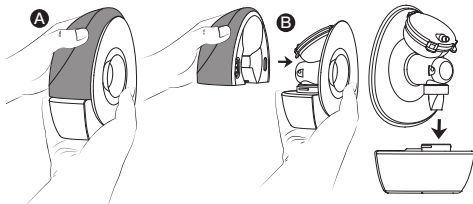

3. Incline el recipiente como se muestra en la imagen C para verter la leche desde la boquilla de vertido en el biberón. Abra la tapa de almacenamiento para vaciar completamente la leche atrapada y luego limpie el recipiente colector.

Nota: No exceda la línea de capacidad máxima del colector de leche para evitar desbordamientos. Si la leche materna alcanza la línea, detenga inmediatamente el bombeo. Reemplace el colector de leche antes de continuar con el bombeo.

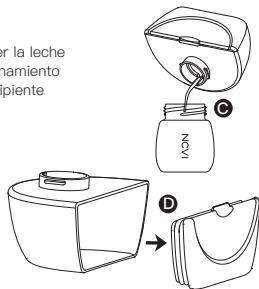

CONDICIONES DE TRABAJO

Rango de temperatura nominal: 5°C/41°F a 40°C/104°F

Humedad relativa nominal: 20%–80%

Presión atmosférica nominal: 850Hpa – 1060Hpa

El almacenamiento a largo plazo debe mantenerse en un lugar seco y fresco

CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Temperatura: –20°C/–4°F a 55°C/131°F

Humedad: 20% – 80%.

Presión atmosférica: 850Hpa – 1060Hpa



★ Después de la limpieza y desinfección, el tubo de succión debe secarse antes de su uso.

CÓMO ELEGIR EL MODO

Basado en investigaciones y estudios profesionales, el extractor de leche eléctrico NCVI utiliza un modo de succión de leche de dos etapas para estimular el ritmo real más cercano a la succión del bebé. Hay cuatro modos diferentes y nueve niveles de succión. La intensidad de la succión aumenta con cada nivel.

 **Modo Multitronic:** Frecuencia variable para obtener **MÁS** leche.

 **Modo Masaje:** ESTIMULACIÓN suave para que la leche fluya.

 **Modo de Simulación:** Simula la **SUCCIÓN NATURAL** del bebé.

 **Modo Exprés:** Chupada lenta y profunda hasta **VACIARSE**.

1 Min Modo Masaje → Modo de Simulación de Succión “  ” → “  ”	Bombeo indoloro para uso diario
1 Min Modo Masaje → Modo Exprés “  ” → “  ”	Extracción exprés para una agenda apretada
1 Min Modo Multitronic → Modo Exprés “  ” → “  ”	Combinación exclusiva para Oversupplier
↓ ↓ ↓ Hay un INGREDIENTE ESPECIAL para las nuevas mamás que no pueden producir mucha leche materna al principio. Relájese y pruebe esta combinación. ↓ ↓ ↓	
1 Min Modo Masaje → 1 Min Modo Multitronic → Modo Exprés “  ” → “  ” → “  ”	Pruébalo con un nivel de succión cómodo

* Cómo se usa:

1. Asegúrese de que todas las piezas del sacaleches fueron esterilizadas e instaladas correctamente.
2. Por favor, lávese las manos y utilice una toalla húmeda y caliente para masajear el pecho antes de usarlo.
3. Presione la brida firmemente contra el pecho, no deje huecos y asegúrese de que sus pezones están centrados.
4. Manténgalo en posición vertical. Tenga cuidado de no distorsionar la posición del producto y el pecho, de lo contrario el sacaleches no tendrá succión.
5. Pulse prolongadamente el botón de encendido para ponerlo en marcha. Elija la succión que le resulte más cómoda.

* Consejos:

We suggest moms to try different modes and suction according to your actual breastfeeding situation. Se recomienda utilizar la función de calentamiento con diferentes modos de bombeo para que el proceso de bombeo sea más cómodo y aumentar la eficiencia.

Nota:

Este extractor de leche se apagará automáticamente después de funcionar 30 minutos.



PRECAUCIONES

1. Lea atentamente el manual antes de utilizar el aparato.
2. Cargue completamente el producto antes del primer uso. No cargue la batería durante mucho tiempo. Las baterías de litio solo pueden ser reemplazadas por NCVI o proveedores de servicios autorizados, y reemplazar el modelo de batería incorrecto tendrá peligro de explosión. Deseche los paquetes de baterías usados según las leyes y regulaciones locales.
3. Si el producto no se utiliza durante un período prolongado, la batería se agotará. Es necesario enchufarlo para reactivarlo. Espere diez minutos hasta que la luz indique que se ha activado. Luego continúe cargando el producto hasta que esté completamente cargado. Si no se activa durante más de media hora, consulta con atención al cliente.
4. El motor de la bomba y otras piezas eléctricas NO PUEDEN lavarse en agua ni esterilizarse en esterilizador de vapor.
5. Utilice el cable de carga suministrado con este producto. No enchufe el cable de carga de ningún otro fabricante en el motor para su uso, para no causar daños al motor.
6. Por favor, utilice un adaptador DC, seleccione el adaptador con voltaje de entrada AC100–240V y salida DC 5V y 1A.
7. Este aparato puede ser utilizado por personas con discapacidad física, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.

MÉTODO DE CARGA

1. Asegúrese de que el motor esté apagado antes de cargarlo.
2. Conecte el cabezal de carga magnético a la posición de carga del motor.
3. Enchufe el otro extremo al adaptador (adaptador no incluido).
4. Enchufe el adaptador a la toma de corriente.

La luz indicadora de la batería parpadea en rojo durante la carga y se vuelve verde cuando está completamente cargada.

Advertencia: El sacaleches tiene una batería de litio incorporada. NO desmonte la batería para evitar daños en el motor.

INDICADOR DE BATERÍA

1. Luz verde: el nivel de batería es superior al 66 %.
 2. Luz amarilla: el nivel de batería es superior al 33 %.
 3. Luz roja: el nivel de batería es inferior al 33 %. Es necesario cargarla inmediatamente.
- Cuando la batería se encuentra en un nivel crítico, el indicador luminoso parpadeará en rojo y el motor dejará de funcionar tras 3 segundos.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Muy poca o ninguna succión

- A. Compruebe si todos los componentes están instalados correctamente.
- B. Compruebe si el centro de la brida alinea la tetina y se adhiere a los pechos, asegúrese de que no hay entrada de aire.

SIN CALENTAMIENTO

- A. El indicador luminoso del modo de calentamiento parpadeará en rojo.
- B. Compruebe si la base calefactora está correctamente montada.

ALMACENAMIENTO DE LA LECHE MATERNA

La leche materna debe sellarse y almacenarse en el refrigerador para un almacenamiento prolongado.

Formas de almacenamiento	Temperatura de almacenamiento	Mayor tiempo de almacenamiento
Habitación	19°C/66.2°F-26°C/78.8°F	4-6 horas
Refrigerador	<4°C/39.2°F	3-8 días
Congelador	-15°C/5°F	14 días
	-18°C/-0.4°F	3-6 meses
	-20°C/-4°F	3-6 meses

PARA CALENTAR LA LECHE

1. Para preservar la nutrición de la leche materna, puede calentar la leche materna con agua tibia a 40°C/104°F o usar un calentador de biberones NCVI.
2. No descongele la leche materna congelada en el horno microondas ni en agua hirviendo (dañará la nutrición de la leche materna).

CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD

Deseche el dispositivo de forma adecuada de acuerdo con las normativas locales, estatales y federales.

Clasificación de seguridad.

— Tipo de protección contra descargas eléctricas: Equipo de con alimentación interna.

— Grado de protección contra descargas eléctricas: Pieza aplicada tipo BF.

— Grado de seguridad de uso en mezclas de gases anestésicos inflamables con aire, oxígeno u óxido nítrico: No es AP/APG. — Funcionamiento continuo o no continuo: Continuo.

— Clasificación de los métodos de esterilización: No hay necesidad de esterilización.



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Nombre	Extractor de leche portátil	Modelo	AM8161	Especificación de la batería	3.7V 2000mAh
Tiempo de garantía	1 año	Lugar de origen	China		
Tensión	5V	Potencia	5W	Cantidad	1pc

ORIENTACIÓN Y DECLARACIÓN DEL FABRICANTE

A continuación se ofrece información sobre los cables como referencia de compatibilidad electromagnética.

Cable	Longitud máxima del cable, Cubierto/Sin Cubrir		Número	Clasificación del cable
Línea de alimentación Type-C	0.6m	Sin Cubierta	1 Set	Alimentación Type-C

Información importante relativa a la compatibilidad electromagnética (EMC)

Este equipo electro-médico necesita precauciones especiales en relación con la EMC y ponerse en servicio de acuerdo con la información sobre EMC proporcionada en el manual del usuario; El equipo cumple con esta norma IEC 60601-1-2:2014 tanto para la inmunidad como para las emisiones. No obstante, es necesario observar precauciones especiales:

- El equipo sin FUNCIONAMIENTO ESENCIAL está destinado a ser utilizado en un entorno de asistencia sanitaria domiciliaria.
- **ADVERTENCIA:** Debe evitarse el uso de este equipo junto a otros o apilado con ellos, ya que podría provocar un funcionamiento incorrecto. Si tal uso es necesario, este equipo y el otro equipo deben ser observados para verificar que funcionan con normalidad".
- El uso de accesorios, transductores y cables distintos de los especificados o suministrados por el fabricante de este equipo podría provocar un aumento de las emisiones electromagnéticas o una disminución de la inmunidad electromagnética de este equipo y dar lugar a un funcionamiento incorrecto.
- **ADVERTENCIA:** Los equipos portátiles de comunicaciones por RF (incluidos los periféricos como cables de antena y antenas externas) no deben utilizarse a menos de 30 cm (12 pulgadas) de cualquier parte del equipo, incluidos los cables especificados por el fabricante. De lo contrario, podría degradarse el rendimiento de este equipo."
- **ADVERTENCIA:** Si el lugar de uso está cerca (por ejemplo, a menos de 1,5 km) de antenas de emisión de AM, FM o TV, antes de utilizar este equipo, debe observarse para verificar que funciona con normalidad a fin de garantizar que el equipo siga siendo seguro con respecto a las perturbaciones electromagnéticas durante toda la vida útil prevista.

Tabla de conformidad EMI (Tabla 1)

Tabla 1 – Emisión

Fenómeno	Conformidad	Entorno electromagnético
Emisiones de RF	CISPR 11 Grupo 1, Clase B	Entorno sanitario doméstico
Distorsión armónica	IEC 61000-3-2 Clase A	Entorno sanitario doméstico
Fuctuaciones de tensión y picos de tensión	IEC 61000-3-3 conformidad	Entorno sanitario doméstico

Tabla de conformidad EMS (Tabla 2-5)

Tabla 2 – Puerto

Fenómeno Electrostático	EMC Básico Estándar	Niveles de las pruebas de inmunidad
		Entorno sanitario domiciliario
Descarga electrostática	IEC 61000-4-2	±8 kV contact ±2kV, ±4kV, ±8kV, ±15kV air
Campo electromagnético RF radiado	IEC 61000-4-3	10V/m 80MHz-2.7GHz 80% AM at 1kHz
Campos de proximidad de equipos de comunicaciones inalámbricas RF	IEC 61000-4-3	Refer to table 3
Campos magnéticos de frecuencia de potencia nominal	IEC 61000-4-8	30A/m 50Hz or 60Hz

Tabla 3 – Campos de proximidad de los equipos de comunicaciones inalámbricas por radiofrecuencia

Prueba de frecuencia (MHz)	Banda (MHz)	Niveles de las pruebas de inmunidad
		Entorno sanitario doméstico
385	380–390	Modulación de impulsos 18Hz, 27V/m
450	430–470	FM, ± 5 kHz de desviación, 1kHz sinusoidal, 28V/m
710	704–787	Modulación de impulsos 217Hz, 9V/m
745		
780		
810	800–960	Modulación de impulsos 18Hz, 28V/m
870		
930		
1720	1700–1990	Modulación de impulsos 217Hz, 28V/m
1845		
1970		
2450	2400–2570	Modulación de impulsos 217Hz, 28V/m
5240	5100–5800	Modulación de impulsos 217Hz, 9V/m
5500		
5785		

Tabla 4 – Potencia de entrada puerto de AC

Fenómeno	EMC Básico Estándar	Niveles de las pruebas de inmunidad
		Entorno sanitario doméstico
Eléctricos rápidos Transitorios/ráfagas	IEC 61000–4–4	± 2 kV Frecuencia de repetición de 100 kHz
Sobretensiones Línea a línea	IEC 61000–4–5	$\pm 0,5$ kV, ± 1 kV
Conducido Perturbaciones Inducidas por campos de RF	IEC 61000–4–6	3V, 0,15MHz–80MHz 6V en bandas ISM y bandas de radioaficionados entre 0,15MHz y 80MHz 80%AM a 1kHz
Caídas de tensión	IEC 61000–4–11	0% UT; 0,5 ciclo A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°y 315°
		0% UT; 1 ciclo y 70% UT; 25/30 ciclos Monofásico: a 0°
Interrupciones de tensión	IEC 61000–4–11	0% UT; 250/300 ciclos

Tabla 5 – Partes de entrada/salida de señales Puerto

Fenómeno	EMC básico estándar	Niveles de las pruebas de inmunidad
		Entorno sanitario domiciliario
Conducido Perturbaciones Inducidas por campos de radiofrecuencia	IEC 61000–4–6	3V, 0,15MHz–80MHz 6V en bandas ISM y radioaficionados Bandas entre 0,15MHz y 80MHz 80%AM a 1kHz

TARJETA DE GARANTÍA

Gracias por comprar nuestro producto. Por favor, guarde su recibo como prueba de compra para cualquier reclamación de garantía.

La batería y el motor solo pueden ser reemplazados por una persona autorizada.

Para reparación o reemplazo de batería y motor, escanee el código QR.



También puedes visitar nuestra web
[Https://www.ncvi.co](https://www.ncvi.co) para más información.

Si tienes alguna duda,
envíenos un correo electrónico a ncvi_amz@xenbea.com.

AVISO

1. Este producto tiene 1 AÑO de garantía. Por favor, póngase en contacto con el FABRICANTE para los reclamos de garantía.
2. Esta garantía no cubre los defectos causados por: mal uso, abuso, almacenamiento/alteración incorrecta del producto, uso de componentes inadecuados, incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento utilizando los accesorios suministrados con el producto, o desgaste normal.
3. El usuario de este producto asume toda la responsabilidad y el riesgo por el uso de este producto.
4. ADVERTENCIA: No se permite la modificación de este material.

Jiangsu Xinbei Electrodomésticos Co., Ltd.

Añadir: No. 115 Xinjin Road, distrito de Xinwu, ciudad de Wuxi, provincia de Jiangsu, China.

Teléfono: +1(818)291-3826

<https://www.ncvi.co>

CORREO ELECTRÓNICO: ncvi_amz@xenbea.com



Lea atentamente el manual antes de utilizar el aparato.

Por favor, guarde el producto donde los niños no puedan alcanzarlo.