de

MoBaLux Duschklappsitz

Artikel-Nr.: 3013972

Montage- / Bedienungsanleitung

BEDEUTUNG DER VERWENDETEN KENNZEICHNUNGEN

Farblich hinterlegte Sicherheitshinweise sind zwingend zu befolgen!

☞ Dieses Symbol steht für Hinweise und Empfehlungen.

[ ] Verweis auf eine Bildnummer.

( ) Verweis auf ein Funktionselement innerhalb eines Bildes.

EINLEITUNG

Lesen und beachten Sie vor der erstmaligen Inbetriebnahme dieses Dokument.

Kinder und Jugendliche sollten dieses Dokument vor dem erstmaligen Gebrauch ggf. zusammen mit den Eltern bzw. einer Aufsichts- oder Begleitperson lesen.

Ihr Fachhändler sollte Sie zusätzlich in die Benutzung Ihres Duschklappsitzes einweisen.

Die vorliegende Montage- / Gebrauchsanleitung soll Ihnen helfen, sich mit der Handhabung Ihres Duschklappsitzes vertraut zu machen sowie Unfälle zu vermeiden.

☞ Die abgebildeten Ausstattungsvarianten können von Ihrem Modell abweichen.

Benutzer mit Sehbehinderung finden die PDF-Dateien zusammen mit weiteren Informationen über unsere Produkte auf unserer Webseite unter:

< *www.meyra.com* >.

☞ Wenden Sie sich bei Bedarf an Ihren Fachhändler.

Alternativ können sich Benutzer mit Sehbehinderung die Dokumentationen von einer Hilfsperson vorlesen lassen.

Informieren Sie sich regelmäßig über die Produktsicherheit und mögliche Rückrufaktionen unserer Produkte im < *Infozentrum* > auf unserer Webseite:
< *www.meyra.com* >.

Wir haben ein Produkt entwickelt, das die technischen und gesetzlichen Vorgaben für Medizinprodukte erfüllt. Für die Mitteilung eines dennoch nicht auszuschließenden schwerwiegenden Vorfalls nutzen Sie bitte unsere Emailadresse < *info@meyra.de* > und informieren die zuständige Behörde Ihres Mitgliedstaates.

MODELLAUFZÄHLUNG

Diese Montage- / Gebrauchsanleitung ist für folgende Modelle gültig:

Modell 3013972 Duschklappsitz

INDIKATIONEN / KONTRAINDIKATIONEN

Bei allergischen Reaktionen, Hautrötungen und/oder Druckstellen bei der Verwendung des Duschklappsitzes ist unverzüglich ein Arzt aufzusuchen.

Der Duschklappsitz dient zur Verbesserung der selbstständigen Ausübung der Körperpflege für Personengruppen mit nicht zwingend krankheitsbedingten Mobilitätseinschränkungen (eingeschränkte Muskelkraft, starke Bewegungseinschränkungen, Gliedmaßenverluste, Gehunfähigkeit oder starke Einschränkung der Gehfähigkeit).

Der Duschklappsitz darf nicht eingesetzt werden bei:

- Unfähigkeit zum Sitzen.
- Starken Gleichgewichts- und/oder Wahrnehmungsstörungen.
- Kognitiven Einschränkungen und mentaler Retardierung, die ein selbstständiges Nutzen der Sitzhilfen ausschließen.
- Einfluss beeinträchtigender Medikamente (Rücksprache mit Arzt oder Apotheker).

Der Duschklappsitz darf nur mit Hilfsperson eingesetzt werden bei:

- Nicht ausreichender Sehfähigkeit.
- Unkontrollierbaren Gleichgewichts- und/oder Bewegungsstörungen.
- Fehlenden Fähigkeiten selbstständig aufzustehen.

☞ Zu diesen und weiteren möglichen Risiken mit diesem Produkt fragen Sie Ihren Arzt, Therapeuten oder Fachhändler.

EMPFANG

Alle Produkte werden bei uns im Werk auf Fehlerfreiheit geprüft und in Spezialkartons verpackt.

☞ Wir möchten Sie dennoch bitten, den Duschklappsitz sofort nach Erhalt – am besten im Beisein des Überbringers – auf eventuelle während des Transportes aufgetretene Schäden zu überprüfen.

☞ Die Verpackung des Duschklappsitzes sollte für einen eventuell später notwendigen Transport aufbewahrt werden.

ZWECKBESTIMMUNG

Der Duschklappsitz dient als Sitzhilfe zur Erleichterung der Körperpflege im Bad- und Duschbereich für erwachsene Personen.

VERWENDUNG

Der Duschklappsitz dient Personen mit eingeschränkter Mobilität zur Erleichterung des Duschvorganges auf festen, ebenen und rutschhemmenden Böden.

KOMBINATION MIT HERSTELLERFREMDEN PRODUKTEN

Jede Kombination Ihres Duschklappsitzes mit nicht von uns gelieferten Komponenten stellt generell eine Veränderung Ihres Duschklappsitzes dar. Erkundigen Sie sich bei uns, ob es eine gültige Kombinationsfreigabe von uns gibt.

WIEDEREINSATZ

Ihr Duschklappsitz ist für einen Wiedereinsatz geeignet. Vor jedem Wiedereinsatz ist der Duschklappsitz einer kompletten Inspektion zu unterziehen.

☞ Die für den Wiedereinsatz erforderlichen hygienischen Maßnahmen sind nach einem validierten Hygieneplan durchzuführen und müssen eine Desinfektion einschließen.

In Abhängigkeit des Wartungsergebnisses ist ein mehrfacher Wiedereinsatz möglich.

LEBENSDAUER

Wir gehen bei ihrem Duschklappsitz von einer zu erwartenden durchschnittlichen Produktlebensdauer von 4 Jahren aus, soweit der Duschklappsitz innerhalb des bestimmungsgemäßen Gebrauchs eingesetzt wird und sämtliche Wartungs- und Servicevorgaben eingehalten werden.

Die Lebensdauer ihres Duschklappsitzes ist sowohl von der Benutzungshäufigkeit, der Einsatzumgebung und der Pflege abhängig.

Durch den Einsatz von Ersatzteilen lässt sich die Lebensdauer des Duschklappsitzes verlängern. Ersatzteile sind im Regelfall bis zu 5 Jahre nach Fertigungsauslauf erhältlich.

☞ Die angegebene Lebensdauer stellt keine zusätzliche Garantie dar.

LIEFERUMFANG

<u>Duschklappsitz</u>

(I) 1x Duschklappsitz vormontiert

(II) 1x Befestigungsmaterial (links, rechts)

– 1x Montage- und Gebrauchsanleitung

MONTAGEANLEITUNG

Die Durchführung der folgenden Montage ist von einem qualifizierten Fachmann durchzuführen.

Während der gesamten Montage auf Klemmstellen achten. – Quetschgefahr!

Den Arbeitsbereich während der Montage sauber halten!

Vergewissern Sie sich, dass im Montagebereich keine elektrischen Leitungen bzw. Rohre verlaufen.

Überzeugen Sie sich nach erfolgter Montage, dass der Duschklappsitz fest mit dem Untergrund verbunden ist!

Die Positionierung des Duschklappsitzes kann in der Dusche anwendungsgerecht frei gewählt werden, wenn die örtlichen Gegebenheiten geeignet sind. Dieses muss im Vorfeld von einem Fachmann überprüft werden.

1. Klappen Sie die Sitzfläche nach unten.
2. Richten Sie die Sitzfläche waagerecht in der gewünschten Sitzhöhe zum Boden aus.
3. Es muss gewährleistet sein, dass der Benutzer sich beim Sitzen sicher mit beiden Füßen auf dem Boden abstützen kann.
4. Markieren Sie die Bohrlöcher durch die Wandhalter an der Wand.
5. Das Bohren der Löcher, sowie die Montage mit für die Wandbeschaffenheit geeignetem Befestigungsmaterial, sollte nur von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden!

BEFESTIGUNGSMATERIAL

Wir hafteten nicht für falsches oder nicht den baulichen Gegebenheiten angepasstes Befestigungsmaterial sowie eine falsche Montage.

Das mitgelieferte Befestigungsmaterial ist für einen Wandaufbau (z. B.: Beton BN 25) berechnet. Sollten an dem Anbringungsort andere Wandaufbauten vorhanden sein, ist der Fachmann dazu verpflichtet, sich entsprechend den baulichen Gegebenheiten über ein geeignetes Befestigungsmaterial zu informieren und dieses zu verwenden.

GEBRAUCHSANLEITUNG

Stellen Sie sich nicht mit den Füßen auf die Sitzplatte. – Sturzgefahr!

Überzeugen Sie sich vor der Benutzung von dem gebrauchsfähigen Zustand Ihres Duschklappsitzes. – Unfallgefahr!

Einen verformten Duschklappsitz nicht Richten und wieder einsetzen. – Unfallgefahr!

Setzen Sie sich immer mittig auf die Sitzplatte.

Seifen- und Duschmittel erhöhen die Rutschgefahr!

Nach der Benutzung den Sitz vorsichtig nach oben klappen. – Klemmgefahr!

Nach dem Reinigen den festen Sitz aller Bauteile und die korrekte Funktion sicherstellen.

Die Fa. MEYRA kann im Sinne der Produkthaftung nicht für Schäden oder Risiken haftbar gemacht werden, die durch unbeaufsichtigte Kinder im Zusammenhang mit dem Duschklappsitz verursacht werden!

Ihr Duschklappsitz kann entflammbare Materialien enthalten.

Das Rauchen beim Umgang mit dem Duschklappsitz ist verboten.

Bei direkter Wärmestrahlung (Sonnenlicht, Wärmequellen etc.) kann sich der Duschklappsitz auf Temperaturen über 41 °C erhitzen.

– Es besteht Verletzungsgefahr bei Berühren durch unbedeckte Hautpartien!

Duschklappsitz klappen

Hochklappen

1. Dazu den Sitz langsam nach oben klappen. – Klemmgefahr beim Hochklappen.

Runterklappen

1. Dazu den Sitz nach unten klappen.

REINIGUNG

Die Kunststoffteile werden durch nichtionische Tenside sowie durch Lösungsmittel und insbesondere Alkohole angegriffen.

Die Sitzplatte ist nicht zur Reinigung in Reinigungsautomaten geeignet!

Den Duschklappsitz mit einem geeigneten Reinigungstuch, in warmen Wasser getränkt und unter Verwendung eines ph-neutralen Handwaschmittels, säubern.

Mit klarem Wasser nachwischen und trocknen lassen.

DESINFEKTION

Wird der Duschklappsitz von mehreren Personen genutzt (z. B. im Pflegeheim), so ist die Anwendung eines handelsüblichen Desinfektionsmittels vorgeschrieben.

☞ Vor der Desinfektion ist der Duschklappsitz zu reinigen.

☞ Eine Sprüh- oder Wischdesinfektion ist mit geprüften und anerkannten Desinfektionsmitteln zugelassen.

Auskünfte über geprüfte und anerkannte Desinfektionsmittel und -verfahren kann Ihnen Ihre nationale Einrichtung für Gesundheitsschutz geben.

☞ Bei der Anwendung von Desinfektionsmitteln kann es vorkommen, dass u. U. Oberflächen durch die Anwendung in Mitleidenschaft gezogen werden, die die längerfristige Funktionsfähigkeit der Bauteile einschränken können.

☞ Dabei sind die vom Hersteller vorgegebenen Anwendungshinweise zu beachten.

REPARATUREN

Reparaturen sind grundsätzlich vom Fachhändler durchzuführen.

Instandsetzung

Zur Durchführung von Instandsetzungsarbeiten wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Fachhändler. Er ist in die Ausführung der Arbeiten eingewiesen.

Service

Falls Sie Fragen haben sollten oder Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler, der Beratung, Service sowie Reparaturen übernehmen kann.

Ersatzteile

Ersatzteile sind nur über einen Fachhändler zu beziehen. Im Falle einer Reparatur sind nur Original-Ersatzteile zu verwenden!

☞ Bauteile von Fremdfirmen können Störungen hervorrufen.


Eine Ersatzteilliste mit den entsprechenden Artikelnummern und Zeichnungen liegt beim Fachhändler.

Für eine korrekte Ersatzteil-Lieferung ist in jedem Fall die entsprechende Serien-Nr. (SN) des Duschklappsitzes mit anzugeben! Diese finden Sie auf dem Typenschild.

Bei jeder vom Fachhändler durchgeführten Reparatur am Duschklappsitz sind ergänzende Informationen wie z. B. Montage-/Bedienungshinweise der Bedienungsanleitung des Duschklappsitzes beizulegen sowie das Datum der Änderung festzuhalten und bei Ersatzteilbestellungen mit anzugeben.

Dadurch soll bei späteren Ersatzteilbestellungen eine falsche Bestellangabe verhindert werden.

ENTSORGUNG

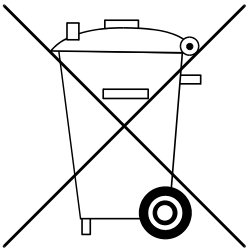

Die Entsorgung muss gemäß den jeweiligen nationalen gesetzlichen Bestimmungen erfolgen.

Erfragen Sie bitte bei der Stadt-/Gemeindeverwaltung nach örtlichen Entsorgungsunternehmen.

WARTUNG

Eine mangelhafte oder vernachlässigte Pflege und Wartung des Duschklappsitzes führt zur Einschränkung der Produzentenhaftung.

Wartungsarbeiten

Der folgende Wartungsplan stellt einen Leitfaden für die Durchführung der Wartungsarbeiten dar.

☞ Der Wartungsplan gibt keinen Aufschluss über den tatsächlich notwendigen, am Duschklappsitz festgestellten Arbeitsumfang.

Wartungsplan

WANN	WAS	ANMERKUNG
Vor der Benutzung	**Wandhalterungen auf Beschädigung prüfen.**	Prüfung selbst oder durch Hilfsperson durchführen. Bei Verformung oder Rissbildung umgehend Fachwerkstatt zur Instandsetzung verständigen. – Unfallgefahr!
Vor der Benutzung	**Sitzplatte auf Beschädigung prüfen.**	Prüfung selbst oder durch Hilfsperson durchführen. Bei Verformung oder Rissbildung umgehend Fachwerkstatt zur Instandsetzung verständigen. – Unfallgefahr!
Vor der Benutzung	**Festen Sitz des Duschklappsitzes prüfen und sicherstellen.**	Prüfung selbst oder durch Hilfsperson durchführen. Einen nicht fest mit dem Bauwerk verbundenen Duschklappsitz umgehend von der Fachwerkstatt befestigen lassen. – Unfallgefahr!
Nach der Benutzung	**Reinigung**	Reinigung selbst oder durch Hilfsperson durchführen.
Empfehlung des Herstellers: Alle 12 Monate (je nach Gebrauchshäufigkeit)	Sicherheitsinspektion	Vom Fachhändler durchzuführen.

TECHNISCHE DATEN

Alle Angaben innerhalb der < *Technischen Daten* > beziehen sich auf die Standard-Ausführung.

Maßtoleranz ±15 mm, ± 2°.

Angewendete Normen

Der Duschklappsitz entspricht der Norm:

– ISO 17966: 2016

Angaben nach ISO für Modell Duschklappsitz 3013972

Tiefe (ausgeklappt)	370 mm
Tiefe (eingeklappt)	80 mm
Breite	320 mm
Höhe	420 mm
Sitzfläche	320 x 250 mm
Belastbarkeit	120 kg
Gewicht	1,1 kg
Umgebungstemperatur	+10°C bis + 40°C
Lagertemperatur	-40°C bis + 50°C
max. Wassertemperatur zum Reinigen des Produkts	80°C
Typenschild	unter der Sitzplatte

Bedeutung der Symbole auf dem Typenschild


Hersteller



Bestellnummer



Seriennummer


Produktionsdatum


zul. Benutzergewicht


Bedienungsanleitung beachten



Medizinprodukt

GEWÄHRLEISTUNG / GARANTIE

Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung sowie unsachgemäß durchgeführte Wartungsarbeiten als auch insbesondere technische Änderungen und Ergänzungen (Anbauten) ohne unsere Zustimmung führen zum Erlöschen sowohl der Gewährleistungs- und Garantieansprüche als auch der Produkthaftung allgemein.

Für dieses Produkt übernehmen wir im Rahmen unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen die gesetzliche Gewährleistung und gegebenenfalls ausgesprochene bzw. vereinbarte Garantien. Für Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche wenden Sie sich bitte mit dem nachfolgenden GEWÄHRLEISTUNGS- / GARANTIE-ABSCHNITT und den darin benötigten Angaben über die Modellbezeichnung, die Lieferschein-Nr. mit Lieferdatum und Seriennummer (SN) an Ihren Fachhändler.

Die Seriennummer (SN) ist vom Typenschild abzulesen.

Voraussetzung für die Anerkennung von Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüchen ist in jedem Fall der bestimmungsgemäße Gebrauch des Produktes, die Verwendung von Original-Ersatzteilen durch Fachhändler sowie die regelmäßige Durchführung von Wartung und Inspektion.

Für Oberflächenbeschädigungen, Bereifung der Räder, Beschädigungen durch gelöste Schrauben oder Muttern sowie ausgeschlagene Befestigungsbohrungen durch häufige Montagearbeiten ist die Garantie ausgeschlossen.

Diese Bedienungsanleitung als Bestandteil des Produktes ist bei einem Benutzer- sowie Besitzerwechsel diesem mitzugeben.

Für die Bewertung unserer Produkte können Sie unser < *Infozentrum* > Bereich < *PMS* > auf unserer Webseite < www.meyra.com > benutzen.

Technische Änderungen im Sinne des Fortschrittes behalten wir uns vor.

Gewährleistungs- / Garantie-Abschnitt

Bitte ausfüllen! Im Bedarfsfall kopieren und die Kopie an Ihren Fachhändler einsenden.

Gewährleistung / Garantie

Modellbezeichnung:


Lieferschein-Nr.:

SN (siehe Typenschild):

Lieferdatum:

Stempel des Fachhändlers:

CE Dieses Produkt ist konform mit der EG-Richtlinie 93/42/EWG und erfüllt nach dem 25.05.2021 die Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte.

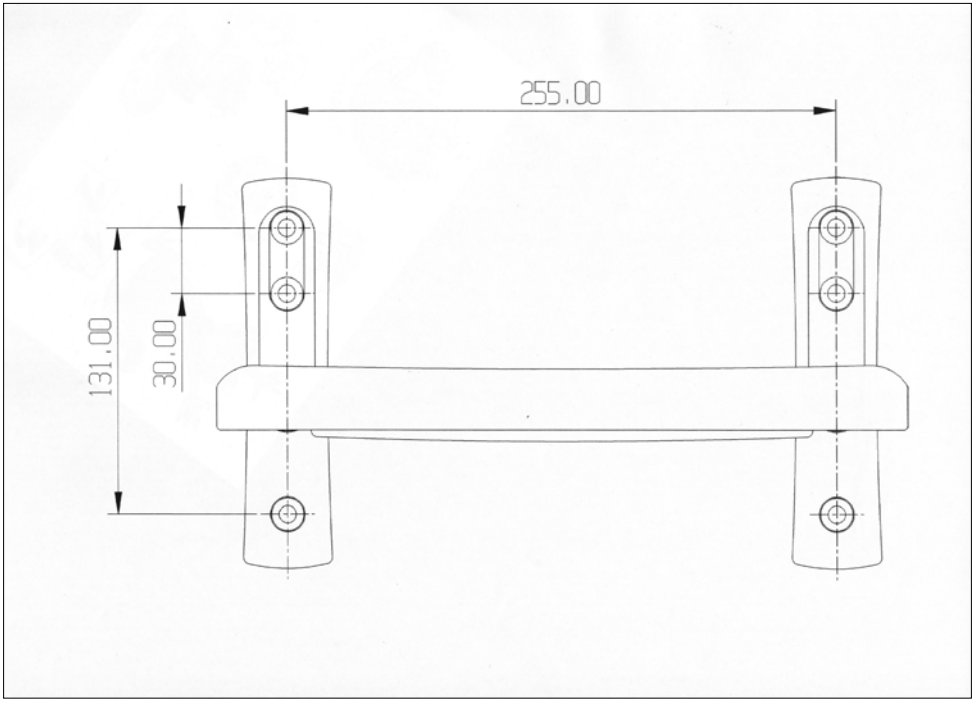
255.00
131.00
30.00

NOTIZEN / NOTES

Ihr Fachhändler / Your specialist dealer

MEYRA GmbH
Meyra-Ring 2
32689 Kalletal-Kalldorf
DEUTSCHLAND

Tel +49 5733 922 - 311
Fax +49 5733 922 - 9311

info@meyra.de

www.meyra.de